

Tous nos produits sont fabriqués en France avec des composants français et selon les réglementations européennes. Ils sont antibactériens et répondent aux critères du développement durable.

## BIOLAB - MOBILAB

AGENCEURS, CONCEPTEURS & FABRICANTS DE MOBILIER...  
...DEPUIS 40 ANS !

Biolab réalise tous vos meubles standards ou sur-mesure.

Adaptation des dimensions, choix des couleurs, des formes..., adaptation aux contraintes de sites, nous nous déplaçons dans votre établissement pour mesurer vos pièces et cerner au mieux vos besoins et vos envies afin de répondre à vos exigences. Placards, paillasse, meubles sous paillasse..., nous intervenons pour tous types de besoins et vous accompagnons à chaque étape de votre projet.

Quelle que soit la configuration de votre espace, nous avons la solution qu'il vous faut !

Ensemble nous dessinons vos meubles, puis les fabriquons dans notre atelier à Crosne dans le 91 (sud de Paris), nos poseurs installent ensuite votre mobilier en s'adaptant aux contraintes techniques de vos pièces.

Mobilab conçoit fabrique et pose tous vos meubles sur-mesure ou standards depuis plus de 40 ans.

Alors n'hésitez plus, ensemble parlons de votre projet.

## JUXTAPOSER

Les plateaux de paillasse sont sans débordement par rapport aux structures métalliques. De sorte que juxtaposer 2 meubles ne pose aucun problème... Il suffit de mettre à niveau les meubles successifs à l'aide des vérins dont sont munis la presque totalité des meubles, pour constituer paillasse linéaires, selon des combinaisons infinies...

## ALIGNER

Les tables de laboratoires sont réalisées en 2 profondeurs 600 ou 750 mm et une hauteur standardisée 900 mm. Elles varient donc essentiellement en longueurs ... Cette normalisation contribue à faciliter l'alignement des paillasse, en fonction de la conformation de la salle ... Des équipements ont été spécifiquement pensés en hauteur 800 mm, pour les personnes à mobilité réduite (PMR)...

## HOMOGENÉISER

Les choix de revêtements et d'accessoires ouvrent un large champ de création, le reste est affaire de goût... Le choix des couleurs, de la forme des piètements, des modèles de plateaux, du type de robinetterie ou de la couleur d'un accessoire fera le reste... tout en veillant à préserver l'harmonie d'ensemble pour que l'environnement soit propice au bien être des utilisateurs...

## MODIFIER

Le définitif est la plaie des installations techniques...  
Intégrées derrière des panneaux inamovibles comment réparer ?  
Comment changer une disposition qui ne convient plus ? Comment changer juste un module pour aménager un nouvel espace ?  
C'est à toutes ces questions que répond le concept de Modularité des meubles Mobilab...  
Dans la conception de chaque meuble, nous avons intégré des astuces de flexibilité, polyvalence, accessibilité...

## ASSOCIER

Un meuble + un meuble peut faire 2 meubles ou un troisième distinct des précédents, c'est là tout le principe de la Modularité...  
Des linéaires peuvent faire alterner, des armoires et des tables ou encore des laveries et des espaces de services pour disposer par exemple d'un lave-verrière, d'un réfrigérateur ou de matériels lourds de laboratoire (Fours, Etuves, Incubateurs...)  
Meubles sous paillasse, Meubles à portes et meubles à tiroirs constitueront des ensembles mixtes, flexibles, polyvalents du meilleur effet et surtout du meilleur usage.

## AGENCER

Un service d'étude gratuit.  
Notre bureau d'étude réalise les plans d'agencement en fonction des informations recueillies par le service commercial...  
Un plan permet de visualiser très facilement l'organisation de vos futures salles de cours... et de s'assurer de la cohérence entre les espaces à aménager et les mobiliers choisis.  
D'un côté, il y a vous, avec vos idées de couleurs, d'agencements, de matériaux, et de l'autre, nous sommes là pour vous guider dans vos choix, vous informer des contraintes techniques, des normes et surtout vous conseiller !

## RESPECTER LES NORMES ET LES LIEUX

La réussite d'un projet dépend souvent du respect de la configuration des espaces de circulation, des intervalles entre les tables, entre les tables et les meubles de rangement ou équipements de sécurité, de l'espace réservé aux élèves handicapés, de la prise en compte des accès dans la salle...  
De simples adaptations d'un ou plusieurs modules vont éliminer les aléas d'aménagement... La Modularité des Meubles Mobilab, c'est aussi la souplesse de nos conceptions et leur adaptabilité à vos besoins...



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE GRÈS EMAILLÉ

Collège "Pont de Bois" 91 St Chéron - Projet réalisé en partenariat avec le Conseil Général de L'Essonne

Il s'agit d'une salle carrée de 8500 x 8500 mm environ; l'équipe enseignante souhaite pouvoir accueillir dans la salle, au moins 30 élèves...

La solution proposée : 4 Rangées de 3 Paillasses...

Les Paillasses côté façade et côté couloir de dimensions 1800 x 600 x 900 mm (MOB 6030) sont des tables pour 3 élèves, les paillasses au centre de la salle de dimensions 1200 x 600 x 900 mm (MOB 6020) sont des tables de 2 élèves...

2 allées de 900 mm permettent la circulation aisée des personnes et des chariots...tout en respectant les Normes d'évacuation...

32 Elèves peuvent être accueillis dans cette salle.

Paillasses Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement....etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

## La paillasse sèche

### en grès émaillé



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu de Dalles de Grès Collées, de grande largeur 600 mm. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

Un joint à durcisseur incorporé assure la jonction des dalles entre elles et du pourtour du plateau. Ce joint antiacide est insensible aux agents chimiques et résiste à toute déprédation



Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont irrachables

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four

Piètements en H, entretoisés conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure...

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*

### QU'EST-CE QUE LE GRÈS EMAILLÉ COLLÉ ?

Un biscuit de grès cuit à haute température est émaillé en surface.

Le procédé de fabrication assure une planéité parfaite des dalles.

L'épaisseur du matériau est normalisée à 8 mm.

La partie émaillée confère au matériau une résistance aux agents chimiques et aux colorants usuels.

Collé et jointé anti-acide sur un support CTBH, le grès acquiert une bonne résistance mécanique qui en fait un revêtement idéal pour les laboratoires scolaires.

Les Dalles de Grès existent en 2 dimensions, 600 x 600 mm et 600 x 750 mm.

Ce matériau peut être usiné, découpé, percé...

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Grès Emaillé 600 x 600 x 900 mm	MOB 6000	281 €
Table Sèche Grès Emaillé 750 x 600 x 900 mm	MOB 6070	316 €
Table Sèche Grès Emaillé 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6020	372 €
Table Sèche Grès Emaillé 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6080	420 €
Table Sèche Grès Emaillé 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6030	496 €
Table Sèche Grès Emaillé 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6040	743 €

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Grès Emaillé 600 x 750 x 900 mm	MOB 7000	316 €
Table Sèche Grès Emaillé 750 x 750 x 900 mm	MOB 7070	332 €
Table Sèche Grès Emaillé 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7020	436 €
Table Sèche Grès Emaillé 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7080	526 €
Table Sèche Grès Emaillé 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7030	548 €
Table Sèche Grès Emaillé 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7040	872 €



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE GRÈS AUTOPORTANT

Les Atouts des Dalles Céramique ALLIA pour les laboratoires :

- Elles sont Modulaires et Autoportantes
- Elles sont Résistantes aux Substances Chimiques et aux Chocs Thermiques
- Elles sont Durables et Résistantes à l'Abrasion

Il s'agit d'un produit de très grande qualité technique et de grande qualité d'hygiène.

ALLIA est une marque Française dont les usines sont basées à Limoges.

## La paillasse sèche

### en grès autoportant


#### 2 Types de Surfaces sont proposés :

« Dalles Lisses » ou « Dalles à 2 Rebords »  
(Autres possibilités exclusivement sur projet)


#### 2 Profondeurs de dalles 600 mm ou 750 mm

Largeurs de Paillasses proposées : 600, 750, 1200, 1350, 1500 et 1800 mm... Au-delà toutes les associations en linéaires sont possibles...

(Voir le tableau ci dessous des combinaisons largeur x profondeur)

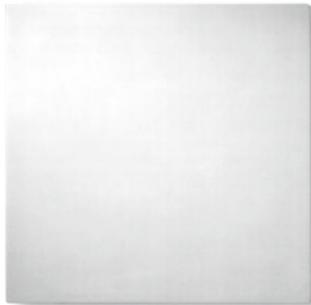

Dalles Lisses

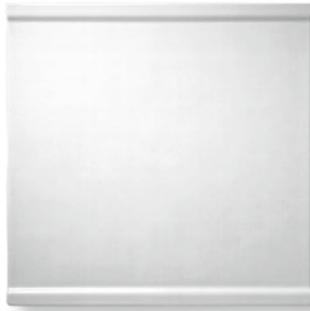

Dalles à 2 Rebords

#### Des Propriétés Physico-chimiques

- Résistance à la charge jusqu'à 560 Kg pour 600 x 600 mm (Norme NFD 14-504)
- Porosité de surface émaillée nulle (Étanchéité totale selon NFD 14-601 et NFD 14-512)
- Emaillage simultané des surfaces et des chants et cuisson à 1230°C pour une finition ultra-dure
- Résistance aux agents chimiques les plus agressifs (à l'exception de l'acide fluorhydrique, selon Norme NFD 14-506)
- Résistance aux chocs thermiques (Norme NFD 14-503)
- Résistance à l'abrasion selon Norme NFD 14-501
- Résistance aux alcalins à chaud selon Norme NFD 14-507

#### Principaux secteurs d'utilisation :

- Chimie de Base et Chimie Fine
- Médecine
- Pharmacie
- Biologie et Biotechnologie
- Cosmétique
- Industrie : Fabrication, recherche et contrôle
- Education...

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU LISSE		PLATEAU À REBORDS	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Table Sèche Grès Autoportant	600 x 600 x 900 mm	MOB 6001L 262 €	MOB 6001R 287 €	
Table Sèche Grès Autoportant	750 x 600 x 900 mm	MOB 6071L 301 €	MOB 6071R 323 €	
Table Sèche Grès Autoportant	1200 x 600 x 900 mm	MOB 6021L 458 €	MOB 6021R 482 €	
Table Sèche Grès Autoportant	1350 x 600 x 900 mm	MOB 6051L 553 €		
Table Sèche Grès Autoportant	1500 x 600 x 900 mm	MOB 6081L 528 €	MOB 6081R 553 €	
Table Sèche Grès Autoportant	1800 x 600 x 900 mm	MOB 6031L 618 €	MOB 6031R 641 €	

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU LISSE		PLATEAU À REBORDS	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Table Sèche Grès Autoportant	600 x 750 x 900 mm	MOB 7001L 301 €	MOB 7001R 323 €	
Table Sèche Grès Autoportant	1200 x 750 x 900 mm	MOB 7021L 518 €	MOB 7021R 546 €	
Table Sèche Grès Autoportant	1500 x 750 x 900 mm	MOB 7081L 711 €		
Table Sèche Grès Autoportant	1800 x 750 x 900 mm	MOB 7031L 721 €	MOB 7031R 744 €	



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure...



Piètements en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

#### QU'EST-CE QUE LE GRÈS MOULÉ OU DALLES AUTOPORTANTES ?

C'est une patte de grès coulée en monobloc et cuite dans des fours tunnels à 1230°C pendant plus de 30 minutes sur un cycle de 17 heures afin d'assurer une dureté maximale de la couche d'émail.

L'épaisseur d'émail de 10 à 12/10ème de mm procure une étanchéité absolue pour une excellent tenue dans le temps.

Les dalles d'épaisseur 30 mm repose directement sur la structure ou le meuble porteur.

L'Aspect de surface lisse et brillant assure une propreté maximale facilitant les opérations de nettoyage.

La résistance à tous les agents chimiques (acides, bases, sels, solvants et colorants) garantit une durée de vie exceptionnelle au produit.

Les chants sont arrondis et émaillés, les cuves et dossierers sont moulés dans la masse.

Les seuls joints se situent à la jonction des dalles entres elles et à la jonction des dalles et du support.

Le Joint anti-acides à bi-composant assure la parfaite étanchéité et la finition des plans de travail.



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE VERRE EMAILLÉ

Cité Scolaire "Les Renardières" 92 Courbevoie - Projet réalisé en partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine et le Conseil Régional d'Ile de France

Il s'agit d'une salle complexe à agencer: très large et peu profonde; les enseignants souhaitent utiliser cette salle pour des Travaux Pratiques en demi-groupe de 16 Elèves qui travaillent en binômes ou pour des cours en classe entière...

Les paillasse doivent être polyvalentes et faciles d'entretien, résister aussi bien aux équipements de physiques, qu'aux colorants de biologie ou aux produits chimiques...

Enfin chaque paillasse doit être équipée d'un poste informatique et offrir un grand espace de manipulation...

De nombreuses astuces ont été utilisées pour répondre à toutes ces demandes et en particulier, l'association de paillasse sèches de 2 ou 3 élèves à des plots informatiques... Le choix du Verre Emaillé s'est évidemment imposé comme réponse à la polyvalence des plans de travail...

Plots Informatiques, Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

## La paillasse sèche

en verre émaillé (Emalit)



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" émaillé de la taille exacte du plateau fini.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four. Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piétements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Un joint silicone assure la jonction du panneau de verre au pourtour PVC du chant. Ce joint anti-acide est insensible aux agents chimiques et parfaitement étanche. L'élasticité du joint absorbe les pressions dues à la dilation du verre.

### QU'EST-CE QUE LE VERRE EMAILLÉ ?

C'est une plaque de verre de 6 mm d'épaisseur réalisée en un seul moulage et munie d'une sous-couche colorée (blanche pour le laboratoire).

Le matériau est posé sur un support en bois compressé (CTBH) et fixé à l'aide d'un mastic silicone assurant à la fois le collage de la plaque au support et le joint d'étanchéité en pourtour.

Ce matériau non poreux est un revêtement idéal pour les laboratoires de microbiologie, d'enseignement sanitaire, les salles blanches, les salles de SVT et ExAO.

En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Verre Emailé 600 x 600 x 900 mm	MOB 6007	302 €
Table Sèche Verre Emailé 750 x 600 x 900 mm	MOB 6077	336 €
Table Sèche Verre Emailé 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6027	393 €
Table Sèche Verre Emailé 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6087	441 €
Table Sèche Verre Emailé 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6037	518 €
Table Sèche Verre Emailé 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6047	785 €

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Verre Emailé 600 x 750 x 900 mm	MOB 7007	336 €
Table Sèche Verre Emailé 750 x 750 x 900 mm	MOB 7077	353 €
Table Sèche Verre Emailé 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7027	458 €
Table Sèche Verre Emailé 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7087	537 €
Table Sèche Verre Emailé 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7037	572 €
Table Sèche Verre Emailé 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7047	915 €



## LES TABLES SÈCHES

### EN POLYSINC

Polysinc c'est une solution haut de gamme pour tous les plans de travail, éviers, bacs résistants aux agents corrosifs. Polysinc est une ligne complète de plans de travail, bacs et éviers en polypropylène, seul matériau garanti anticorrosion. Ce sont des modules moulés en standard ou chaudronnés sur mesures.

Polysinc comprend une vaste gamme de modèles et de dimensions, pour composer des plans de travail entièrement en polypropylène PP pour les laboratoires de chimie universitaires, les instituts de recherche, les écoles, l'industrie, les hôpitaux et les pharmacies.

Le polypropylène PP est le matériau idéal pour résoudre les problèmes de corrosion, grâce à son excellente résistance aux acides, aux alcalis et aux bases.

Gamme modulaire de plans de travail, éviers, bacs, poubelles et siphons en mesure de répondre à toutes les exigences d'agencement.

Impact esthétique optimal, grâce à un design élégant.

La ligne Polysinc se distingue par sa légèreté, sa facilité d'installation, son absorption des chocs.

Possibilité de réaliser des plans de travail personnalisés en fonction des exigences du client.

## La paillasse sèche

en polysinc (polypropylène)



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le plateau est un module monobloc en polypropylène d'épaisseur 40 mm réalisé par moulage à injection, avec bordure relevée anti-gouttes

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables



Un voile de fond fixé en 4 points sur les piétements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four. Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Tablette pose documents optionnelle

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

### Paillasses en Polysinc

Ces tables sont proposées en profondeurs 600 et 750 mm. Trois largeurs 1200, 1500 ou 1800 mm. Des modules spéciaux peuvent être étudiés dans le cadre de projets.

Modèles présentés MOB 7026 "Paillasse en 1200 x 750 x 900 mm"

En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques



### Avis d'expert...

Des Plots Techniques en Polysinc Moulé sont proposés dans les pages suivantes de ce catalogue... Les Tables en Polysinc ne peuvent se juxtaposer qu'aux plots en Polysinc...

### QU'EST-CE QUE LE POLYSINC ?

C'est une technologie de moulage du Polypropylène qui fait l'objet d'un brevet déposé.

Par ses qualités de résistance aux acides, solvants et bases, et par sa tenue exceptionnelle à la température, le polypropylène résout la plupart des problèmes de résistance à la corrosion.

Rigide mais léger, il absorbe parfaitement les chocs.

Ce matériau est donc parfaitement adapté aux laboratoires de chimie et aux manipulations fréquentes de verrerie.

C'est un produit de qualité et d'esthétique élevée à un coût très raisonnable pour ses performances...

### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Polysinc	1500 x 600 x 900 mm	MOB 6086 626 €

### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Polysinc	1200 x 750 x 900 mm	MOB 7026 532 €
Table Sèche en Polysinc	1500 x 750 x 900 mm	MOB 7086 635 €
Table Sèche en Polysinc	1800 x 750 x 900 mm	MOB 7036 772 €



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE COMPACT TOPLAB PLUS

Collège "Georges Politzer" 94 Ivry sur Seine - Projet réalisé en partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne  
Une salle aux proportions idéales pouvant accueillir 30 Elèves...

5 Rangées sur 3 colonnes de paillasse; 15 Paillasse de 2 élèves...la combinaison parfaite de la pédagogie en binôme.

Les grands plans de travail de 1500 x 600 x 900 mm (MOB 6085) revêtus de Compact TopLab (chants non dégradables), offrent une solution polyvalente à cette salle, utilisée aussi bien en salle banalisée, qu'en Travaux Pratiques...

Les équipements électriques sont astucieusement alimentés par une goulotte métallique qui enveloppe le piètement en conservant l'esthétique de la paillasse...

Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Accessoires et Rangements (fond de salle)...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite..

## La paillasse sèche

### en Compact TopLab Plus



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Aucun chant...un atout de plus pour les laboratoires d'enseignement.

L'âme du panneau est composée de résine synthétique, elle est polie et chanfreinée.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables.

Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont innarrachables

Deux coloris de surface sont proposés : Gris Perle ou Blanc Crème...**(autres coloris sur devis)**

L'âme du matériau est toujours noire.



La résistance aux produits chimiques les plus fréquemment utilisés, tels que les acides, les bases, les solvants et les colorants biologiques concentrés, doit être de 24 heures minimum (test PSI).

Le plateau de forte épaisseur 16 mm autoporteur. Densité : environ 1400 kg/m<sup>3</sup> selon ISO R1183

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

**Résistance à la rayure :** > 4 N selon ISO 4586 - EN 438

**Résistance à l'abrasion :** index numéro 3 selon EN 438, 675 rotations selon NEN 438

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*

#### QU'EST-CE QUE LE TOPLAB PLUS ?

Le TopLabPLUS est un panneau plan autoporteur à base de résines phénoliques renforcées de fibres cellulosiques.

Chaque panneau est doté d'une surface décor intégrée à base de résines pigmentées polymérisées par faisceau électronique. Ce procédé exclusif lui confère une remarquable résistance aux produits chimiques les plus agressifs ainsi qu'une grande facilité de nettoyage et de maintenance.

D'autre part, ce matériau se caractérise par ses qualités écologiques de fabrication et de recyclage.

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en TopLab Plus 600 x 600 x 900 mm	MOB 6005	299 €
Table Sèche en TopLab Plus 750 x 600 x 900 mm	MOB 6075	320 €
Table Sèche en TopLab Plus 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6025	388 €
Table Sèche en TopLab Plus 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6085	520 €
Table Sèche en TopLab Plus 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6035	564 €
Table Sèche en TopLab Plus 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6045	774 €

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Verre Emailé 600 x 750 x 900 mm	MOB 7005	320 €
Table Sèche Verre Emailé 750 x 750 x 900 mm	MOB 7075	390 €
Table Sèche Verre Emailé 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7025	490 €
Table Sèche Verre Emailé 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7085	628 €
Table Sèche Verre Emailé 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7035	651 €
Table Sèche Verre Emailé 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7045	980 €



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE STRATIFIÉ

Lycée "Jacques Decour" 75 Paris

Salle de Travaux Pratiques d'Optique de 24 Places assises...

La conception d'une salle résulte de la combinaison de demandes spécifiques et de contraintes liées au site.

Les contraintes: la configuration particulière de cette salle très longue et étroite, la multitude de piliers, la nécessité d'utiliser des colonnes de câblage pour récupérer les fluides électriques à l'étage supérieur...

Les demandes: des plans de travail vastes et parfaitement linéaires pour positionner et régler des bancs d'optiques; un revêtement résistant au poids et à l'abrasion, facile à entretenir...

Le concept d'agencement de cette salle: la réalisation d'îlots par juxtaposition et association de paillasses en stratifié de 1500 x 600 x 900 mm (MOB 6083)...

Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Accessoires et Rangements (meubles sous paillasses par exemple)...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite..

## La paillasse sèche en stratifié



En Hauteur 800 mm,  
ces paillasses sont adaptées aux  
Personnes à Mobilité Réduite.



Paillasse en stratifié - postformé  
Stratifié plaqué et rabattu sur l'avant.  
Le plan est débordant sur l'avant de la paillasse d'environ 10 mm...  
Les paillasse en 600 mm ont un plateau de profondeur totale 610 mm.  
Les paillasse en 750 mm ont un plateau de profondeur totale de 760 mm  
Les autres chants sont droits en PVC  
plaqué pour permettre l'association et la juxtaposition de plusieurs paillasse  
3 Coloris au choix: Sable, Blanc Kaolin ou hêtre clair

*En option les paillasse peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*

### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Stratifié Bords Droits		Stratifié Postformé	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 600 x 900 mm	MOB 6003	290 €	MOB 60033	297 €
Paillasse Sèche 750 x 600 x 900 mm	MOB 6073	317 €	MOB 60733	325 €
Paillasse Sèche 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6023	350 €	MOB 60233	356 €
Paillasse Sèche 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6083	368 €	MOB 60833	374 €
Paillasse Sèche 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6033	389 €	MOB 60333	394 €
Paillasse Sèche 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6043	699 €	MOB 60433	711 €

### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Stratifié Bords Droits		Stratifié Postformé	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 750 x 900 mm	MOB 7003	317 €	MOB 70033	325 €
Paillasse Sèche 750 x 750 x 900 mm	MOB 7073	351 €	MOB 70733	357 €
Paillasse Sèche 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7023	373 €	MOB 70233	379 €
Paillasse Sèche 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7083	404 €	MOB 70833	412 €
Paillasse Sèche 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7033	439 €	MOB 70333	445 €
Paillasse Sèche 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7043	746 €	MOB 70433	752 €

### QU'EST-CE QUE LE STRATIFIÉ ?

Le stratifié ou HPL qui signifie high pressure laminate ou en français : stratifié haute pression, est une feuille d'épaisseur 9/10 ème, obtenu par le pressage à chaud d'un sandwich de kraft, imprégné d'une résine phénolique liante et protégé en surface par une résine mélamine très résistante. Non poreux, le stratifié fait barrage à l'eau et résiste à des températures élevées (180°C). Véritable produit d'ébénisterie, le stratifié s'emploie en placage, collé sur un panneau support à base de particules de bois agglomérées, haute densité. Sa bonne résistance aux chocs, son entretien facile et sa planéité en font un revêtement bien adapté aux laboratoires de physique, d'électronique et de technologie...



## LES TABLES SÈCHES

### REVÊTUES DE MÉLAMINÉ

Il s'agit d'une solution pour les très petits budgets, et exclusivement en milieu sec.

La planéité du matériau permet de réaliser des plans de travail pour un usage mixte aussi bien en cours, qu'en IP.

La surface n'est pas très résistante aux agressions mécaniques (rayures, tags,...) ni à la chaleur...

C'est une solution d'appoint dont la longévité dépend du comportement des utilisateurs.

## La paillasse sèche

en mélaminé



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four. Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table



Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Tablette porte documents optionnelle

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piétements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*

### QU'EST-CE QUE LE MÉLAMINÉ ?

Revêtement vinylique double face imprégné sur un bois compressé haute densité de 19 mm d'épaisseur, bordé d'une rive PVC rigide.

En laboratoire la couleur privilégiée est le blanc, mais une large palette de couleurs peut être proposée.

La surface est sans joint, lisse, se nettoie facilement à l'aide de détergeants classiques.

C'est un revêtement avant tout économique pour des utilisations en table de dépose, d'écriture et de service....

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Mélaminé 600 x 600 x 900 mm	MOB 6002	249 €
Table Sèche en Mélaminé 750 x 600 x 900 mm	MOB 6072	272 €
Table Sèche en Mélaminé 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6022	299 €
Table Sèche en Mélaminé 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6082	311 €
Table Sèche en Mélaminé 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6032	336 €
Table Sèche en Mélaminé 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6042	595 €

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Mélaminé 600 x 750 x 900 mm	MOB 7002	272 €
Table Sèche en Mélaminé 750 x 750 x 900 mm	MOB 7072	306 €
Table Sèche en Mélaminé 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7022	322 €
Table Sèche en Mélaminé 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7082	333 €
Table Sèche en Mélaminé 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7032	354 €
Table Sèche en Mélaminé 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7042	643 €

## La paillasse sèche

### en multipli



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.  
Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Le plateau de forte épaisseur 40 mm est constitué d'un panneau en Multiplis.  
Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables.  
Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables

Tablette porte documents optionnelle

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm.  
Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme.  
Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément)

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électrique... Voir notre rubrique "accessoires".*

#### Paillasses en Multipli

Une gamme de 5 modèles vous est proposée dans chacune des profondeurs, vous permettant de réaliser par simple combinaison une infinité de linéaires...

Modèles présentés MOB 6024 "Paillasse en 1200 x 600 x 900 mm"  
+ Option Tablette porte-documents

#### QU'EST-CE QUE LE MULTIPLI ?

Comme son nom l'indique, ce revêtement est constitué d'un mille-feuilles de contreplaqué...

Les feuilles de contreplaqué sont contrecollées dans le sens inverse des fibres du bois.

Une feuille parfaitement unie et poncée contrebalance le matériau éliminant tout risque d'effet bilame.

Mobilab utilise du Multiplis en épaisseur 40 mm.  
Le revêtement est brut et les chants sont en PVC rigide.  
Ce matériau est destiné aux espaces de travail avec des outils et machines...

#### TABLES DE PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Multiplis 600 x 600 x 900 mm	MOB 6004	299 €
Table Sèche en Multiplis 750 x 600 x 900 mm	MOB 6074	331 €
Table Sèche en Multiplis 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6024	390 €
Table Sèche en Multiplis 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6084	439 €
Table Sèche en Multiplis 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6034	513 €

#### TABLES DE PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche en Multiplis 600 x 750 x 900 mm	MOB 7004	331 €
Table Sèche en Multiplis 750 x 750 x 900 mm	MOB 7074	363 €
Table Sèche en Multiplis 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7024	449 €
Table Sèche en Multiplis 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7084	531 €
Table Sèche en Multiplis 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7034	567 €



## LES PLOTS TECHNIQUES

### LES MODULES QUI CENTRALISENT TOUS LES FLUIDES

Lycée "Gustave Ferrié" 75 Paris

Salle de Travaux Pratiques Polyvalente...L'eau, l'électricité et l'Informatique sont prévus à chaque poste de travail.

Les Plots techniques positionnés en extrémité de tables offrent un point d'eau destiné aux expériences de chimie.

Revêtu d'un matériau assorti à celui de la paillasse à laquelle il est associé; le plot technique est ici équipé d'une cuve en Polypropylène et d'un chandelier de laboratoire de type "Simple Robinet d'Eau Froide"

Le meuble renferme toutes les attentes de fluides : alimentation d'eau, évacuation des eaux usées, alimentation en courant faible, alimentation en courant fort...

Les fluides récupérés à l'étage inférieur sont ainsi ramenés au travers du plancher au droit de chaque plot.

Les alimentations centralisées sont facilement accessibles aux équipes d'entretien en cas d'incident technique.

## Le plot technique

### standard

- C'est le module qui centralise tous les fluides
- Le plot "Standard" se caractérise par un encombrement de 600 mm de façade
- C'est en même temps un meuble de protection des alimentations et des évacuations de fluides



En Hauteur 800 mm, ces paillasse sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Des joints anti-acides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

Le plot technique Standard est fourni complet avec une cuve en vulcathène de 300 x 300 mm de couleur beige et un chandelier Education Nationale simple robinet

Le plot est revêtu de Grès Emailé ou de Verre Emailé

Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Le meuble est un caisson fermé par une porte battante à la française condamnable par serrure à clés. L'ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm. Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon pnylex, une alimentation flexible

Le Plot Technique Standard 600 mm de façade Il est proposé comme tous les autres meubles de la gamme en profondeur 600 mm ou 750 mm. Modèles présentés MOB 26300 "Plot Technique Standard Revêtement Grès Cuve Vulcathène 300 x 300 mm"

**Pensez à l'Installation !**  
Les raccords peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

**Option Cuve Vulcathène 450 x 450 mm, uniquement sur les plots techniques de profondeur 750 mm**

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Chandelier Court Antivandalisme	OPT 04	68 €
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €
Cuve Vulcathène 450 x 450 mm	OPT 09	111 €

### LES PLOTS STANDARDS DE PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Standard Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	600 x 600 x 900 mm	MOB 26300
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	588 €
Plot Standard Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	600 x 600 x 900 mm	MOB 26307
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	617 €

### LES PLOTS STANDARDS DE PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Standard Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	600 x 750 x 900 mm	MOB 27300
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	626 €
Plot Standard Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	600 x 750 x 900 mm	MOB 27307
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	672 €

## Le plot technique étroit



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

- C'est le module qui centralise tous les fluides
- Le plot "Étroit" se caractérise par un encombrement réduit de 450 mm de façade
- C'est en même temps un meuble de protection des alimentations et des évacuations de fluides

Des joints anti-acides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

Le plot est revêtu de Grès Emailé ou de Verre Emailé

Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Le plot technique Étroit est fourni complet avec une cuve en vulcathène de 300 x 300 mm de couleur beige et un chandelier Education Nationale simple robinet

Le meuble est un caisson fermé par une porte battante à la française condamnable par serrure à clés. L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm. Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure

Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon pylex, une alimentation flexible

**Le Plot Technique**  
Étroit 450 mm de façade  
Il est proposé comme tous les autres meubles de la gamme en profondeur 600 mm ou 750 mm.  
Modèles présentés MOB 16300 "Plot Technique Étroit Revêtement Grès Cuve Vulcathène 300 x 300 mm"

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Cuve Polysinc "Bénitier" 150 x 300 mm	OPT 01	27 €
Chandelier Court Antivandalisme	OPT 04	68 €
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €



### LES PLOTS ÉTROITS DE PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Étroit Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	450 x 600 x 900 mm	MOB 16300
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	554 €
Plot Étroit Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	450 x 600 x 900 mm	MOB 16307
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	581 €

### LES PLOTS ÉTROITS DE PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Étroit Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	450 x 750 x 900 mm	MOB 17300
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	584 €
Plot Étroit Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	450 x 750 x 900 mm	MOB 17307
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm	635 €

## Le plot technique

### dalle autoportante

Les atouts des dalles Céramique ALLIA pour les laboratoires :

- Elles sont modulaires et Autoportantes
- Elles sont Résistantes aux Substances Chimiques et aux Chocs Thermiques
- Elles sont Durables et Résistantes à l'Abrasion

ALLIA est une marque Française dont les usines sont basées à Limoges.



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



Dalle Cuvette Lisse



Dalle Bénitier Lisse



Dalle Bénitier 2 Rebords



Dalle Cuve Large



Dalle Cuve Large 2 Rebords

#### 2 Types de Surfaces sont proposés :

« Dalles Lisses » ou « Dalles à 2 Rebords »  
(Toutes les dimensions n'existent pas forcément dans les 2 modèles de finition)

2 Profondeurs de plots 600 mm ou 750 mm

1 Largeur de Plot : 600 mm...

Le meuble est un caisson fermé par une porte battante à la française condamnable par serrure à clés.

L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm.  
Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure

#### 3 Modèles de Cuves :

« Cuvette » 235 x 235 x 165 mm

« Bénitier » 260 x 130 x 90 mm

« Cuve Large » 450 x 390 x 220 mm



En standard Mobilab livré avec chaque plot, un siphon pylex, une alimentation flexible, et un chandelier Education Nationale simple robinet

### ACCESSOIRES

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Grille Céramique diamètre 55 mm	GRSK 55	33 €

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm



### PLOTS DALLES AUTOPORTANTES PROFONDEUR 600 mm

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU LISSE		PLATEAU À REBORDS	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Plot Technique Grès Autoportant - Cuvette 600 x 600 x 900 mm	MOB 26101L	692 €		
Plot Technique Grès Autoportant - Bénitier 600 x 600 x 900 mm	MOB 26201L	680 €		
Plot Technique Grès Autoportant - Cuve Large 600 x 600 x 900 mm	MOB 26401L	735 €	MOB 26401R	749 €

### PLOTS DALLES AUTOPORTANTES PROFONDEUR 750 mm

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU LISSE		PLATEAU À REBORDS	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Plot Technique Grès Autoportant - Bénitier 600 x 750 x 900 mm	MOB 27201L	752 €	MOB 27201R	767 €
Plot Technique Grès Autoportant - Cuve Large 600 x 750 x 900 mm	MOB 27401L	872 €		



Grille Céramique

## Le plot technique handicapé



Hauteur 800 mm, ces paillasse sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Des joints anti-acides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre ou Trespa) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau



Cuve à fond plat optimisé pour l'utilisation de fauteuils roulants.

Le plot est revêtu de Grès Emailé, de Verre Emailé ou Trespa

Robinet mélangeur avec commande au coude livré en standard.



En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon décalé, une alimentation flexible, un robinet avec commande au coude. D'autres robinets sont possibles sur demande (robinets infra-rouge...)



Prévoir les attentes bien en arrière du plot en raison de la largeur étroite du caisson.

Le meuble est un caisson fermé par une double porte battante condamnable par serrure à clés. Celui-ci est décalé de 30 cm vers l'arrière pour laisser l'accessibilité à un fauteuil roulant. L'ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Hauteur des Plots handicapé à 800 mm.

### LES PLOTS PMR PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Grès Emailé 600 x 600 x 800 mm	MOB 56700	778 €
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Verre Emailé 600 x 600 x 800 mm	MOB 56707	912 €
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Trespa 600 x 600 x 800 mm	MOB 56705	967 €

### LES PLOTS PMR PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Grès Emailé 600 x 750 x 800 mm	MOB 57700	790 €
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Verre Emailé 600 x 750 x 800 mm	MOB 57707	926 €
Plot Handicapé Plateau Revêtu de Trespa 600 x 750 x 800 mm	MOB 57705	997 €



30 cm par rapport au bord du plateau

## Le plot technique

### de grande largeur 1200 mm simple cuve



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le plot technique de Grande Largeur est fourni complet avec une cuve en vulcathène de 600 x 450 mm (à l'exception du plot en Verre de profondeur 600 mm, livré avec une cuve de 300 x 300 mm) et un chandelier Education Nationale double robinet, avec 1 Embout démontable pour trompe à vide...  
En standard la cuve est fournie en coloris Beige.



Vérin de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm



Le plot est revêtu de Grès Emailé ou de Verre Emailé

Des joints antiacides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon pylex, une alimentation flexible



#### Plot Technique

Grande Largeur 1200 mm de façade  
Il est proposé comme tous les autres meubles de la gamme en profondeur 600 mm ou 750 mm.  
Modèles présentés MOB 36500  
"Plot Technique Grande Largeur Revêtement Grès Cuve Vulcathène 600 x 450 mm"

#### Des Plots Sur mesure...

Lors de la réalisation de vos linéaires, afin de garder des proportions harmonieuses, les plots de grande largeur peuvent être réalisés sur mesure dans des largeurs spécifiques, sans supplément de coût!

#### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €
Mélangeur EC/EF	OPT 11	86 €
Mitigeur avec Douchette	OPT 12	130 €



### LES PLOTS GRANDE LARGEUR PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Large Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	1200 x 600 x 900 mm	MOB 36500
- Cuve Vulcathène de	600 x 450 mm	705 €
Plot Large Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	1200 x 600 x 900 mm	MOB 36507
- Cuve Vulcathène de	300 x 300 mm*	855 €
<i>(Cuve en 450 mm, non adaptables sur les plots en Emalit de profondeur 600 mm)</i>		

### LES PLOTS GRANDE LARGEUR PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Large Plateau Revêtu de Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	1200 x 750 x 900 mm	MOB 37500
- Cuve Vulcathène de	600 x 450 mm	741 €
Plot Large Plateau Revêtu de Verre Emailé		
- Dimensions du Plot	1200 x 750 x 900 mm	MOB 37507
- Cuve Vulcathène de	600 x 450 mm	905 €

## Le plot technique

### “Vidoir sur chaise”

- C'est le module qui centralise tous les fluides
- Le plot “vidoir” se caractérise par un encombrement réduit de 500 mm de façade
- C'est en même temps un meuble de protection des alimentations et des évacuations de fluides

Ce Plot est destiné à s'intégrer dans les agencements de salle à la place des traditionnels plots techniques...  
Il peut se positionner en extrémités de tables sèches ou en “travée” entre 2 tables sèches...  
Il diffère d'un vidoir classique, car il est équipé d'un placard visitable. Pour les agencements en linéaire mural, un Vidoir sur chaise est proposé dans les pages “Laveries” de ce catalogue...

Le plot est revêtu de Grès Emailé. Des joints anti-acides assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

Le plot est fourni complet avec une cuve en grès de type “Vidoir” de 500 x 600 x 350 mm et un chandelier Education Nationale simple robinet, en standard.

La Cuve sans débordement permet de combiner et juxtaposer paillasses et plots...

La cuve très lourde est fixée sur une chaise métallique totalement carrossée de panneaux mélaminés de 19 mm

Une porte, avec serrure, située à l'arrière de la cuve permet d'accéder aux attentes de fluides pour les interventions d'entretien

Hauteur normalisée à 900 mm. Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure

Le Plot Vidoir proposé exclusivement en profondeur 750 mm.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

#### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon pnylex, une alimentation flexible



### LES PLOTS VIDOIR PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Type Vidoir en Grès Emailé		
- Dimensions du Plot	500 x 750 x 900 mm	MOB 97700 998 €
- Cuve Vidoir de	500 x 600 x 350 mm	

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Chandelier Court Antivandalisme	OPT 04	68 €
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €



## LES PLOTS TECHNIQUES

### REVÊTUES DE “COMPACT” TOPLAB PLUS

Lycée “Marcelin Berthelot” 93 Pantin - Projet réalisé en partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de France

Il s’agit d’une salle destinée aux Travaux Pratiques de Chimie. Les enseignants souhaitent utiliser cette salle en demi-groupe de 24 Elèves...

Les paillasses doivent être polyvalentes, résister aussi bien aux équipements lourds (appareillages et supports de chimie), qu’aux réactifs ou aux produits chimiques...

Le choix du Compact TopLab offre une solution résistante, solide et facile à entretenir.

Les Plots Techniques positionnés en extrémités de paillasses de part et d’autre de la salle permettent à chaque binôme de disposer d’un point d’eau froide, et d’une nourrice de gaz à prise rapide...Les alimentations électriques ainsi que les autres fluides sont amenés de l’étage inférieur, à l’intérieur du Plot...

Equipements Electriques, Sièges, Accessoires Divers et Equipements de Sécurité (Hotte à Filtration en fond de salle), Meubles de Rangement....etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

## Le plot technique

### en Compact TopLab Plus



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le Plot Technique TopLab Plus Standard 600 mm de façade Il est proposé comme tous les autres meubles de la gamme en profondeur 600 mm ou 750 mm. Hauteur standard 900 mm Modèles présentés MOB 26305

Un seul joint adapté au revêtement assure l'étanchéité de la cuve.

Ce plot est proposé en 3 largeurs 450, 600, 1200 mm.

Réalisez diverses Paillasses de chimie : Travées, Ilots Centraux... En combinant Plots Techniques et Paillasses Sèches...



Plateau sans débordement permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Le plot technique Standard est fourni complet avec une cuve en vulcathène Beige et un chandelier Education Nationale

Le plot est revêtu de Trespa TopLab Plus

Le meuble est un caisson fermé par une porte battante à la française condamnable par serrure à clés. L'ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Hauteur des Plots normalisée à 900 mm. Sur demande ces plots peuvent être réalisés en hauteur inférieure

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Cuve Vulcathène 450 x 450 mm	OPT 09	111 €
Cuve Vulcathène 450 x 600 mm	OPT 14	182 €



### PLOTS TOPLAB PLUS

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot TopLab Plus 450 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 300 x 300 mm et Chandelier Simple	MOB 16305	569 €
Plot TopLab Plus 450 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 300 x 300 mm et Chandelier Simple	MOB 17305	646 €
Plot TopLab Plus 600 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 300 x 300 mm et Chandelier Simple	MOB 26305	629 €
Plot TopLab Plus 600 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 300 x 300 mm et Chandelier Simple	MOB 27305	681 €
Plot TopLab Plus 1200 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 36505	754 €
Plot TopLab Plus 1200 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 37505	831 €

#### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

## Le plot technique

### de grande largeur 1200 mm cuve double



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le plot technique Grande Largeur est fourni dans ce cas avec une double-cuve en vulcathène et un Chandelier Orientable Eau Froide. Tailles de cuves en fonction de la profondeur du plot, voir tableau ci-dessous

Le plot est revêtu de Grès Emailé ou de Verre Emailé

Plateau sans débordement Permet la juxtaposition et la modularité des tables et des plots.

Le meuble est un caisson fermé par deux portes battantes à la française condamnable par serrure à clés. L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm



**Plot Technique**  
Grande Largeur 1200 mm de façade  
Il est proposé comme tous les autres meubles de la gamme en profondeur 600 mm ou 750 mm.  
Modèle présenté MOB 37607  
"Plot Technique Revêtement Verre Double Cuve Vulcathène 2 x (450 x 450 mm)"



Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

**Pensez à l'Installation !**  
Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €
Mélangeur EC/EF	OPT 11	86 €
Mitigeur avec Douchette	OPT 12	130 €



### LES PLOTS DOUBLE CUVE PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Double Cuve Plateau Revêtu de Grés		
- Dimensions du Plot	1200 x 600 x 900 mm	MOB 36600
- 2 Cuves en Vulcathène de	300 x 300 mm	807 €
Plot Double Cuve Plateau Revêtu de Verre		
- Dimensions du Plot	1200 x 600 x 900 mm	MOB 36607
- 2 Cuves en Vulcathène de	300 x 300 mm	941 €

### LES PLOTS DOUBLE CUVE PROFONDEUR 700 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Double Cuve Plateau Revêtu de Grés		
- Dimensions du Plot	1200 x 750 x 900 mm	MOB 37600
- 2 Cuves en Vulcathène de	450 x 450 mm	853 €
Plot Double Cuve Plateau Revêtu de Verre		
- Dimensions du Plot	1200 x 750 x 900 mm	MOB 37607
- 2 Cuves en Vulcathène de	450 x 450 mm	997 €

## Le plot technique en polypropylène polysinc



En Hauteur 800 mm,  
ces paillasse sont adaptées aux  
Personnes à Mobilité Réduite.



Les cuves sont moulées dans la masse, elles sont toutes équipées d'un trop-plein et d'une bonde.  
Cette conception exclue tout jointage, et offre une garantie absolue d'étanchéité

C'est une technologie de moulage du Polypropylène qui fait l'objet d'un brevet déposé.  
Par ses qualités de résistance aux acides, solvants et bases, et par sa tenue exceptionnelle à la température, le polypropylène résout la plupart des problèmes de résistance à la corrosion.  
Rigide mais léger, il absorbe parfaitement les chocs.  
Ce matériau est donc parfaitement adapté aux laboratoires de chimie et aux manipulations fréquentes de verrerie.  
C'est un produit de qualité et d'esthétique élevée à un coût très raisonnable pour ses performances...

Le plateau est un module monobloc en polypropylène d'épaisseur 40 mm réalisé par moulage à injection, avec bordure relevée anti-gouttes

Plot Technique Polysinc Double-Cuve MOB 27646  
Il est proposé en profondeur 750 mm  
Dimensions du Plot 1200 x 750 x 900 mm  
Fourni avec un Chandelier EF Orientable

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des plots et des tables.

Hauteur des Plot normalisée à 900 mm.

### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

### LES PLOTS CUVE POLYSINC

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Polysinc Simple Cuve 400 - Dimensions du Plot 600 x 600 x 900 mm - Cuve de 400 x 400 mm	MOB 26406	612 €
Plot Polysinc Simple Cuve 400 - Dimensions du Plot 750 x 600 x 900 mm - Cuve de 400 x 400 mm	MOB 26506	716 €
Plot Polysinc Simple Cuve 400 - Dimensions du Plot 600 x 750 x 900 mm - Cuve de 400 x 400 mm	MOB 27506	678 €
Plot Polysinc Double Cuve 300 - Dimensions du Plot 1200 x 750 x 900 mm - 2 Cuves de 300 x 300 mm	MOB 27536	1013 €
Plot Polysinc Double Cuve 400 - Dimensions du Plot 1200 x 750 x 900 mm - 2 Cuves de 400 x 400 mm	MOB 27646	1336 €



Plot Technique Polysinc Cuve 400 x 400 mm MOB 26406  
Il est proposé en profondeur 600 mm  
Dimensions du Plot 600 x 600 x 900 mm  
Fourni avec un Chandelier Simple EN

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €
Mélangeur EC/EF	OPT 11	86 €
Mitigeur avec Douchette	OPT 12	130 €



## VARICOR

### LE COMPOSITE MINÉRAL D'EXCEPTION

“American School of Paris” 92 St Cloud

Il s'agit de salles de sciences polyvalentes organisées en 3 zones de travail: des plans de manipulations équipés de fluides (eau et électricité) en contour de salles, des tables centrales destinées aux travaux pratiques en groupes, une Zone de cours en amphithéâtre...

L'Equipe enseignante souhaitait un matériau durable, très résistant aux agents chimiques les plus corrosifs, ainsi qu'aux agressions mécaniques liés aux appareils de sciences... Le choix de revêtements de tables et de meubles en résine minérale s'est alors imposé en raison du haut niveau de qualité et de longévité du matériau.

Equipements Electriques, Sièges, Accessoires Divers et Equipements de Sécurité (Hotte à Filtration en fond de salle), Meubles de Rangement....etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

# Le varicor

un matériau minéral haut de gamme



- Homogène et non poreux
- Coloré dans la masse
- Difficilement Inflammable
- Aucun produit de scellement en surface n'est nécessaire
- Extrêmement résistant aux produits chimiques
- Hydrofuge
- Résistant aux chocs
- Résistant aux températures élevées
- Apte au contact alimentaire
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Réparations possibles
- Agréable et chaud au toucher
- Forte densité
- Moulage de plateaux ou de cuves sur mesures

## Un Matériau Minéral haut de gamme...

Varicor, est un matériau minéral de consistance absolument homogène, coloré dans la masse...  
Il se compose à 2/3, d'une charge minérale naturelle (hydroxyde d'aluminium), et à 1/3, d'une résine à base de polyester.



## Hygienne...

L'Hygiène est une nécessité absolue, dans le domaine de la santé, dans les laboratoires pharmaceutiques ou alimentaires...

Varicor permet de répondre aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de fonctionnalité tout en conservant ses qualités esthétiques.

La forte densité, l'homogénéité, la non porosité et l'assemblage d'éléments sans joint apparent, ne laissent aucune chance aux germes et bactéries...

Les micro-organismes n'adhèrent pas à la surface, ce qui limite la formation de biofilm...

## Un Façonnage Innovant...

Le matériau est traité sans joints, ni jonctions visibles et s'harmonise parfaitement avec d'autres matériaux...permettant ainsi la réalisation des meubles les plus exigeants avec du bois, du métal, du verre ou de la céramique.  
Des pièces sur mesure peuvent être moulées ou façonnées...

## Résistance aux produits chimiques

La majeure partie des produits chimiques ne laissent aucune trace sur Varicor même si la surface reste exposée au produit pendant une heure...  
De l'eau et du savon suffisent alors au nettoyage de la surface...  
Pour certains produits Acide Chlorhydrique, Bleu de méthylène, Iode en solution, Nitrate d'argent...des traces peuvent apparaître, mais une poudre à récurer ou de l'eau de javel permettent de récupérer parfaitement la surface

L'Eau de Javel permet de désinfecter le Varicor de façon très efficace (réduction de la population bactérienne à 99,99%).

Cette seule caractéristique en fait le matériau idéal pour les espaces de santé, puériculture, infirmeries...les cuisines, les laboratoires de biotechnologie...


## Un choix de coloris de surfaces...

Toutes les teintes Varicor se distinguent par leur aspect satiné mat. Des traces et particulièrement les rayures sont plus apparentes sur les matériaux foncés...  
C'est pour cela que notre choix s'est porté sur 2 coloris peu sensibles aux traces: Gris Granit ou Blanc Satin...  
D'autres coloris peuvent être proposés sur projet.



## Solide et résistant...

Varicor résiste à l'eau, à l'humidité et à presque tous les produits chimiques...  
Varicor résiste parfaitement aux chocs et est difficilement inflammable.  
Les éventuelles traces d'usure et accros se réparent facilement.  
Varicor est insensible aux tags et à la rayure (uniquement les unis mâts)...  
Un simple papier de verre et un disque à polir permettent de récupérer la surface en quelques minutes

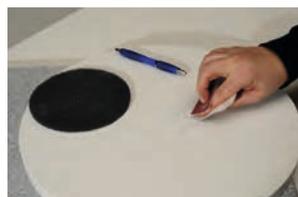

## Le plot technique revêtu de varicor



En Hauteur 800 mm,  
ces paillasse sont adaptées aux  
Personnes à Mobilité Réduite.

Le matériau est traité sans joint  
ni jonction visible et s'harmonise  
parfaitement avec d'autres  
matériaux...

Le Plateau sans débordement permet  
la juxtaposition et la modularité des tables  
et des plots.

Les plots techniques sont fournis  
complets équipés en standard d'une  
cuve en Varicor monobloc formée  
dans la matière; d'un chandelier  
Education Nationale simple ou  
double robinet...

Deux coloris de surface sont  
proposés en standard au  
choix: Gris Granit ou Blanc  
Satin...

Ce plot est proposé en  
3 largeurs 450, 600,  
1200 mm.

Hauteur des plots normalisée à 900 mm.  
Sur demande ces plots peuvent être  
réalisés en hauteur inférieure

Réalisez diverses Paillasse de chimie: Travées, Ilots Centraux...  
En combinant Plots Techniques et Paillasse Sèches...  
Découvrez aussi nos éviers Varicor, à la rubrique qui leur est consa-  
crée dans ce catalogue...

Les plots sont proposés en  
Profondeur Standard de 600  
mm ou 750 mm.

Le meuble est un caisson fermé par une porte bat-  
tante à la française condamnable par serrure à clés.  
L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19  
mm, Blanc ou Gris Clair...  
Autres coloris sur demande

### LES PLOTS VARICOR

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Varicor Plus 450 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 340 x 400 mm et Chandelier Simple	MOB 16308-C34	1059 €
Plot Varicor Plus 450 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 340 x 400 mm et Chandelier Simple	MOB 17308-C34	1070 €
Plot Varicor Plus 600 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 340 x 400 mm et Chandelier Simple	MOB 26308-C34	1133 €
Plot Varicor Plus 600 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 340 x 400 mm et Chandelier Simple	MOB 27308-C34	1154 €
Plot Varicor Plus 600 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Simple	MOB 26308-C45	1266 €
Plot Varicor Plus 600 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Simple	MOB 27308-C45	1286 €
Plot Varicor Plus 1200 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 36508-C45	1449 €
Plot Varicor Plus 1200 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 450 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 37508-C45	1482 €
Plot Varicor Plus 1200 x 600 x 900 mm Cuve Vulcathène de 600 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 36508-C60	1511 €
Plot Varicor Plus 1200 x 750 x 900 mm Cuve Vulcathène de 600 x 450 mm et Chandelier Double	MOB 37508-C60	1543 €

### Des Plots Sur mesure...

Lors de la réalisation de vos linéaires, afin de garder des proportions  
harmonieuses, les plots peuvent être réalisés sur mesure dans des  
largeurs spécifiques...

### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par  
nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les  
attentes nécessaires selon les plans de  
trémies fournis par notre bureau d'étude.



### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre  
choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Chandelier Court Antivandalisme	OPT 04	68 €
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €
Mélangeur EC/EF	OPT 11	86 €
Mitigeur avec Douchette	OPT 12	130 €



# La paillasse sèche

revêtue de varicor



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électrique... Voir notre rubrique "accessoires".*

### Paillasses revêtues de Varicor

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm. Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, vous permettant de réaliser par combinaison une infinité de linéaires... (Par exemple si vous souhaitez réaliser une table de 2400 mm, il suffit d'associer 2 tables de 1200 mm; pour réaliser une table de 3000 mm, vous pouvez associer 2 tables de 1500 mm ou 1 table de 1800 mm et une table de 1200 mm...etc).

Modèle présenté MOB 6028 "Paillasse en 1200 x 600 x 900 mm"

Varicor résiste à l'eau, à l'humidité et à presque tous les produits chimiques...  
Varicor résiste parfaitement aux chocs et est difficilement inflammable. Les éventuelles traces d'usure et accros se réparent facilement.



## LES TABLES DE PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Varicor 600 x 600 x 900 mm	MOB 6008	403 €
Table Sèche Varicor 750 x 600 x 900 mm	MOB 6078	445 €
Table Sèche Varicor 1200 x 600 x 900 mm	MOB 6028	522 €
Table Sèche Varicor 1500 x 600 x 900 mm	MOB 6088	675 €
Table Sèche Varicor 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6038	762 €

## LES TABLES DE PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table Sèche Varicor 600 x 750 x 900 mm	MOB 7008	445 €
Table Sèche Varicor 750 x 750 x 900 mm	MOB 7078	492 €
Table Sèche Varicor 1200 x 750 x 900 mm	MOB 7028	634 €
Table Sèche Varicor 1500 x 750 x 900 mm	MOB 7088	854 €
Table Sèche Varicor 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7038	920 €



## GAMME MONDRIAN

### FAITES ENTRER LA COULEUR DANS LES LABORATOIRES

Collège "Guillaume Fouace" 50 St Vaast-la-Hougue

Il s'agit d'une salle polyvalente de sciences pour 30 élèves de collège.

L'Equipe pédagogique a fait le choix "audacieux" mais très réussi, d'une salle en couleur, dont les équipements ont été choisis dans la gamme Mondrian...

Les élèves sont équipés de tables sèches revêtues de Grès de 1200 x 600 x 900 mm (MON 6020))...Les alimentations électriques et réseau sont amenées de l'étage inférieur, à l'intérieur d'un caisson de câblage assorti aux tables..

Le Professeur est équipé d'une Paillasse polyvalente avec Plot Technique et Plot Informatique à Ecran Plat Intégré...équipements choisis dans la gamme Mondrian.

Equipements Electriques, Sièges, Accessoires Divers et Equipements de Sécurité, Meubles de Rangement....etc, complètent cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

# La gamme Mondrian

## un concept esthétique

- Un concept de Tables et de Plots Fidèle au Principe de "Modularité" Mobilab
- Un design qui Privilégie Les Qualités Environnementales
- Un choix de Coloris Lumineux pour Tourner le Dos à l'Uniformité des Laboratoires

Le plot technique Standard est fourni complet avec une cuve en vulcathène et un chandelier Education Nationale. Il est équipé d'une trappe d'accès aux attentes techniques, fermée par batteuse carrée

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure portante sont inarrachables

Le plateau de forte épaisseur peut être proposé revêtu de Dalles de Grès Emailé; de Verre Emailé ou de Trespa TopLab au choix.

Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

La ceinture de la paillasse est réalisée selon un principe d'ébénisterie tout en bois, conférant à l'ensemble une rigidité accrue par rapport aux techniques traditionnelles de conception des mobiliers de laboratoire

Piètements revêtus d'une peinture époxy cuite au four, ral Gris Clair 7040

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure pour les espaces destinés aux élèves handicapés

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Piètement en H en acier de section carré 30 x 30 mm, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table

Dans une recherche de haute qualité environnementale, les designers ont travaillé sur l'utilisation privilégiée du bois comme matériau noble, vivant, écologique, et à haute résistance mécanique. Les panneaux en MélaMiné Haute Densité sont exclusivement sélectionnés en forte épaisseur 19 mm. La Gamme Mondrian en est l'aboutissement

*En option les paillasses peuvent être équipées d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante, de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électriques*

*Le Corps du Plot Technique et les piètements métalliques de la paillasse sont toujours de coloris Gris Clair, le Cadre Porteur, le Voile de Fond et la Trappe du Plot sont proposés dans un choix de 4 couleurs: Rouge, Bleu, Vert ou Jaune selon la palette ci-dessous... Autres coloris sur étude...*



## Le plot technique

de la gamme Mondrian



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

Le plot technique est fourni en standard avec une cuve vulcanisée équipée d'une bonde et d'un siphon.  
En fonction du modèle le plot est proposé avec une cuve de 300 x 300 mm, 450 x 450 mm ou 450 x 600 mm

Le corps du plot est en mélaminé Gris Clair. Le Panneau de Fond et la Trappe de Visite sont dans la couleur choisie



Les plots sont proposés en 3 largeurs 450 mm, 600 mm ou 750 mm et en 2 profondeurs 600 mm ou 750 mm

Meuble de protection des fluides en panneau de mélaminé Haute Densité de 19 mm d'épaisseur, équipé d'une trappe d'accès aux attentes techniques, fermée par batteuse carrée

En standard, les plots sont équipés d'un chandelier Education Nationale, Eau Froide Simple Sortie.  
En option, les plots peuvent être équipés d'un chandelier double, de nourrices gaz, ou de chandeliers anti-vandalisme

### LES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Pour personnaliser le plot de votre choix rajouter à son prix les options ci-dessous...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Chandelier Court Antivandalisme	OPT 04	68 €
Chandelier Double EF	OPT 05	87 €
Nourrice Simple Gaz	OPT 06	62 €
Nourrice Double Gaz	OPT 07	94 €



### LES PLOTS TECHNIQUES EN GRÈS - GAMME MONDRIAN

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Grès 450 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 16300	554 €
Plot Grès 450 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 17300	584 €
Plot Grès 600 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 26300	588 €
Plot Grès 600 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 27300	626 €
Plot Grès 600 x 750 x 900 mm - Cuve 450 x 450 mm	MON 27400	711 €
Plot Grès 750 x 750 x 900 mm - Cuve 600 x 450 mm	MON 97500	741 €

### LES PLOTS TECHNIQUES EN VERRE - GAMME MONDRIAN

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Verre 450 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 16307	581 €
Plot Verre 450 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 17307	635 €
Plot Verre 600 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 26307	617 €
Plot Verre 600 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 27307	672 €
Plot Verre 600 x 750 x 900 mm - Cuve 450 x 450 mm	MON 27407	739 €
Plot Verre 750 x 750 x 900 mm - Cuve 600 x 450 mm	MON 97507	777 €

### LES PLOTS TECHNIQUES EN TOPLAB - GAMME MONDRIAN

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Trespa 450 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 16305	569 €
Plot Trespa 450 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 17305	646 €
Plot Trespa 600 x 600 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 26305	629 €
Plot Trespa 600 x 750 x 900 mm - Cuve 300 x 300 mm	MON 27305	681 €
Plot Trespa 600 x 750 x 900 mm - Cuve 450 x 450 mm	MON 27405	754 €
Plot Trespa 750 x 750 x 900 mm - Cuve 600 x 450 mm	MON 97505	831 €

## La paillasse sèche

### de la gamme Mondrian

- Une Gamme Esthétique, Solide et Élégante
- "Modularité"...Une Infinité de Combinaisons de Tables Sèches, Plots Techniques et Plots ExAO
- Grès Collé, Verre Emailé, ou Trespa TopLab, des Revêtements Faits pour le Laboratoire



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



### PAILLASSES SÈCHES MONDRIAN PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 600 x 900 mm	MON 6060	281 €	MON 6067	302 €	MON 6065	299 €
Paillasse Sèche 750 x 600 x 900 mm	MON 6070	316 €	MON 6077	336 €	MON 6075	320 €
Paillasse Sèche 1200 x 600 x 900 mm	MON 6020	372 €	MON 6027	393 €	MON 6025	388 €
Paillasse Sèche 1500 x 600 x 900 mm	MON 6080	420 €	MON 6087	441 €	MON 6085	520 €
Paillasse Sèche 1800 x 600 x 900 mm	MON 6030	496 €	MON 6037	518 €	MON 6035	564 €
Paillasse Sèche 2400 x 600 x 900 mm	MON 6040	743 €	MON 6047	785 €	MON 6045	774 €

### PAILLASSES SÈCHES MONDRIAN PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 750 x 900 mm	MON 7060	316 €	MON 7067	336 €	MON 7065	320 €
Paillasse Sèche 750 x 750 x 900 mm	MON 7070	332 €	MON 7077	353 €	MON 7075	390 €
Paillasse Sèche 1200 x 750 x 900 mm	MON 7020	436 €	MON 7027	458 €	MON 7025	490 €
Paillasse Sèche 1500 x 750 x 900 mm	MON 7080	526 €	MON 7087	537 €	MON 7085	628 €
Paillasse Sèche 1800 x 750 x 900 mm	MON 7030	548 €	MON 7037	572 €	MON 7035	651 €
Paillasse Sèche 2400 x 750 x 900 mm	MON 7040	872 €	MON 7047	915 €	MON 7045	980 €

### OPTIONS

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé	
	Référence	Prix TTC
Dosseret Antichute (au Mètre Linéaire)	MON 3002	37 €
Caisson de Câblage (Couleur assorti)	MON 304	130 €

### Avis d'expert...

Pensez à l'informatique et à vos équipements électriques...  
De nombreuses solutions permettant d'aller informatique et laboratoire sont proposées dans ce catalogue, du placard au plot à écran extractible motorisé...





## GAMME EASYLAB

### UNE NOUVELLE LIGNE DE PAILLASSES

La Gamme EasyLab...Lycée "Théodore Monod" 92 Antony

Il s'agit d'une salle polyvalente de sciences pour 16 élèves.

L'Equipe pédagogique a fait le choix de notre Nouvelle Gamme "EasyLab" .

Les Tables sont équipées de Piètements à Dégagement Latéral pour plus de confort...

Equipements Electriques, Sièges, Accessoires Divers et Equipements de Sécurité, Meubles de Rangement....etc, complètent cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

# La paillasse à dégagement latéral

gamme EasyLab



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



En option les paillasses peuvent être équipées d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette porte-documents positionnée en casier, d'une tablette abattante de meubles de rangement sous paillasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électrique

Le piétement à dégagement latéral de la Gamme EasyLab est issu de la combinaison d'un piétement en L et d'un piétement en H... L'entretoise centrale confère une excellente stabilité à l'ensemble de la table... Le cadre sous plateau assure une grande robustesse et une parfaite linéarité au plan de travail...



Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, pour permettre de réaliser par combinaison une infinité de linéaires... (Par exemple si vous souhaitez réaliser une table de 2400 mm, il suffit d'associer 2 tables de 1200 mm; pour réaliser une table de 3000 mm, vous pouvez associer 2 tables de 1500 mm ou 1 table de 1800 mm et une table de 1200 mm...etc)

La gamme de paillasses EasyLab se juxtapose à tous les plots "Techniques" et "Informatiques" de ce catalogue...

## La gamme EasyLab...se décline selon vos besoins !

Toutes les tables sont proposées en profondeur standard de 600 mm ou 750 mm.  
Une gamme est proposée dans chacune des profondeurs, permettant de réaliser une infinité de linéaires, par combinaison...



Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" émaillé de la taille exacte du plateau fini.  
Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu de Dalles de Grès Collées, de grande largeur 600 mm.  
Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur

Plateau en Varicor, matériau minéral de consistance absolument homogène, coloré dans la masse...  
Plateau d'épaisseur 30 mm



Le Mélaminé, revêtement vinylique double face imprégné sur un bois compressé haute densité de 19 mm d'épaisseur, bordé d'une rive PVC rigide. (non photographié)



### PAILLASSES EASYLAB PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Varicor	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 600 x 900 mm	EASY 6060	316 €	EASY 6067	336 €	EASY 6065	332 €	EASY 6068	443 €
Paillasse Sèche 750 x 600 x 900 mm	EASY 6070	350 €	EASY 6077	377 €	EASY 6075	354 €	EASY 6078	481 €
Paillasse Sèche 1200 x 600 x 900 mm	EASY 6020	409 €	EASY 6027	431 €	EASY 6025	419 €	EASY 6028	562 €
Paillasse Sèche 1500 x 600 x 900 mm	EASY 6080	459 €	EASY 6087	481 €	EASY 6085	552 €	EASY 6088	715 €
Paillasse Sèche 1800 x 600 x 900 mm	EASY 6030	526 €	EASY 6037	561 €	EASY 6035	603 €	EASY 6038	788 €
Paillasse Sèche 2400 x 600 x 900 mm	EASY 6040	816 €	EASY 6047	861 €	EASY 6045	838 €	EASY 6048	1 122 €

### PAILLASSES EASYLAB PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Varicor	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 750 x 900 mm	EASY 7060	350 €	EASY 7067	377 €	EASY 7065	354 €	EASY 7068	481 €
Paillasse Sèche 750 x 750 x 900 mm	EASY 7070	367 €	EASY 7077	390 €	EASY 7075	417 €	EASY 7078	523 €
Paillasse Sèche 1200 x 750 x 900 mm	EASY 7020	475 €	EASY 7027	497 €	EASY 7025	526 €	EASY 7028	672 €
Paillasse Sèche 1500 x 750 x 900 mm	EASY 7080	567 €	EASY 7087	579 €	EASY 7085	658 €	EASY 7088	893 €
Paillasse Sèche 1800 x 750 x 900 mm	EASY 7030	590 €	EASY 7037	615 €	EASY 7035	685 €	EASY 7038	959 €
Paillasse Sèche 2400 x 750 x 900 mm	EASY 7040	948 €	EASY 7047	993 €	EASY 7045	1 002 €	EASY 7048	1 343 €

### OPTIONS

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé	
	Référence	Prix TTC
Dossieret Antichute (au Mètre Linéaire)	MOB 3002	37 €

# LES PAILLASSES A DÉGAGEMENT LATÉRAL

Plateau en Trespa TopLab de forte épaisseur 16 mm autoporteur.



Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en Multiplis. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.



Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs. Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Paillasse en Stratifié - Bords Droits PVC  
Chant PVC de forte épaisseur plaqué en pourtour de plateau...  
Ces Modèles sont aussi proposés en Version Stratifié Postformé sur l'avant (non photographié)



La Gamme de Paillasse EasyLab peut être associée à tous nos Plots Techniques et Informatiques...

## PAILLASSES EASYLAB PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Stratifié		Revêtement Stratifié Postformé		Revêtement Mélaminé		Revêtement Multipli	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 600 x 900 mm	EASY 6063	325 €	EASY 60633	331 €	EASY 6062	282 €	EASY 6064	332 €
Paillasse Sèche 750 x 600 x 900 mm	EASY 6073	352 €	EASY 60733	358 €	EASY 6072	307 €	EASY 6074	367 €
Paillasse Sèche 1200 x 600 x 900 mm	EASY 6023	376 €	EASY 60233	381 €	EASY 6022	332 €	EASY 6024	420 €
Paillasse Sèche 1500 x 600 x 900 mm	EASY 6083	394 €	EASY 60833	400 €	EASY 6082	347 €	EASY 6084	477 €
Paillasse Sèche 1800 x 600 x 900 mm	EASY 6033	415 €	EASY 60333	422 €	EASY 6032	372 €	EASY 6034	552 €
Paillasse Sèche 2400 x 600 x 900 mm	EASY 6043	751 €	EASY 60433	762 €	EASY 6042	664 €	EASY 6044	814 €

## PAILLASSES EASYLAB PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Stratifié		Revêtement Stratifié Postformé		Revêtement Mélaminé		Revêtement Multipli	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Sèche 600 x 750 x 900 mm	EASY 7063	317 €	EASY 70633	325 €	EASY 7062	307 €	EASY 7064	367 €
Paillasse Sèche 750 x 750 x 900 mm	EASY 7073	351 €	EASY 70733	357 €	EASY 7072	327 €	EASY 7074	387 €
Paillasse Sèche 1200 x 750 x 900 mm	EASY 7023	373 €	EASY 70233	379 €	EASY 7022	357 €	EASY 7024	489 €
Paillasse Sèche 1500 x 750 x 900 mm	EASY 7083	404 €	EASY 70833	412 €	EASY 7082	369 €	EASY 7084	571 €
Paillasse Sèche 1800 x 750 x 900 mm	EASY 7033	439 €	EASY 70333	445 €	EASY 7032	392 €	EASY 7034	607 €
Paillasse Sèche 2400 x 750 x 900 mm	EASY 7043	746 €	EASY 70433	752 €	EASY 7042	715 €	EASY 7044	951 €

## OPTIONS

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé	
	Référence	Prix TTC
Dossieret Antichute (au Mètre Linéaire)	MOB 3002	37 €



## LA PAILLASSE PROFESSEUR

UNE PAILLASSE POLYVALENTE DE GRANDES DIMENSIONS ET  
DE PROFONDEUR 750 MM OU 600 MM

La paillasse du professeur est la juxtaposition d'un Plot Large équipé d'un grand bac et d'une Paillasse Sèche de 1800 mm. Elle est fournie en standard avec un bac vulcathène de 450 x 450 mm, un chandelier double EN, un tiroir en façade. En option, elle peut recevoir d'autres fluides (électricité, gaz, ...) et des meubles sous paillasse (meuble à portes ou à tiroirs, meuble pour unité centrale...).

Cette paillasse peut être associée à un plot informatique généralement positionné à l'opposé du plot technique (Voir notre rubrique "Mobilier ExAO").

Des paillasses "Professeurs" sont proposées dans toutes nos gammes de produits: Gamme Mob, EasyLab ou Mondrian...

# LES PAILLASSES PROFESSEURS

Les paillasse professeur peuvent être revêtues de Grès, de Verre, de Compact TopLab ou de Varicor ; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les premières pages de ce chapitre)

Elles sont proposées en dimensions 3000 x 750 x 900 mm, par association d'un plot technique large et d'une paillasse sèche équipé d'un tiroir en façade... (autres dimensions sur demande)



Les Paillasse de la Gamme "MOB"...  
... se caractérisent par le design du piètement en "H"...



Elles sont proposées en dimensions 3000 x 750 x 900 mm, par association d'un plot technique large et d'une paillasse sèche équipé d'un tiroir en façade...

Elles peuvent être revêtues de Grès, de Verre, ou de Compact TopLab; matériaux choisis pour leur résistance à l'eau, à la chaleur et aux produits chimiques (une information technique sur chacun de ces matériaux est présenté dans les premières pages de ce chapitre)

Les Paillasse de la Gamme "EasyLab"...  
...se caractérisent par le design de leur Structure à Dégagement Latéral.



Les Mobiliers Informatiques pour Ecrans Plats (Plot ExAO, Plot Placard) se juxtaposent aux Paillasse Professeur...voir rubrique "Mobilier ExAO"



Elles sont proposées en dimensions 2550 x 750 x 900 mm, par association d'un Plot Technique 750 x 750 x 900 mm et d'une Paillasse Sèche de 1800 x 750 x 900 mm. (autres dimensions sur demande)

Les Paillasse de la Gamme "Mondrian"...  
...se caractérisent par leur design Bicolore.

## PAILLASSES PROFESSEUR PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme MOB		
Paillasse Prof. Grès 3000 x 600 x 900 mm	MOB 6550	1160 €
Paillasse Prof. Verre 3000 x 600 x 900 mm	MOB 6557	1324 €
Paillasse Prof. TopLab 3000 x 600 x 900 mm	MOB 6555	1355 €
Paillasse Prof. Varicor 3000 x 600 x 900 mm	MOB 6558	2210 €
Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme EasyLab		
Paillasse Prof. Grès 3000 x 600 x 900 mm	EASY 6550	1180 €
Paillasse Prof. Verre 3000 x 600 x 900 mm	EASY 6557	1340 €
Paillasse Prof. TopLab 3000 x 600 x 900 mm	EASY 6555	1390 €
Paillasse Prof. Varicor 3000 x 600 x 900 mm	EASY 6558	2250 €
Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme Mondrian		
Paillasse Prof. Grès 2550 x 600 x 900 mm	MON 6550	1175 €
Paillasse Prof. Verre 2550 x 600 x 900 mm	MON 6557	1240 €
Paillasse Prof. TopLab 2550 x 600 x 900 mm	MON 6555	1310 €

## PAILLASSES PROFESSEUR PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme MOB		
Paillasse Prof. Grès 3000 x 750 x 900 mm	MOB 7550	1290 €
Paillasse Prof. Verre 3000 x 750 x 900 mm	MOB 7557	1472 €
Paillasse Prof. TopLab 3000 x 750 x 900 mm	MOB 7555	1501 €
Paillasse Prof. Varicor 3000 x 750 x 900 mm	MOB 7558	2462 €
Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme EasyLab		
Paillasse Prof. Grès 3000 x 750 x 900 mm	EASY 7550	1 315 €
Paillasse Prof. Verre 3000 x 750 x 900 mm	EASY 7557	1 516 €
Paillasse Prof. TopLab 3000 x 750 x 900 mm	EASY 7555	1 543 €
Paillasse Prof. Varicor 3000 x 750 x 900 mm	EASY 7558	2 502 €
Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Professeur Gamme Mondrian		
Paillasse Prof. Grès 2550 x 750 x 900 mm	MON 7550	1303 €
Paillasse Prof. Verre 2550 x 750 x 900 mm	MON 7557	1365 €
Paillasse Prof. TopLab 2550 x 750 x 900 mm	MON 7555	1446 €



## LA PAILLASSE TRIANGULAIRE

- Ilot humide ou sec pour 4 élèves avec paillasse de dépose triangulaire
- Paillasses triangulaires sur 3 pieds utilisables de façon autonome
- Possibilité d'avoir des placards de rangement intégrés sous les paillasses

Lycée "Jean Dautet" 17 La Rochelle

L'agencement en Ilots Triangulaires est une solution exigeante qui nécessite de disposer d'une salle très vaste.

L'ilot est constitué par association de 2 paillasses sèches de 2 élèves, d'un plot technique positionné au croisement de ces 2 tables et d'une paillasse de dépose triangulaire qui vient refermé l'angle constitué par les 2 tables...

Chaque Ilot est destiné à 4 élèves. Il est généralement difficile d'implanter plus de 6 ilots...la capacité moyenne des salles en ilots triangulaires est de 24 élèves.

Les élèves disposent d'un poste de travail polyvalent équipé de tous les types de fluides et favorable aux travaux pratiques en petits groupes...

Paillasses Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement (Fond de Salle)...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

# L'ÎLOT TRIANGULAIRE

Plot Technique en Grès, en Verre Émaillé ou en Trespa TopLab

Peut recevoir un chandelier double, positionné en angle.

Modèle présenté MOB 26300

"Plot Technique Grès 600 x 600 x 900 mm avec bac vulcathène de 300 x 300 mm"

Un Plot Placard peut se substituer au plot technique

Table Sèche en Grès, en Verre Émaillé ou en Trespa TopLab

Modèle présenté MOB 6020 "Paillasse en Grès 1200 x 600 x 900 mm"

Les équipements électriques peuvent être indifféremment positionnés sur une joue d'extrémité, sur un bandeau ou sur les parois du plot sous plateau...

L'équipement électrique optionnel peut pour plus d'ergonomie, être fixé sur une joue latérale

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm

Structure métallique totalement soudée avec ceinture et piètement en tube carré de section 35 x 35 mm

L'îlot triangulaire présenté est réalisé en grès émaillé.

Dimensions de l'ensemble 1760 x 1800/1800 x 900 mm

Il permet de travailler par groupes de 4 élèves.

La Paillasse Triangulaire, peut aussi être utilisée pour poser un écran informatique...

Voile optionnel, ces tables peuvent constituer un poste de manipulation pour 2 élèves.



Plateau en Grès Émaillé, Verre Émaillé, Trespa TopLab ou Stratifié



Voile de Fond optionnel en panneau mélaminé de 19 mm pouvant recevoir en option un équipement électrique

L'équipement électrique optionnel peut pour plus d'ergonomie, être fixé sur une joue latérale

## LES TABLES TRIANGULAIRES

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Triangulaire Grès	MOB 4020	477 €
Paillasse Triangulaire Stratifié	MOB 4023	469 €
Paillasse Triangulaire Verre Émaillé	MOB 4027	573 €
Paillasse Triangulaire TopLab	MOB 4025	649 €

## EXEMPLES DE COMBINAISONS

Descriptif (L x p x H mm)	Plot technique +	Table sèche +	Table triangle	Prix TTC
Ilot triangulaire en grès émaillé	MOB 26300	MOB 6020 (x2)	MOB 4020	1809 €
Ilot triangulaire en verre émaillé	MOB 26307	MOB 6027 (x2)	MOB 4027	1976 €
Ilot triangulaire en trespa TopLab	MOB 26305	MOB 6025 (x2)	MOB 4025	2054 €

### La Paillasse Triangulaire

Cette paillasse de 1760 x 1200/1200 x 900 mm est une paillasse à part entière parfaitement stable sur ses 3 pieds.

Elle est utilisable comme table de dépose pour constituer un Ilot Triangulaire (comme sur la photo) ou comme table d'angle de salle, ou encore en association par la diagonale en table centrale carrée de 1200 x 1200 mm



## LA PAILLASSE TRIANGULAIRE PLACARD

- Ilot humide ou sec pour 4 élèves avec paillasse de dépose triangulaire
- Paillasses triangulaires équipés d'un placard
- Placard triangulaire utilisable de façon autonome pour tous types d'agencements

Lycée "Liberté" 93 Romainville

L'agencement en Ilots Triangulaires est une solution exigeante qui nécessite de disposer d'une salle très vaste.

L'ilot est constitué par association de 2 paillasses sèches de 2 élèves, d'un plot technique positionné au croisement de ces 2 tables et d'une paillasse de dépose triangulaire qui vient refermé l'angle constitué par les 2 tables...

Chaque Ilot est destiné à 4 élèves. Il est généralement difficile d'implanter plus de 6 ilots...la capacité moyenne des salles en ilots triangulaires est de 24 élèves.

Les élèves disposent d'un poste de travail polyvalent équipés de tous les types de fluides et favorable aux travaux pratiques en petits groupes...

Un grand placard de rangement est crée sous la paillasse pour pouvoir ranger tout le matériel.

# L'ÎLOT TRIANGULAIRE

Plot Technique en Grès, en Verre Emaillé ou en Trespa TopLab  
 Peut recevoir un chandelier double, positionné en angle.  
 Modèle présenté MOB 26307  
 "Plot Technique verre 600 x 600 x 900 mm avec bac vulcathène de 300 x 300 mm"  
 Un Plot Placard peut se substituer au plot technique

Table Sèche en Grès, en Verre Emaillé ou en Trespa TopLab  
 Modèle présenté MOB 601357 « Paillasse en verre 1350 x 600 x 900 mm avec passe câble » + Placard UC

Plateau en Grès Emaillé, Verre Emaillé, Trespa TopLab ou Stratifié

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



L'îlot Triangulaire présenté est réalisé en verre émaillé.  
 Dimensions d'un îlot standard 1760 x 1800/1800 x 900 mm  
 Il permet de travailler par groupes de 4 élèves.  
 La Paillasse Triangulaire, peut aussi être utilisée pour poser un écran informatique...



Comme sur la photo, en Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

## LES TABLES PLACARDS TRIANGULAIRES

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Triangulaire Placard en Grès	MOB 4920	899 €
Paillasse Triangulaire Placard en Stratifié	MOB 4923	881 €
Paillasse Triangulaire Placard en Emalit ou Verre	MOB 4927	996 €
Paillasse Triangulaire Placard en TopLab	MOB 4925	1060 €

## EXEMPLES DE COMBINAISONS

Descriptif (L x p x H mm)	Plot technique +	Table sèche +	Table triangle	Prix TTC
îlot triangulaire en grès émaillé	MOB 26300	MOB 6020 (x2)	MOB 4920	2231 €
îlot triangulaire en verre émaillé	MOB 26307	MOB 6027 (x2)	MOB 4927	2399 €
îlot triangulaire en trespa TopLab	MOB 26305	MOB 6025 (x2)	MOB 4925	2465 €

Grande profondeur de rangement





## LES AGENCEMENTS EN ÉPI...

- Implantation rationnelle pour les salles étroites et longues, favorisant les circulations latérales
- L'arête centrale distribue les fluides
- Le pont Intermédiaire masque les passages de fluides et offre une solution de rangement

Lycée "Rémy Belleau" 28 Nogent le Rotrou

L'Agencement en Epi est recommandé lorsqu'un collecteur d'évacuation des eaux usées circule à l'intérieur de la salle. La colonne centrale permet alors de masquer le collecteur qui chemine de plot en plot d'un bout à l'autre de l'îlot constitué par l'ensemble des tables.

Un unique plot dessert ainsi les deux tables positionnées de part et d'autre.

Les Ponts de Jonction positionnés entre les plots offrent un espace supplémentaire de manipulation; ils peuvent être équipés d'un petit placard d'appoint.

Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

## les ponts de jonction pour agencements en épi...

Plateau sans débordement permettant de s'intercaler entre les Plots Etroits ou Standards



Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm

Encastré dans la structure métallique, un placard à ouverture bilatérale, à double porte avec serrure, permet le rangement d'équipements destinés aux utilisateurs positionnés de part et d'autre de l'arête centrale...  
Le Placard n'est pas obligatoire; le pont est alors carrossé, sur les 2 longueurs. L'une des parois extractible, sert de trappe de visite, pour les interventions d'entretien...

Hauteur normalisée à 900 mm.

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtue d'une peinture époxy cuite au four.  
Piètement en H, entretoisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble du Pont

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" émaillé ou de Grés Émaillé.  
Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.



Une des plinthes est amovible pour constituer une trappe d'accès aux canalisations et câblages électriques éventuels

Le placard est surélevé dégageant un tunnel destiné au cheminement des alimentations, évacuation et autres passages de fluides.

### Ponts de Jonction

Le Pont de Jonction permet la transformation d'une implantation en Travées, en implantation en Epi, en reliant tous les plots techniques en une arête centrale.  
2 Modèles sont proposés, un Modèle économique (non photographié) uniquement carrossé de 2 panneaux latéraux et un Modèle Placard selon descriptif ci-dessus.  
Les ponts de Jonction sont proposés en 2 profondeurs 450 mm pour Plots Etroits et 600 mm pour Plots Standards.

Leurs largeurs sont fixées à 800 mm selon la normalisation d'intervalle de sécurité entre 2 tables (les modèles pourront varier en largeur pour s'adapter aux impératifs de salles).

Modèle Présenté MOB 71457 "Pont Placard 800 x 450 x 900 mm"

### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.



De part et d'autre de la colonne centrale de l'épi, peuvent être juxtaposées des paillasse sèches ou des paillasse ExAO...  
Association "Notre Dame de la Providence" 95 Enghien les Bains

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Pont de Jonction (sans placard) - Grés - P=450 mm	MOB 70450	521 €
Pont de Jonction (sans placard) - Verre - P=450 mm	MOB 70457	535 €
Pont de Jonction (sans placard) - Grés - P=600 mm	MOB 70600	579 €
Pont de Jonction (sans placard) - Verre - P=600 mm	MOB 70607	598 €
Pont Avec Placard - Grés - P=450 mm	MOB 71450	769 €
Pont Avec Placard - Verre - P=450 mm	MOB 71457	829 €
Pont Avec Placard - Grés - P=600 mm	MOB 71600	790 €
Pont Avec Placard - Verre - P=600 mm	MOB 71607	865 €

Lycée "Jules Ferry" 78 Versailles - Projet réalisé en Partenariat avec le Conseil Régional d'Ile de France  
Salle de Physique Chimie (Revêtement Grès Emailé)  
Paillasse Polyvalente de 2250 x 600 x 900 mm pour 3 Elèves, réalisées par association d'un Plot Technique Etroit (MOB 16300) et d'une Table Sèche de 1800 mm (MOB 6030)...  
Un Plot Informatique positionné en extrémité vient compléter ces paillasse (Voir Rubrique "ExAO").



## SALLES POLYVALENTES

### DE SVT OU DE CHIMIE

Nous avons simulé à titre d'exemple, les combinaisons possibles de tables sèches et de plots techniques de la Gamme MOB en Grès ou en Verre Emailé permettant de réaliser des paillasse avec plot d'extrémité destinées aux implantations de salles polyvalentes en SVT, Chimie...

L'Association de matériaux différents ouvrant une infinité de solutions, laissons place à votre imagination !

Vous pouvez réaliser les mêmes agencements en combinant les mobiliers de la Gamme MONDRIAN ou de la Gamme EasyLab

## Avis d'expert...

Trespa TopLab et Varicor sont des Matériaux bien adaptés aux salles de SVT et Chimie pour leur résistance aux produits les plus agressifs (Acides, Nitrate d'Argent, Colorants...)...

Réalisez vos propre combinaisons...



Collège "Paul Valéry" 94 Thiais - Projet réalisé en Partenariat avec le Conseil Général du Val de Marne  
Salle de Sciences de la Vie et de la Terre (Revêtement Grès Emailé)  
Paillasse Polyvalentes de 2400 x 600 x 900 mm pour 3 Elèves, réalisées par association d'un Plot Technique Standard (MOB 26300) et d'une Table Sèche de 1800 mm (MOB 6030)...

## PAILLASSES POLYVALENTES AVEC PLOT D'EXTRÉMITÉ - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 2 Elèves 1650 x 600 x 900 mm	MOB 6020	MOB 16300	926 €	MOB 6027	MOB 16307	974 €
Paillasse 2/3 Elèves 1950 x 600 x 900 mm	MOB 6080	MOB 16300	974 €	MOB 6087	MOB 16307	1022 €
Paillasse 3 Elèves 2250 x 600 x 900 mm	MOB 6030	MOB 16300	1050 €	MOB 6037	MOB 16307	1099 €
Paillasse 2 Elèves 1800 x 600 x 900 mm	MOB 6020	MOB 26300	960 €	MOB 6027	MOB 26307	1010 €
Paillasse 2/3 Elèves 2100 x 600 x 900 mm	MOB 6080	MOB 26300	1008 €	MOB 6087	MOB 26307	1058 €
Paillasse 3 Elèves 2400 x 600 x 900 mm	MOB 6030	MOB 26300	1084 €	MOB 6037	MOB 26307	1135 €

## PAILLASSES POLYVALENTES AVEC PLOT D'EXTRÉMITÉ - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 2 Elèves 1650 x 750 x 900 mm	MOB 7020	MOB 17300	1020 €	MOB 7027	MOB 17307	1093 €
Paillasse 2/3 Elèves 1950 x 750 x 900 mm	MOB 7080	MOB 17300	1110 €	MOB 7087	MOB 17307	1172 €
Paillasse 3 Elèves 2250 x 750 x 900 mm	MOB 7030	MOB 17300	1132 €	MOB 7037	MOB 17307	1207 €
Paillasse 2 Elèves 1800 x 750 x 900 mm	MOB 7020	MOB 27300	1062 €	MOB 7027	MOB 27307	1130 €
Paillasse 2/3 Elèves 2100 x 750 x 900 mm	MOB 7080	MOB 27300	1152 €	MOB 7087	MOB 27307	1209 €
Paillasse 3 Elèves 2400 x 750 x 900 mm	MOB 7030	MOB 27300	1174 €	MOB 7037	MOB 27307	1244 €

Ecole Active Bilingue "Jeannine Manuel" 75015 Paris

Salle de Physique Chimie (Revêtement Verre Emailé)

Paillasses en Travées de 3000 x 600 x 900 mm pour 4 Elèves, réalisées par association d'un Plot Technique Standard (MOB 26300) et de 2 Tables Sèches de 1200 mm (MOB 6020)...

Des Nourrices de Gaz et des Blocs Electriques complètent ces ensembles (Voir Rubrique "Accessoires").



## AGENCEMENT EN TRAVÉES

### DE SALLES DE SVT OU DE CHIMIE

Nous avons simulé à titre d'exemple, les combinaisons possibles de tables sèches et de plots techniques permettant de réaliser des paillasses en travées avec plot intermédiaire, solution d'agencement originale en SVT, Chimie...

Les exemples proposés dans le tableau, sont conçus avec 1 plot central et deux tables de mêmes dimensions de part et d'autre. L'Association de matériaux différents et de plusieurs tables de longueurs différentes est possible, ouvrant une infinité de solutions ...

Vous pouvez réaliser les mêmes agencements en combinant les mobiliers de la Gamme MONDRIAN ou de la Gamme EasyLab

## Avis d'expert...

Trespa TopLab et Varicor sont des Matériaux bien adaptés aux salles de SVT et Chimie pour leur résistance aux produits les plus agressifs (Acides, Nitrate d'Argent, Colorants...)... Réalisez vos propre combinaisons...



## PAILLASSES EN TRAVÉES AVEC PLOT CENTRAL - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 4 Elèves 2850 x 600 x 900 mm	MOB 6020 (x 2)	MOB 16300	1288 €	MOB 6027 (x 2)	MOB 16307	1162 €
Paillasse 4/6 Elèves 3450 x 600 x 900 mm	MOB 6080 (x 2)	MOB 16300	1394 €	MOB 6087 (x 2)	MOB 16307	1463 €
Paillasse 6 Elèves 4050 x 600 x 900 mm	MOB 6030 (x 2)	MOB 16300	1546 €	MOB 6037 (x 2)	MOB 16307	1617 €
Paillasse 4 Elèves 3000 x 600 x 900 mm	MOB 6020 (x 2)	MOB 26300	1532 €	MOB 6027 (x 2)	MOB 26307	1403 €
Paillasse 4/6 Elèves 3600 x 600 x 900 mm	MOB 6080 (x 2)	MOB 26300	1428 €	MOB 6087 (x 2)	MOB 26307	1499 €
Paillasse 6 Elèves 4200 x 600 x 900 mm	MOB 6030 (x 2)	MOB 26300	1580 €	MOB 6037 (x 2)	MOB 26307	1653 €

## PAILLASSES EN TRAVÉES AVEC PLOT CENTRAL- PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 4 Elèves 2850 x 750 x 900 mm	MOB 7020 (x 2)	MOB 17300	1456 €	MOB 7027 (x 2)	MOB 17307	1551 €
Paillasse 4/6 Elèves 3450 x 750 x 900 mm	MOB 7080 (x 2)	MOB 17300	1636 €	MOB 7087 (x 2)	MOB 17307	1709 €
Paillasse 6 Elèves 4050 x 750 x 900 mm	MOB 7030 (x 2)	MOB 17300	1680 €	MOB 7037 (x 2)	MOB 17307	1779 €
Paillasse 4 Elèves 3000 x 750 x 900 mm	MOB 7020 (x 2)	MOB 27300	1498 €	MOB 7027 (x 2)	MOB 27307	1588 €
Paillasse 4/6 Elèves 3600 x 750 x 900 mm	MOB 7080 (x 2)	MOB 27300	1678 €	MOB 7087 (x 2)	MOB 27307	1746 €
Paillasse 6 Elèves 4200 x 750 x 900 mm	MOB 7030 (x 2)	MOB 27300	1722 €	MOB 7037 (x 2)	MOB 27307	1816 €

## L'îlot central

### de biochimie

Les îlots centraux de Chimie, Biochimie, Salles de TIPE, de Salles de Préparation..., illustrent toutes les ressources du principe de Modularité Mobilab. La réalisation de grands plans de travail est justifiée par la mise en place de montages expérimentaux complexes nécessitant l'utilisation de dispositifs de fixation et la disponibilité à portée de main d'un grand nombre d'équipements. La présence de fluides aussi nombreux que différents peut être envisagée aux emplacements précis de leur utilisation. De la même manière des équipements lourds tels que les Hottes, Sorbonnes, Fours, Etuves peuvent être implantés sur ces tables ou sur des prolongements adaptés...

Exemple de Paillasse Centrale avec Plot Large d'extrémité LP 43150

Le modèle présenté est composé de 4 tables de 1200 x 600 x 900 mm associées par les longueurs et d'un plot d'extrémité à large bac de 1200 x 600 x 900 mm + Option Gaz. L'îlot présenté mesure 2550 x 1200 x 900 mm.

Un ou plusieurs plots peuvent être placés en extrémité ou intercalés entre des tables sèches sans contraintes de taille ou d'équipements.

Le plateau peut être revêtu de Grès, de Verre émaillé, de Stratifié, de TopLab, de Varicor... Quelques exemples d'îlots sont proposés dans le tableau ci dessous...

Tous les îlots Centraux peuvent être proposés en profondeur 1200 mm ou 1500 mm

Des meubles sous paillasses mobiles peuvent venir habiller partiellement ou totalement le dessous du plateau



Des aménagements particuliers peuvent être prévus au centre des îlots: Pare-projections en Verre Sécurit, Consoles centrales équipées de tablettes de dépose, ou de meubles de rangement vitrés. Les plans de travail peuvent être équipés en usine, de Potences et Montages "Laboméca"...

Exemple de Paillasse Centrale avec Plot d'Extrémité à Double Cuve Polysinc. Le modèle présenté est composé de 2 Tables en Grés de 1800 x 600 x 900 mm associées par les longueurs et de 1 Plot Large Polysinc à Double Cuve 1200 x 750 x 900 mm. L'îlot présenté mesure 2550 x 1200 x 900 mm.

Référence	Descriptif (L x p x H mm)	Composée de		Prix TTC
		Plot technique +	Table sèche	
LP 42550	Ilot Central Grés Emaillé de 2550 x 1200 x 900 mm	MOB 37500	MOB 6030 (x2)	1733 €
LP 42557	Ilot Central Verre Emaillé de 2550 x 1200 x 900 mm	MOB 37507	MOB 6037 (x2)	1941 €
LP 43150	Ilot Central Grés Emaillé de 3150 x 1200 x 900 mm	MOB 37500	MOB 6020 (x4)	2229 €
LP 43157	Ilot Central Verre Emaillé de 3150 x 1200 x 900 mm	MOB 37507	MOB 6027 (x4)	2477 €
LP 44200	Ilot Central Grés Emaillé de 4200 x 1200 x 900 mm	MOB 26300 (x2)	MOB 6030 (x4)	3160 €
LP 44207	Ilot Central Verre Emaillé de 4200 x 1200 x 900 mm	MOB 26307 (x2)	MOB 6037 (x4)	3306 €

# L'îlot central

## polyvalent



Le plateau peut être revêtu de Grès, de Verre émaillé, de Stratifié, de TopLab, de Varicor...  
Quelques exemples d'îlots sont proposés dans le tableau ci-dessous...

En option une tablette pose-documents ou des meubles sous paillasse mobiles peuvent venir habiller partiellement ou totalement le dessous du plateau...

Exemple de Paillasse Centrale Sèche  
Le modèle présenté est composé de 4 tables associées par les longueurs .  
L'îlot présenté mesure 2400 x 1500 x 900 mm

Tous les îlots Centraux peuvent être proposés en profondeur 1200 mm ou 1500 mm

Les îlots Centraux Polyvalents plus particulièrement destinés aux Salles de Physique, de Chimie, Biochimie, Salles de TIPE, Salles de Préparation..., illustrent toutes les ressources du principe de Modularité Mobilab.

La réalisation de grands plans de travail est justifiée par la mise en place de montages expérimentaux complexes nécessitant l'utilisation de dispositifs de fixation et la disponibilité à portée de main d'un grand nombre d'équipements.

En optique et en mécanique, ces espaces parfaitement plans et libres seront appréciés.

De la même manière des équipements lourds tels que les Hottes, Sorbonnes, Fours, Etuves peuvent être implantés sur ces tables ou sur des prolongements adaptés...



Référence	Descriptif (L x p x H mm)		Composée de tables sèches	Prix TTC
LP 4030	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	1800 x 1200 x 900 mm	MOB 6030 (x2)	990 €
LP 4033	Ilot Central Sec Stratifié de	1800 x 1200 x 900 mm	MOB 6033 (x2)	777 €
LP 4037	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	1800 x 1200 x 900 mm	MOB 6037 (x2)	1 035 €
LP 4040	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	2400 x 1200 x 900 mm	MOB 6020 (x4)	1 486 €
LP 4043	Ilot Central Sec Stratifié de	2400 x 1200 x 900 mm	MOB 6023 (x4)	1 397 €
LP 4047	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	2400 x 1200 x 900 mm	MOB 6027 (x4)	1 570 €
LP 4050	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	3000 x 1200 x 900 mm	MOB 6080 (x4)	1 681 €
LP 4053	Ilot Central Sec Stratifié de	3000 x 1200 x 900 mm	MOB 6083 (x4)	1 470 €
LP 4057	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	3000 x 1200 x 900 mm	MOB 6087 (x4)	1 764 €
LP 5030	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	1800 x 1500 x 900 mm	MOB 7030 (x2)	1 096 €
LP 5033	Ilot Central Sec Stratifié de	1800 x 1500 x 900 mm	MOB 7033 (x2)	877 €
LP 5037	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	1800 x 1500 x 900 mm	MOB 7037 (x2)	1 143 €
LP 5040	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	2400 x 1500 x 900 mm	MOB 7020 (x4)	1 743 €
LP 5043	Ilot Central Sec Stratifié de	2400 x 1500 x 900 mm	MOB 7023 (x4)	1 491 €
LP 5047	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	2400 x 1500 x 900 mm	MOB 7027 (x4)	1 827 €
LP 5050	Ilot Central Sec Grés Emaillé de	3000 x 1500 x 900 mm	MOB 7080 (x4)	2 102 €
LP 5053	Ilot Central Sec Stratifié de	3000 x 1500 x 900 mm	MOB 7083 (x4)	1 618 €
LP 5057	Ilot Central Sec Verre Emaillé de	3000 x 1500 x 900 mm	MOB 7087 (x4)	2 149 €



Pensez aux Meubles sous paillasse pour équiper vos paillasse centrales...voir rubrique "Rangements"

Ecole Active Bilingue "Jeannine Manuel" 75015 Paris

Salle de Biochimie (Revêtement Verre Email)

Paillasse en îlots de 4500 x 1200 x 900 mm pour 12 Elèves, réalisées par association de 4 Plots Techniques Etroits (MOB 16300) et de 6

Tables Sèches de 1200 mm (MOB 6020)...

Des Nourrices de Gaz et des Blocs Electriques complètent ces ensembles (Voir Rubrique "Accessoires").



## AGENCEMENTS EN ÎLOTS CENTRAUX

### DE CHIMIE ET BIOCHIMIE

Nous avons simulé à titre d'exemple, les combinaisons possibles de tables sèches et de plots techniques permettant de réaliser des paillasse en îlots, principalement destinées aux salles de Biochimie...

Les exemples proposés dans le tableau, sont conçus avec 1 plot central et deux tables de mêmes dimensions de part et d'autre. L'Association de matériaux différents et de plusieurs meubles de longueurs différentes est possible, ouvrant une infinité de solutions ...

Vous pouvez réaliser les mêmes agencements en combinant les mobiliers de la Gamme MONDRIAN ou de la Gamme EasyLab

## Avis d'expert...

Trespa TopLab et Varicor sont des Matériaux bien adaptés aux salles de SVT et Chimie pour leur résistance aux produits les plus agressifs (Acides, Nitrate d'Argent, Colorants...)... Réalisez vos propre combinaisons...



Lycée de la Vallée de Chevreuse - 91 Gif sur Yvette  
Salle de Biochimie (Revêtement Grès Emailé).  
Paillasse en Ilots pour 4 à 8 Elèves. Ensembles réalisés par association de 2 Plots Techniques et de 4 Tables Sèches de 1500 mm (MOB 6080)...  
Des Parois anti-projections, des Nourrices de Gaz, des Blocs Electriques et des meubles de rangement complètent ces ilots (Voir Rubrique "Accessoires").

## ILOTS DE BIOCHIMIE - PROFONDEUR 1200 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 8 Elèves 2850 x 1200 x 900 mm	MOB 6020 (x 4)	MOB 16300 (x 2)	2596 €	MOB 6027 (x 4)	MOB 16307 (x 2)	2734 €
Paillasse 12 Elèves 4050 x 1200 x 900 mm	MOB 6030 (x 2)	MOB 16300 (x 2)	2100 €	MOB 6037 (x 2)	MOB 16307 (x 2)	2198 €
Paillasse 12 Elèves 4500 x 1200 x 900 mm	MOB 6020 (x 6)	MOB 16300 (x 4)	4448 €	MOB 6027 (x 6)	MOB 16307 (x 4)	4682 €
Paillasse 8 Elèves 3000 x 1200 x 900 mm	MOB 6020 (x 4)	MOB 26300 (x 2)	2264 €	MOB 6027 (x 4)	MOB 26307 (x 2)	2806 €
Paillasse 12 Elèves 4200 x 1200 x 900 mm	MOB 6030 (x 4)	MOB 26300 (x 2)	3160 €	MOB 6037 (x 4)	MOB 26307 (x 2)	3306 €
Paillasse 12 Elèves 4800 x 1200 x 900 mm	MOB 6020 (x 6)	MOB 26300 (x 4)	4584 €	MOB 6027 (x 6)	MOB 26307 (x 4)	4826 €

## ILOTS DE BIOCHIMIE - PROFONDEUR 1500 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé			Revêtement Verre Emailé		
	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables Sèches	Référence Plot Technique	Prix TTC
Paillasse 8 Elèves 2850 x 1500 x 900 mm	MOB 7020 (x 4)	MOB 17300 (x 2)	2912 €	MOB 7027 (x 4)	MOB 17307 (x 2)	3102 €
Paillasse 12 Elèves 4050 x 1500 x 900 mm	MOB 7030 (x 2)	MOB 17300 (x 2)	2264 €	MOB 7037 (x 2)	MOB 17307 (x 2)	2414 €
Paillasse 12 Elèves 4500 x 1500 x 900 mm	MOB 7020 (x 6)	MOB 17300 (x 4)	4952 €	MOB 7027 (x 6)	MOB 17307 (x 4)	5288 €
Paillasse 8 Elèves 3000 x 1500 x 900 mm	MOB 7020 (x 4)	MOB 27300 (x 2)	2996 €	MOB 7027 (x 4)	MOB 27307 (x 2)	3176 €
Paillasse 12 Elèves 4200 x 1500 x 900 mm	MOB 7030 (x 4)	MOB 27300 (x 2)	3444 €	MOB 7037 (x 4)	MOB 27307 (x 2)	3632 €
Paillasse 12 Elèves 4800 x 1500 x 900 mm	MOB 7020 (x 6)	MOB 27300 (x 4)	5120 €	MOB 7027 (x 6)	MOB 27307 (x 4)	5436 €

Lycée "Jules Ferry" - 78 Versailles  
Salle de SVT et ExAO (Revêtement Grès Emailé)  
Association d'un Plot Technique, d'une Paillasse Sèche pour 3 Elèves et d'Un Plot Placard Informatique...  
Les Blocs Electriques complètent ces ensembles (Voir Rubrique "Accessoires").



## LE PLOT PLACARD INFORMATIQUE

- Le support Informatique le plus simple
- "Intégral" parce que tout y est !
- Le rangement pour l'unité centrale, le support de clavier, un large plan pour tous les écrans

### Avis d'expert...

Les équipements électriques sont toujours fournis en option. Vous pouvez choisir le nombre et le type de prises que vous souhaitez. Il est recommandé de prévoir un équipement électrique dédié à l'alimentation du matériel informatique et un autre équipement électrique dédié à l'alimentation des matériels de travaux pratiques.

Les prises de TP sont posées en extérieur de table à la disposition des manipulateurs, les prises informatiques sont placées dans le caisson UC pour les rendre inaccessibles aux élèves.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de mélaminé, de grès ou de verre émaillé de la taille exacte du plateau fini. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur. Il peut être réalisé avec tous les matériaux de ce catalogue (TopLab, Varicor, Stratifié, Multipl) sur simple demande...

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles

Trois passe-câbles (2 latéraux, 1 à l'arrière)

Plot Placard Informatique  
Son principal avantage :  
il se juxtapose aux équipements  
déjà implantés dans les salles.  
Ses dimensions sont aussi un atout :  
Largeur 550 mm  
Profondeur 600 ou 750 mm  
Hauteur 900 mm

Hauteur normalisée à 900 mm.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Trois passe-câbles (2 latéraux, 1 à l'arrière)

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles



## PLOT PLACARD INFORMATIQUE EN PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	GAMME STANDARD		GAMME MONDRIAN		
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
Plot Placard Grès	550 x 600 x 900 mm	TI 36610	427 €	MON-I 36610	427 €
Plot Placard Mélaminé	550 x 600 x 900 mm	TI 36612	400 €	MON-I 36612	400 €
Plot Placard TopLab	550 x 600 x 900 mm	TI 36615	459 €	MON-I 36615	459 €
Plot Placard Verre	550 x 600 x 900 mm	TI 36617	464 €	MON-I 36617	464 €

### Plot Placard Informatique - Gamme Mondrian

Son principal avantage : il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.  
Ses dimensions sont aussi un atout :  
Largeur 550 mm  
Profondeur 600 ou 750 mm  
Hauteur 900 mm

## PLOT PLACARD INFORMATIQUE EN PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	GAMME STANDARD		GAMME MONDRIAN		
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
Plot Placard Grès	550 x 750 x 900 mm	TI 37610	438 €	MON-I 37610	438 €
Plot Placard Mélaminé	550 x 750 x 900 mm	TI 37612	411 €	MON-I 37612	411 €
Plot Placard TopLab	550 x 750 x 900 mm	TI 37615	470 €	MON-I 37615	470 €
Plot Placard Verre	550 x 750 x 900 mm	TI 37617	475 €	MON-I 37617	475 €



En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.



## LE PLOT INFORMATIQUE ACTIMOB

ÉCRAN PLAT SUR COLONNE MOTORISÉE RÉGLABLE EN HAUTEUR



Ces meubles sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

### Avis d'expert...

Les équipements électriques sont toujours fournis en option. Vous pouvez choisir le nombre et le type de prises que vous souhaitez. Il est recommandé de prévoir un équipement électrique dédié à l'alimentation du matériel informatique et un autre équipement électrique dédié à l'alimentation des matériels de travaux pratiques.

Les prises de TP sont posées en extérieur de table à la disposition des manipulateurs, les prises informatiques sont placées dans le caisson UC pour les rendre inaccessibles aux élèves.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de mélaminé, de grès ou de verre émaillé de la taille exacte du plateau fini. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur. Il peut être réalisé avec tous les matériaux de ce catalogue (TopLab, Varicor, Stratifié, Multipli) sur simple demande...

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

*Plot Placard Informatique*  
Son principal avantage :  
il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.  
Ses dimensions sont aussi un atout :  
Largeur 550 mm  
Profondeur 750 mm  
Hauteur 900 mm

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles

**Ce modèle ne peut être réalisé qu'en profondeur 750 mm**

L'Ecran monté sur support motorisé, s'extrait en totalité, grâce à la commande manuelle intégrée sous le plateau...

Une télécommande fonctionnant par radio-fréquence est proposée en option...

Colonne motorisée à déplacement rapide et insonore

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles

Hauteur du Plot normalisée à 900 mm.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Télécommande à double déplacement positionnée sur le panneau latéral à l'intérieur du meuble



Pensez aux postes de travail réglables en hauteur par manivelle de la gamme ActiMob.

Poste de travail réglable en hauteur en continu, pour permettre d'ajuster le plan à son utilisateur: assis ou debout...

Meuble particulièrement adapté aux personnes à mobilité réduite !


En position basse, l'écran est totalement protégé dans son caisson... Et le plateau de plot est libéré de tout équipement.

## PLOT MOTORISÉ

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot Placard Grès 550 x 750 x 900 mm	TIREG 37610	1051 €
Plot Placard Mélaminé 550 x 750 x 900 mm	TIREG 37612	1030 €
Plot Placard TopLab 550 x 750 x 900 mm	TIREG 37615	1105 €
Plot Placard Verre 550 x 750 x 900 mm	TIREG 37617	1159 €

## OPTION

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Télécommande Radio-Fréquence	TIREG 3001	127 €

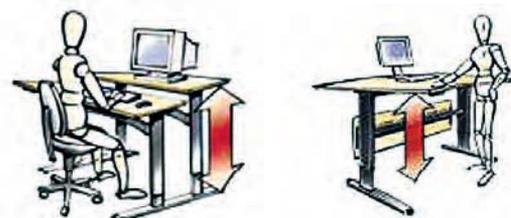

Un Poste de Travail réglable en hauteur en continu, pour permettre d'ajuster le plan à son utilisateur: assis ou debout....

Lycée d'Enseignement Général et Professionnel "Edouard Herriot" - 10 Sainte Savine  
Salle de Physique - Chimie et ExAO (Revêtement Grès Emallé), constituée de Paillasse Polyvalentes de Grandes Dimensions 2500 x 750 x 900 mm.  
Ces Paillasse sont réalisées par association d'un Plot Technique Etroit (MOB 17300), d'une Paillasse Séche pour 2/3 Elèves en largeur 1500 mm (MOB 7080) et d'Un Plot ExAO-Flat (EXA 7017)...  
Les Blocs Electriques complètent ces ensembles (Voir Rubrique "Accessoires").



## LE PLOT INTÉGRAL

### POUR ÉCRAN PLAT EXAO FLAT

- Un concept unique alliant ergonomie et design
- "Intégral" parce que tout y est !
- "ExAO-Flat", l'expression de la "Modularité"

#### Avis d'expert...

Les équipements électriques sont toujours fournis en option. Vous pouvez choisir le nombre et le type de prises que vous souhaitez. Il est recommandé de prévoir un équipement électrique dédié à l'alimentation du matériel informatique et un autre équipement électrique dédié à l'alimentation des matériels de travaux pratiques.

Les prises de TP sont posées en extérieur de table à la disposition des manipulateurs, les prises informatiques sont placées dans le caisson UC pour les rendre inaccessibles aux élèves.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES



Le clavier est posé sur une tablette extractible.

Le module ExAO Ecran Plat intégré sous paillasse centralise un espace pour le moniteur et un espace de rangement pour l'unité centrale.  
Le moniteur est positionné dans un Tiroir, prévu spécifiquement pour les écrans plats de 15" et 17" et certains Ecrans de 19" (en situation avec écran 17")

Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles

Le Plot ExAO-Flat est un Meuble Autonome conçu pour s'intégrer dans tous les types d'aménagements quelque soient les revêtements utilisés pour les paillasses de travail.  
Seule la spécificité du plateau du plot ExAO avec sa fenêtre transparente, justifie l'utilisation du Verre Emailé...



Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" de la taille exacte du plateau fini. Une fenêtre transparente est réservée à l'emplacement du moniteur.  
Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Le tiroir porte écran est verrouillable par une serrure de type "Poussoir" Lorsque la clé est retirée, la serrure est inarrachable et ne dépasse pas du plot.

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



Plot Intégral pour Ecran Plat ExAO-Flat Gamme Mondrian  
Son principal avantage : il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.  
Ses dimensions sont aussi un atout :  
Largeur 550 mm  
Profondeur 600 ou 750 mm  
Hauteur 900 mm

Plot Intégral pour Ecran Plat ExAO-Flat  
Son principal avantage : il se juxtapose aux équipements déjà implantés dans les salles.  
Ses dimensions sont aussi un atout :  
Largeur 550 mm  
Profondeur 600 ou 750 mm  
Hauteur 900 mm

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition à d'autres modules tables, ou meubles



Pour laisser un maximum d'espace à l'utilisateur assis devant le caisson Unité Centrale, les modèles en 750 mm de profondeur, ont un placard décaissé (c'est à dire reculé par rapport à l'avant de la table).  
Un utilisateur de grande taille, peut s'asseoir sans gêne ni fatigue même pendant plusieurs heures de travail...  
Les Plots en 600 mm ne permettent pas de reculer le placard.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plot ExAO-Flat Standard 550 x 600 x 900 mm	EXA 6017	738 €
Plot ExAO-Flat Standard 550 x 750 x 900 mm	EXA 7017	785 €
Plot ExAO-Flat Mondrian 550 x 600 x 900 mm	MON-X 6017	738 €
Plot ExAO-Flat Mondrian 550 x 750 x 900 mm	MON-X 7017	785 €

Institution "St Louis - Ste Clotilde" - 93 Le Raincy

Salle de Physique - Chimie et ExAO (Revêtement Verre Emailit), constituée de Paillasse Polyvalentes de Grandes Dimensions 2250 x 750 x 900 mm. Ces Paillasse sont réalisées par association d'un Plot Technique Etroit (MOB 17300) et d'une Paillasse ExAO-Flat pour 2/3 Elèves en largeur 1800 mm (MOB 7080) et d'Un Plot ExAO-Flat (EXA 76807)... Dans ce cas les paillasse sont de profondeur 750 mm. Le Tiroir pour écran plat et le placard UC sont décaissés pour libérer un espace suffisant aux jambes de l'utilisateur. L'Emplacement informatique constitue alors une place à part entière pour un élève. Les Blocs Electriques complètent ces ensembles (Voir Rubrique "Accessoires").



## LES PAILLASSES INTÉGRALES

POUR ÉCRAN PLAT EXAO-FLAT

### Avis d'expert...

Les équipements électriques sont toujours fournis en option. Vous pouvez choisir le nombre et le type de prises que vous souhaitez. Il est recommandé de prévoir un équipement électrique dédié à l'alimentation du matériel informatique et un autre équipement électrique dédié à l'alimentation des matériels de travaux pratiques.

Les prises de TP sont posées en extérieur de table à la disposition des manipulateurs, les prises informatiques sont placées dans le caisson UC pour les rendre inaccessibles aux élèves.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu d'un module de verre moulé "Sécurité" de la taille exacte du plateau fini. Une fenêtre transparente est réservée à l'emplacement du moniteur. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.

Le clavier est posé sur une tablette extractible.

En option les paillasses ExAO peuvent être équipées d'un dossier anti-chutes ou d'un dossier anti-projections, d'une tablette abattante...

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm.

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four. Piètement en H, entretroisé conférant une excellente stabilité à l'ensemble de la table.

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métalliques sont inarrachables

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



Modèle présenté EXA66807  
"Paillasse ExAO-Flat 4 Pieds de dimensions 1800 x 600 x 900 mm"

Le module ExAO-Flat intégré sous paillasse réserve d'une part un espace pour le moniteur et d'autre part un espace de rangement pour l'unité centrale. Le moniteur est positionné dans un tiroir, prévu spécifiquement pour les écrans plats de 15" et 17" et certains Ecrans de 19" (en situation avec écran 15") Le caisson UC est destiné à protéger l'unité centrale, il est équipé d'une porte avec serrure et de passe-câbles

**Paillasse Intégrale ExAO-Flat**  
C'est la paillasse d'Expérimentation Assistée Par Ordinateur, des enseignants et des élèves. Pensée dans les détails les plus infimes pour réunir en un seul ensemble l'espace de travail, le poste informatique et l'unité centrale...  
Fruit de notre longue expérience dans la réalisation de salles informatiques, toutes les suggestions collectées ont conduit à la réalisation de la Nouvelle Gamme ExAO-Flat  
2 Largeurs (1240 mm ou 1800 mm) et 2 Profondeurs (600 mm et 750 mm).  
2 Gammes "4 Pieds" ou "A Dégagement Latéral"



Le tiroir porte écran est verrouillable par une serrure de type "Poussoir" Lorsque la clé est retirée, la serrure est inarrachable et ne dépasse pas du plot.

Modèle présenté EXA 66807  
"Paillasse ExAO-Flat 4 Pieds de dimensions 1240 x 600 x 900 mm"



Modèle présenté EXD 76807  
"Paillasse ExAO-Flat de dimensions 1800 x 750 x 900 mm" avec Piètements à Dégagement Latéral

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>Paillasse ExAO-Flat - Gamme "4 Pieds"</b>		
Paillasse ExAO-Flat - 4P	1240 x 600 x 900 mm	EXA 66207 1 312 €
Paillasse ExAO-Flat - 4P	1800 x 600 x 900 mm	EXA 66807 1 512 €
Paillasse ExAO-Flat - 4P	1240 x 750 x 900 mm	EXA 76207 1357 €
Paillasse ExAO-Flat - 4P	1800 x 750 x 900 mm	EXA 76807 1599 €
<b>Paillasse ExAO-Flat - Gamme "A Dégagement Latéral"</b>		
Paillasse ExAO-Flat - DL	1240 x 600 x 900 mm	EXD 66207 1 331 €
Paillasse ExAO-Flat - DL	1800 x 600 x 900 mm	EXD 66807 1 536 €
Paillasse ExAO-Flat - DL	1240 x 750 x 900 mm	EXD 76207 1 385 €
Paillasse ExAO-Flat - DL	1800 x 750 x 900 mm	EXD 76807 1 599 €

Pour laisser un maximum d'espace à l'utilisateur assis devant le caisson Unité Centrale, les modèles en 750 mm de profondeur, ont un placard décaissé (c'est à dire reculé par rapport à l'avant de la table). Un utilisateur de grande taille, peut s'asseoir sans gêne ni fatigue même pendant plusieurs heures de travail... Les Plots en 600 mm ne permettent pas de reculer le placard.

Institution "St Louis - Ste Clotilde" - 93 Le Raincy

Salle de Physique - Chimie et ExAO (Revêtement Verre Emailit), constituée de Paillasse Polyvalentes de Grandes Dimensions 2250 x 750 x 900 mm. Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques....etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...



## LES SALLES POLYVALENTES

### EXAO-FLAT

Nous avons simulé à titre d'exemple, les combinaisons possibles de tables ExAO-Flat et de plots techniques permettant de réaliser des paillasse d'ExAO Humides avec Plot d'Extrémité; principalement destinées aux salles de SVT, Physique et Chimie... pour les utilisateurs d'Ecrans Plats.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES



Lycée "Louis Pasteur" - 92 Neuilly sur Seine  
Salle de Chimie et ExAO (Revêtement Verre Emailit), constituée de Paillasse Polyvalentes de Petites Dimensions 1690 x 750 x 900 mm.  
Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...

## PAILLASSES POLYVALENTES EXAO-FLAT AVEC PLOT D'EXTRÉMITÉ - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Gamme "4 pieds"			Gamme "A dégagement latéral"			
	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO 1 à 2 Elèves	1690 x 600 x 900 mm	EXA 66207	MOB 16307	1893 €	EXD 66207	MOB 16307	1912 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	2250 x 600 x 900 mm	EXA 66807	MOB 16307	2093 €	EXD 66807	MOB 16307	2117 €
Paillasse ExAO 1 à 2 Elèves	1840 x 600 x 900 mm	EXA 66207	MOB 26307	1929 €	EXD 66207	MOB 26307	1948 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	2400 x 600 x 900 mm	EXA 66807	MOB 26307	2129 €	EXD 66807	MOB 26307	2153 €

## PAILLASSES POLYVALENTES EXAO-FLAT AVEC PLOT D'EXTRÉMITÉ - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Gamme "4 pieds"			Gamme "A dégagement latéral"			
	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO 1 à 2 Elèves	1690 x 750 x 900 mm	EXA 76207	MOB 17307	1992 €	EXD 76207	MOB 17307	2020 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	2250 x 750 x 900 mm	EXA 76807	MOB 17307	2210 €	EXD 76807	MOB 17307	2234 €
Paillasse ExAO 1 à 2 Elèves	1840 x 750 x 900 mm	EXA 76207	MOB 27307	2209 €	EXD 76207	MOB 27307	2057 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	2400 x 750 x 900 mm	EXA 76807	MOB 27307	2247 €	EXD 76807	MOB 27307	2271 €

## POUR L'ESPACE PROFESSEUR...

Descriptif (L x p x H mm)	Gamme "4 pieds"			Gamme "A dégagement latéral"			
	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO professeur	3000 x 750 x 900 mm	EXA 76807	MOB 37507	2480 €	EXD 76807	MOB 37507	2504 €

Collège - Lycée "Les Renardières" - 92 Courbevoie

Salle de Physique - Chimie et ExAO (Revêtement Verre Emailé),

2 Tables ExAO-Flat de 1800 x 600 x 900 mm (EXA 66807) sont positionnées en Travée de part et d'autre d'un Plot Technique Etroit de 450 x 600 x 900 mm (EXA 16307).

L'Ensemble mesure 4050 mm de longueur...pour 4 élèves.

Paillasse Professeur, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...



## LES SALLES D'EXAO EN TRAVÉES

### CONCEPT EXAO-FLAT

Nous avons simulé à titre d'exemple, les combinaisons possibles de tables ExAO-Flat et de plots techniques permettant de réaliser des paillasse d'ExAO Humides avec Plot Central; principalement destinées aux salles de SVT, Physique et Chimie...pour les utilisateurs d'Ecrans Plats.

#### Avis d'expert...

Les équipements électriques sont toujours fournis en option. Vous pouvez choisir le nombre et le type de prises que vous souhaitez. Il est recommandé de prévoir un équipement électrique dédié à l'alimentation du matériel informatique et un autre équipement électrique dédié à l'alimentation des matériels de travaux pratiques.

Les prises de TP sont posées en extérieur de table à la disposition des manipulateurs, les prises informatiques sont placées dans le caisson UC pour les rendre inaccessibles aux élèves.

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES



## PAILLASSES POLYVALENTES EXAO-FLAT AVEC PLOT CENTRAL - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence Tables ExAO	Gamme "4 pieds"		Gamme "A dégagement latéral"			
		Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO 2 Elèves	2930 x 600 x 900 mm	EXA 66207 (x2)	MOB 16307	3205 €	EXD 66207 (x2)	MOB 16307	3243 €
Paillasse ExAO 4 Elèves	4050 x 600 x 900 mm	EXA 66807 (x2)	MOB 16307	3605 €	EXD 66807 (x2)	MOB 16307	3653 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	3080 x 600 x 900 mm	EXA 66207 (x2)	MOB 26307	3241 €	EXD 66207 (x2)	MOB 26307	3279 €
Paillasse ExAO 4 Elèves	4200 x 600 x 900 mm	EXA 66807 (x2)	MOB 26307	3641 €	EXD 66807 (x2)	MOB 26307	3689 €

## PAILLASSES POLYVALENTES EXAO-FLAT AVEC PLOT CENTRAL - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence Tables ExAO	Gamme "4 pieds"		Gamme "A dégagement latéral"			
		Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO 2 Elèves	2930 x 750 x 900 mm	EXA 76207 (x2)	MOB 17307	3349 €	EXD 76207 (x2)	MOB 17307	3405 €
Paillasse ExAO 4 Elèves	4050 x 750 x 900 mm	EXA 76807 (x2)	MOB 17307	3785 €	EXD 76807 (x2)	MOB 17307	3833 €
Paillasse ExAO 2 Elèves	3080 x 750 x 900 mm	EXA 76207 (x2)	MOB 27307	3386 €	EXD 76207 (x2)	MOB 27307	3442 €
Paillasse ExAO 4 Elèves	4200 x 750 x 900 mm	EXA 76807 (x2)	MOB 27307	3822 €	EXD 76807 (x2)	MOB 27307	3870 €

## POUR L'ESPACE PROFESSEUR...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence Tables ExAO	Gamme "4 pieds"		Gamme "A dégagement latéral"			
		Référence Plot Technique	Prix TTC	Référence Tables ExAO	Référence Plot Technique	Prix TTC	
Paillasse ExAO professeur	3000 x 750 x 900 mm	EXA 76807	MOB 37507	2480 €	EXD 76807	MOB 37507	2504 €



Lycée "Gustave Ferrié" - 75010 Paris  
Salle de Physique - Chimie et ExAO (Revêtement Grès Emailé), agencée en demi-épi...

## LES AGENCEMENTS EN DEMI-EPI


Le principe du Demi-Epi joint l'utile à l'agréable.

Cette salle très esthétique, permet d'associer les paillasses de travail perpendiculairement à un Linéaire Mural, libérant totalement la perspective du tableau et de la chaire professeur.

Le Linéaire est constitué par l'association de tables sèches. L'Appui au mur définit la longueur de cette paillasse murale.

Tous les intervalles entre tables peuvent être exploités pour y glisser des meubles de rangement sous paillasse à portes ou à tiroirs, ou des meubles pour unité centrale. Le mur constitue alors un support pratique de goulottes en continu équipées de prises et permettant la distribution des courants forts et faibles au niveau du linéaire et de chaque poste de travail. Un porte clavier extractible peut être positionné sous le plan de travail en linéaire ou sur la table élève en retour. Le Linéaire devient un espace ExAO...

# LES PAILLASSES ExAO & IMPLANTATIONS SPÉCIFIQUES

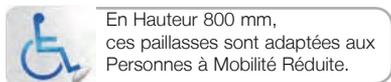

En Hauteur 800 mm, ces paillasses sont adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite.

En option les paillasses peuvent être équipées d'un dossier anti-chutes, d'un support de clavier extractible, de meubles de rangement pour Unité Centrale ou de Meubles sous paillasse à porte ou à tiroirs pour le rangement des équipements à proximité immédiate des élèves...

Le plateau de forte épaisseur 30 mm est constitué d'un panneau en CTBH de 22 mm revêtu de Dalles de Grès, de Verre Emailé ou de Stratifié ...



Modèle présenté EASY 750187  
"Paillasse Latérale de dimensions 1800 x 750 x 900 mm"  
Revêtement Verre  
avec Piètements à Dégagement Latéral

Modèles proposés en Version "4 Pieds" ou "A Dégagement Latéral"

Passe-câbles intégrés dans le plateau, au centre ou en extrémité du plateau

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables. Les plateaux ainsi fixés sur la structure métallique sont inarrachables

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm. Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme. Il peut supporter les prises à commander séparément



Modèle présenté MOB 60180  
"Paillasse Latérale de dimensions 1800 x 600 x 900 mm"  
Revêtement Grès  
avec Piètements 4 Pieds en H

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

## PAILLASSES LATÉRALES EN PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Gamme "4 pieds"		Gamme "A dégagement latéral"		
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
Table Latérale Grès	1350 x 600 x 900 mm	MOB 601350	455 €	EASY 601350	482 €
Table Latérale Grès	1500 x 600 x 900 mm	MOB 601500	491 €	EASY 601500	521 €
Table Latérale Grès	1800 x 600 x 900 mm	MOB 600180	520 €	EASY 600180	551 €
Table Latérale TopLab	1350 x 600 x 900 mm	MOB 601355	491 €	EASY 601355	520 €
Table Latérale TopLab	1500 x 600 x 900 mm	MOB 601505	530 €	EASY 601505	559 €
Table Latérale TopLab	1800 x 600 x 900 mm	MOB 600185	557 €	EASY 600185	589 €
Table Latérale Emalit	1350 x 600 x 900 mm	MOB 601357	479 €	EASY 601357	507 €
Table Latérale Emalit	1500 x 600 x 900 mm	MOB 601507	517 €	EASY 601507	548 €
Table Latérale Emalit	1800 x 600 x 900 mm	MOB 600187	544 €	EASY 600187	577 €
Table Latérale Stratifié	1350 x 600 x 900 mm	MOB 601353	412 €	EASY 601353	436 €
Table Latérale Stratifié	1500 x 600 x 900 mm	MOB 601503	420 €	EASY 601503	445 €
Table Latérale Stratifié	1800 x 600 x 900 mm	MOB 600183	441 €	EASY 600183	467 €

### Avis d'expert...



Des accessoires pratiques pour ranger et protéger vos équipements informatiques. Retrouvez ces références dans les pages suivantes de ce catalogue...

## PAILLASSES LATÉRALES EN PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Gamme "4 pieds"		Gamme "A dégagement latéral"		
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
Table Latérale Grès	1350 x 750 x 900 mm	MOB 751350	549 €	EASY 751350	583 €
Table Latérale Grès	1500 x 750 x 900 mm	MOB 751500	587 €	EASY 751500	621 €
Table Latérale Grès	1800 x 750 x 900 mm	MOB 750180	613 €	EASY 750180	650 €
Table Latérale TopLab	1350 x 750 x 900 mm	MOB 751355	585 €	EASY 751355	620 €
Table Latérale TopLab	1500 x 750 x 900 mm	MOB 751505	620 €	EASY 751505	669 €
Table Latérale TopLab	1800 x 750 x 900 mm	MOB 750185	650 €	EASY 750185	707 €
Table Latérale Emalit	1350 x 750 x 900 mm	MOB 751357	573 €	EASY 751357	608 €
Table Latérale Emalit	1500 x 750 x 900 mm	MOB 751507	614 €	EASY 751507	651 €
Table Latérale Emalit	1800 x 750 x 900 mm	MOB 750187	640 €	EASY 750187	679 €
Table Latérale Stratifié	1350 x 750 x 900 mm	MOB 751353	438 €	EASY 751353	464 €
Table Latérale Stratifié	1500 x 750 x 900 mm	MOB 751503	471 €	EASY 751503	500 €
Table Latérale Stratifié	1800 x 750 x 900 mm	MOB 750183	492 €	EASY 750183	522 €

### OPTIONS...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Dossieret Antichute (au Mètre Linéaire)	MOB 3002	30 €
Support Clavier/Souris Extractible	ACI 200888	89 €
Meuble Unité Centrale Sous Paillasse	EXA 7005	249 €

Collège Vignaud – 91 Limours

Poste de travail ActiMob, réglable en hauteur par manivelle pour les personnes à mobilité réduite.

Structure à dégagement latéral à Double Colonne verticale.

Cette table est associée à un plot technique, mais elle peut être associée avec une paillasse, un établis...



## LES POSTES DE TRAVAIL RÉGLABLES EN HAUTEUR PAR MANIVELLE “GAMME ACTIMOB”

Poste de travail réglable en hauteur en continu, pour permettre d’ajuster le plan à son utilisateur : assis, debout ou en fauteuil...

Ces postes ergonomiques sont particulièrement recommandés pour les salles pouvant recevoir des Personnes à Mobilité Réduite. Ils offrent aussi une parfaite polyvalence.

Ils peuvent être associés à des plots techniques et informatiques.

Ils peuvent être équipés de meubles SSP.



Ces meubles sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

# LE MOBILIER DYNAMIQUE & ERGONOMIQUE

Une gamme est proposée en largeur, 1200 mm, 1500 mm et 1800 mm

Structure Métallique soudée en tube carré de forte section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Dispositif de réglage composé de 4 vérins autoguidés, fixés aux piétements; rotule et axe d'entraînement permettant, une élévation continue et synchronisée de part et d'autre du poste de travail, même si les poids ne sont pas répartis en surface...

Structure à dégagement latéral à Double Colonne verticale. Cette table peut s'associer à tous les types d'équipements: plots techniques, paillasse, établis...

Le plateau de forte épaisseur est proposé en Grès Emailé, Verre Emailé, TopLab ou Stratifié... (Autres matériaux sur demande...)

Postes de Forte capacité 300 Kg

Plateau sans débordement permettant la juxtaposition et la modularité des tables.

Toutes les tables sont proposées en Profondeur Standard de 600 mm ou 750 mm.

Hauteur de Réglage: de 740 à 1130 mm

La Manivelle est une poignée escamotable, facile à manoeuvrer, et de construction très robuste...

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Modèle présenté ACT 6083 "Paillasse Réglable par Manivelle, Revêtement Stratifié"  
Paillasse de 1500 x 600 x R mm



## Avis d'expert...

Pensez aux plots informatiques de la gamme ActiMob, avec écran plat sur colonne motorisée réglable en hauteur. Meuble adapté aux personnes à mobilité réduite !



Un Poste de Travail réglable en hauteur en continu, pour permettre d'ajuster le plan à son utilisateur: assis ou debout...

## PAILLASSE RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR MANIVELLE - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Stratifié	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Rég. Manivelle 1200 x 600 x (R) mm	ACTI 6020	887 €	ACTI 6027	948 €	ACTI 6025	953 €	ACTI 6023	856 €
Paillasse Rég. Manivelle 1500 x 600 x (R) mm	ACTI 6080	938 €	ACTI 6087	1 007 €	ACTI 6085	1 011 €	ACTI 6083	906 €
Paillasse Rég. Manivelle 1800 x 600 x (R) mm	ACTI 6030	993 €	ACTI 6037	1 067 €	ACTI 6035	1 072 €	ACTI 6033	962 €

## PAILLASSE RÉGLABLE EN HAUTEUR PAR MANIVELLE - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Stratifié	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Rég. Manivelle 1200 x 750 x (R) mm	ACTI 7020	916 €	ACTI 7027	941 €	ACTI 7025	946 €	ACTI 7023	884 €
Paillasse Rég. Manivelle 1500 x 750 x (R) mm	ACTI 7080	1 009 €	ACTI 7087	1 038 €	ACTI 7085	1 044 €	ACTI 7083	978 €
Paillasse Rég. Manivelle 1800 x 750 x (R) mm	ACTI 7030	1 052 €	ACTI 7037	1 149 €	ACTI 7035	1 156 €	ACTI 7033	1021 €

Lycée "Félix Le Gaillard" - 16 Barbézieux - Projet Réalisé en Partenariat avec le Conseil Régional de Poitou-Charentes

Salle Polyvalente de Sciences (Revêtement Grès Emailé),

1 Poste destiné aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est positionné conformément à la réglementation, à l'avant de la salle. Il est composé par association d'un Plot Technique Hauteur 800 mm (MOB 26300-H) et d'une Table Réglable en Hauteur par dispositif motorisé de 1800 x 600 x 690 à 1130 mm (ACMO 6030)

Paillasses Professeur et Elèves, Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques...etc, vont parfaire cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...



## LES POSTES DE TRAVAIL RÉGLABLES EN HAUTEUR SUR COLONNE MOTORISÉE


- Vitesse élevée et amplitude importante
- Confort sonore, design fin et compact

Ces postes offrent une parfaite polyvalence aux espaces collectifs recevant du Public à Mobilité Réduite ou pour certaines filières scientifiques où le confort de manipulation nécessite de pouvoir ajuster le poste à la taille des utilisateurs...



Ces meubles sont adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite.

# LE MOBILIER DYNAMIQUE & ERGONOMIQUE

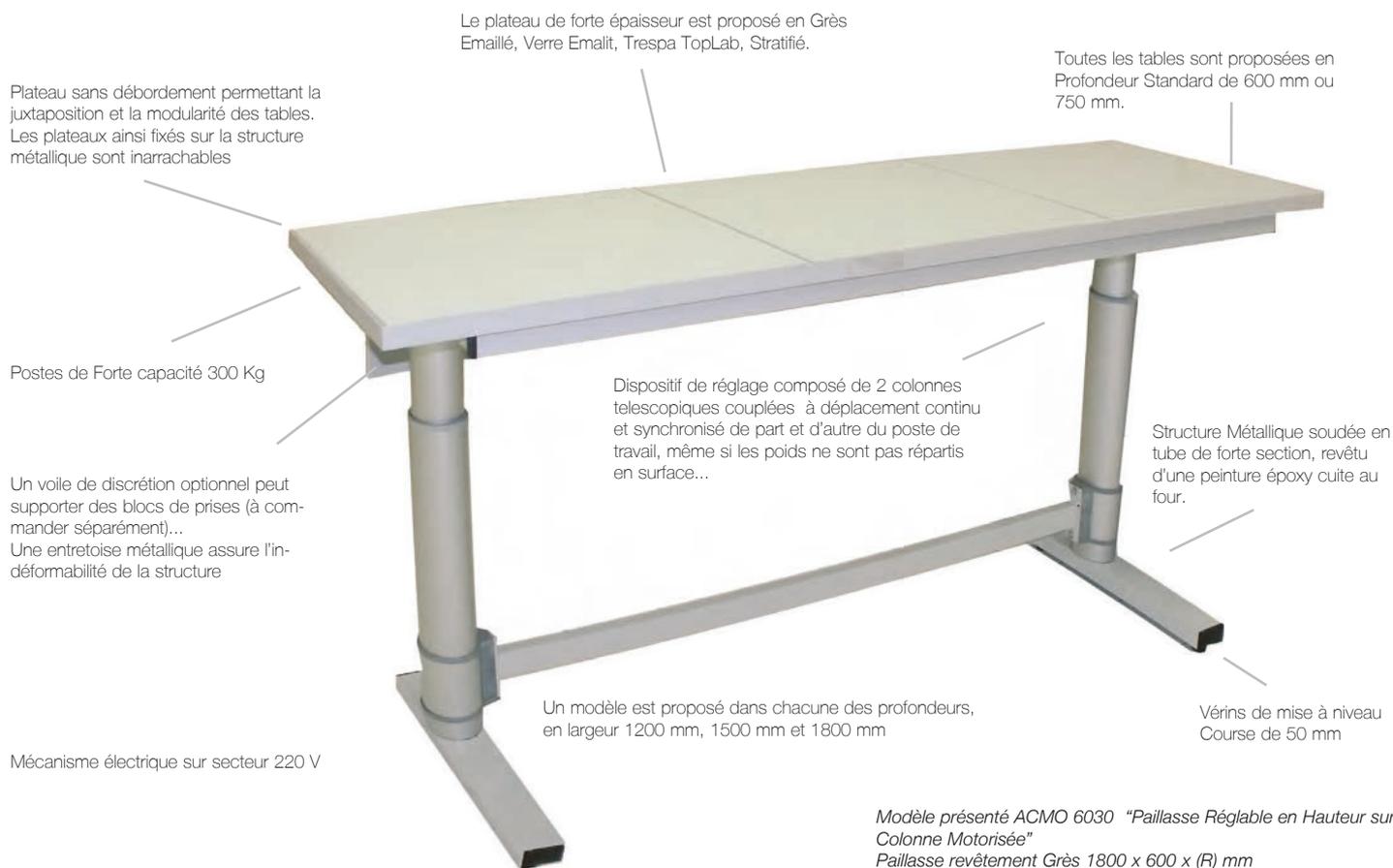

Sa structure à dégagement latéral intègre la fonction de réglage motorisé...  
Ce modèle peut s'associer à tous les types d'équipements : plots techniques, paillasse, établis...  
Les Piètements à Dégagement Latéral et le Cadre sous plateau assurent une grande robustesse et une parfaite linéarité au plan de travail...

Hauteur de Réglage: de 730 à 1130 mm.



Les colonnes sont pilotées par un pupitre de commande fixé sous le plateau ou par télécommande radio-fréquence optionnelle.  
Le pupitre affiche la hauteur désirée...



Un Poste de Travail réglable en hauteur en continu, pour permettre d'ajuster le plan à son utilisateur: assis ou debout...

## PAILLASSE RÉGLABLE EN HAUTEUR MOTORISÉE - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Stratifié	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Rég. Motorisée 1200 x 600 x (R) mm	ACMO 6020	2 213 €	ACMO 6027	2 236 €	ACMO 6025	2 246 €	ACMO 6023	2 201 €
Paillasse Rég. Motorisée 1500 x 600 x (R) mm	ACMO 6080	2 386 €	ACMO 6087	2 429 €	ACMO 6085	2 444 €	ACMO 6083	2 375 €
Paillasse Rég. Motorisée 1800 x 600 x (R) mm	ACMO 6030	2 528 €	ACMO 6037	2 578 €	ACMO 6035	2 591 €	ACMO 6033	2 512 €

## PAILLASSE RÉGLABLE EN HAUTEUR MOTORISÉE - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Revêtement Grès Emailé		Revêtement Verre Emailé		Revêtement Trespa TopLab		Revêtement Stratifié	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Paillasse Rég. Motorisée 1200 x 750 x (R) mm	ACMO 7020	2 338 €	ACMO 7027	2 364 €	ACMO 7025	2 369 €	ACMO 7023	2 327 €
Paillasse Rég. Motorisée 1500 x 750 x (R) mm	ACMO 7080	2 482 €	ACMO 7087	2 516 €	ACMO 7085	2 525 €	ACMO 7083	2 471 €
Paillasse Rég. Motorisée 1800 x 750 x (R) mm	ACMO 7030	2 631 €	ACMO 7037	2 665 €	ACMO 7035	2 673 €	ACMO 7033	2 617 €

## OPTION

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Télécommande Radio-Fréquence	TIREG 3001	127 €



## LES ESTRADES

Un bâti entretoisé sert d'ossature à un plancher de forte épaisseur 30 mm revêtu d'un revêtement de sol classé non feu, résistant de type "grand passage" et facile d'entretien.

Une cornière anti-dérapante ceinture en "L" le périmètre de l'estrade.

La hauteur standard retenue est de 200 mm. La technique de construction du bâti la rend parfaitement insonore.

Une grille de ventilation latérale est fixée de part et d'autre de l'estrade.

Les Estrades sont livrées en 2 à 4 modules identiques à associer sur site...

Les dimensions des modèles standards peuvent être ajustées en fonction des contraintes de la salle...

Des modèles de plus grandes dimensions peuvent être proposés sur projet.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Estrade 3000 x 1800 x 200 mm	MOB 100	1 331 €
Estrade 3600 x 1800 x 200 mm	MOB 101	1 587 €
Estrade 4200 x 1800 x 200 mm	MOB 102	2 001 €





## LES PODIUMS EN GRADINS

Les Podium en Gradins sont conçus par superposition d'estrades...

Un bâti entretoisé sert d'ossature à un plancher de forte épaisseur 30 mm revêtu d'un revêtement de sol classé non feu, résistant de type "grand passage" et facile d'entretien. Une cornière anti-dérapante en "L" ceinture le périmètre des estrades.

La hauteur standard retenue est de 200 mm par gradin. La technique de construction du bâti les rend parfaitement insonores. Les Estrades sont livrées en modules à associer sur site...

Des grilles de ventilation latérales sont fixées de part et d'autre des estrades. Une circulation d'air traversante horizontalement et verticalement est spécifiquement étudiée.

3 Modèles sont proposés en Standard, pour accueillir 18, 24 ou 32 élèves avec une allée centrale.

Des garde-corps sécurisent les gradins. La Hauteur totale indiquée dans le tableau s'entend hors garde-corps. (Hauteur des garde-corps 900 mm)

Des modèles de dimensions spécifiques peuvent être proposés sur projet.

Des rangements, des tableaux d'affichage ou d'écriture peuvent être adaptés à l'arrière des podium en fonction des configurations d'implantation... Les Tables et Sièges d'Amphithéâtres sont proposés par notre département MOBISKOOL - Mobilier de Collectivité...

Descriptif (L x p x H mm)		Référence	Prix TTC
Podium sur 3 Niveaux - 18 Places	4850 x 3000 x 600 mm	MOB 183	9 124 €
Podium sur 4 Niveaux - 24 Places	4850 x 4000 x 800 mm	MOB 184	11 125 €
Podium sur 4 Niveaux - 32 Places	5850 x 4000 x 800 mm	MOB 185	13 666 €



## LES PAILLASSES

### DE LAVERIE & VIDOIRS

#### Les paillasse de laverie à double cuve en bandeau :

Ces paillasse destinées aux salles de préparation peuvent être centrales ou combinées à des tables sèches ou rangements pour constituer des linéaires muraux.

Une partie de la paillasse est constituée par une cuve double en grès de grande profondeur dite "en bandeau" parce qu'elle dépasse de la façade de la paillasse (environ 50 mm).

La double-cuve mesure 920 x 560 x 205 mm.

Sous la cuve un carter de protection masque les attentes et évacuations avec portes coulissantes en standard pour libérer les circulations (ou battantes sur demande sans surcout) .

Le reste de la paillasse revêtu de Grés Emailé ou de Verre Emailé est équipé d'un placard à portes coulissantes ou battantes avec étagères réglables en hauteurs .

Toutes les paillasses de laverie sont livrées en 2 éléments (l'un humide, l'autre sec) à associer sur site.

Autres revêtements sur devis.

#### PROFONDEUR 600 MM + PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)		Référence	Prix TTC
Paillasse de Laverie Grès Cuve en Bandeau	1800 x 600 x 900 mm	LP 6650	1 557 €
Paillasse de Laverie Verre Cuve en Bandeau	1800 x 600 x 900 mm	LP 6657	1 754 €
Paillasse de Laverie Grès Cuve en Bandeau	1800 x 750 x 900 mm	LP 7650	1 692 €
Paillasse de Laverie Verre Cuve en Bandeau	1800 x 750 x 900 mm	LP 7657	1 857 €



## Les Paillasse de Laverie à Double-cuve Vulcathène

Ces paillasse destinées aux salles de préparation peuvent être centrales ou combinées à des tables sèches ou rangements pour constituer des linéaires muraux.

Elles sont revêtues de Grès Emailé ou de Verre Emailé.

Une partie de la paillasse reçoit une double-cuve vulcathène et un mélangeur eau chaude / eau froide orientable.

Sous la cuve un carter de protection masque les attentes et évacuations avec portes battantes en standard ou coulissantes sur demande sans surcout. - Préciser "CL" après la référence.

Le reste de la paillasse est un placard avec étagères réglables en hauteurs.

Toutes les paillasse de laverie sont livrées en 2 éléments (l'un humide, l'autre sec) à associer sur site.

Deux largeurs (1800 ou 2400 mm) et deux profondeurs (600 ou 750 mm) au choix.

Autres revêtements sur devis.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse de Laverie Grés	1800 x 600 x 900 mm	LP 6630 1 570 €
Paillasse de Laverie Verre	1800 x 600 x 900 mm	LP 6637 1 645 €
Paillasse de Laverie Grés	2400 x 600 x 900 mm	LP 6640 1 680 €
Paillasse de Laverie Verre	2400 x 600 x 900 mm	LP 6647 1 798 €
Paillasse de Laverie Grés	1800 x 750 x 900 mm	LP 7630 1 680 €
Paillasse de Laverie Verre	1800 x 750 x 900 mm	LP 7637 1 765 €
Paillasse de Laverie Grés	2400 x 750 x 900 mm	LP 7640 1 890 €
Paillasse de Laverie Verre	2400 x 750 x 900 mm	LP 7647 1 967 €

### Avis d'expert...

Trespa TopLab et Varicor sont des Matériaux bien adaptés aux Laveries pour leur résistance aux produits les plus agressifs (Acides, Nitrate d'Argent, Colorants...), n'hésitez pas à nous demander un devis.

Des équipements électriques sur Dosseret peuvent être installés au dessus du placard...

## Le Vidoir sur Chaise LP 550

Les vidoirs sur chaises sont des points d'eau installés indifféremment dans les salles de préparation, les réserves, ou laboratoires de TP.

Ils sont réalisés avec une cuve dite "Faculté" de grandes dimensions 500 x 600 x 350 mm en grès avec trop plein et vidange.

La cuve est posée sur une chaise métallique en tube carré de 35 x 35 mm de section avec vérins de mise à niveau et platines de fixation au sol.

Un carrossage masque les canalisations.

Un caisson arrière porte en standard un Chandelier Eau Froide et peut en option être équipé d'un mélangeur eau chaude / eau froide.

Dimensions 500 x 750 x 900 mm.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Vidoir sur Chaise	500 x 750 x 900 mm	LP 550 926 €



## Les Paillasse de Pesée

Les paillasse de pesée Mobilab sont constituées d'une table en verre émailé en 750 mm de profondeur, autres revêtements sur devis.

La partie centrale de la table est extrudée pour laisser la place au plateau anti-vibratile.

Le module anti-vibratile est composé de plaques de marbre de forte épaisseur 60 mm maintenues à l'écartement par un cadre métallique boulonné dans la masse.

Le plateau porte balance positionné à l'alignement du plateau de la paillasse, repose sur les jambages granit isolés par des Spring Blocs (amortisseurs à ressorts à spires non jointives inclus dans un bloc caoutchouc).

Le poids de l'ensemble contribue avec ses amortisseurs à supprimer les vibrations.

Le plateau anti-vibratile mesure 600 x 450 mm.

Autres dimensions sur devis.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse de Pesée	1000 x 750 x 900 mm	LP 1057 1352 €
Paillasse de Pesée	1800 x 750 x 900 mm	LP 1857 1646 €



## LES ÉVIERS

### EN CÉRAMIQUE OU VARICOR SUR MEUBLES PLACARDS

Lycée "Blaise Pascal" - 93 Villemomble - Projet Réalisé en Partenariat avec le Conseil Régional d'Ile de France

Salle d'Enseignement Sanitaire et Social (Revêtement Verre Emailé),

Il s'agit d'une salle très polyvalente composée par association de Meubles Eviers, de Meubles de Cuisson et de Meubles de Rangement... Les bahuts revêtus de verre émaillé offrent de vastes plans de travail. Le verre est dans ce cas choisi, pour ses qualités d'hygiène de surface...

Tous les équipements électroménagers (voir notre chapitre "Équipement Général de Laboratoire") sont intégrés dans les meubles afin d'optimiser l'agencement...

Des Armoires double-corps de grande capacité servant de vaisseliers complètent ce projet... (Voir la rubrique "Rangement" de ce catalogue).


## Les Eviers Sur Meuble

Destinés aux salles de préparation et salles d'Enseignement Sanitaire et Social, les Eviers sur meuble peuvent être combinés à des meubles et équipements électro-ménagers en Ilots Centraux ou Linéaires Muraux. Ils sont proposés avec 1 ou 2 Cuves associées à 1 ou 2 Egouttoirs. Sous l'évier, un meuble de protection masque les attentes et évacuations. Il est équipé de 2 portes battantes ou coulissantes (en option) préciser "CL" après la référence.

Robinetterie à choisir au chapitre dédié.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>Évier sur meuble - 1 cuve</b>		
Évier 1 Cuve - 1 Egouttoir 1000 x 600 x 900 mm	EVI 4560	850 €
Évier 1 Cuve - 2 Egouttoirs 1200 x 600 x 900 mm	EVI 3663	1048 €
<b>Évier sur meuble - 2 cuves</b>		
Évier 2 Cuves - 1 Egouttoir 1200 x 600 x 900 mm	EVI 4550	880 €
Évier 2 Cuves - 2 Egouttoirs 1400 x 600 x 900 mm	EVI 3182	1172 €

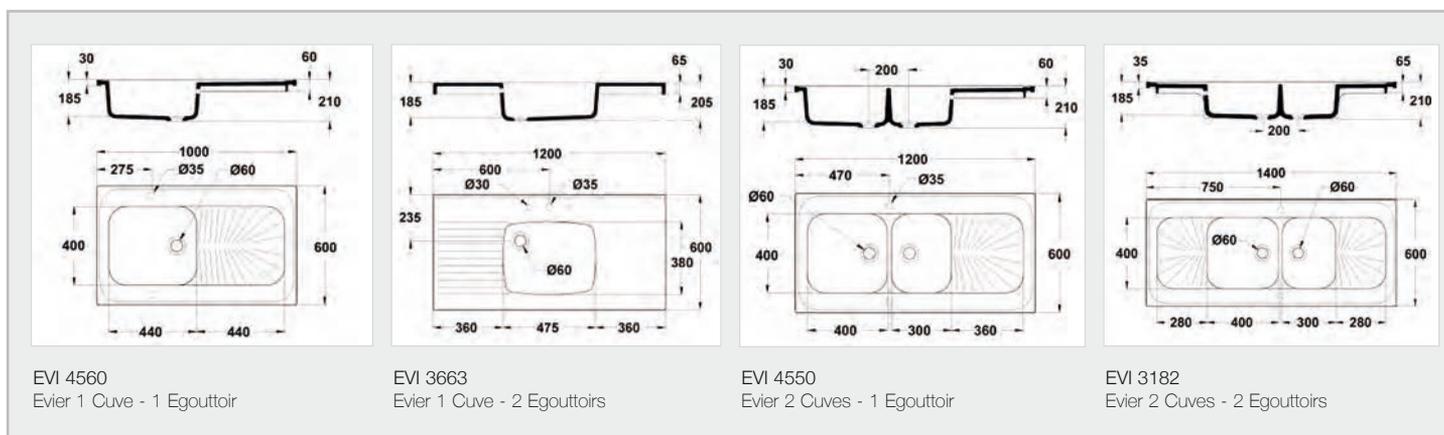

## Les Eviers Varicor Sur Meuble

Destinés aux salles de préparation et salles d'Enseignement Sanitaire et Social, les Eviers Varicor sur meuble peuvent être combinés à des meubles et équipements électro-ménagers en Ilots Centraux ou Linéaires Muraux.

Ils sont proposés avec 1 ou 2 Cuves associées à 1 ou 2 Egouttoirs. Sous l'évier, un meuble de protection masque les attentes et évacuations. Il est équipé de 2 portes battantes ou coulissantes (en option) préciser "CL" après la référence.

Robinetterie à choisir au chapitre dédié.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>Évier Varicor sur meuble - 1 cuve</b>		
Évier 1 Cuve - 1 Egouttoir 1000 x 600 x 900 mm	VARI 4560	1028 €
Évier 1 Cuve - 2 Egouttoirs 1200 x 600 x 900 mm	VARI 3663	1231 €
<b>Évier Varicor sur meuble - 2 cuves</b>		
Évier 2 Cuves - 1 Egouttoir 1200 x 600 x 900 mm	VARI 4550	1238 €
Évier 2 Cuves - 2 Egouttoirs 1400 x 600 x 900 mm	VARI 3182	1528 €



College Arthur Chaussy - 77 Brie-Comte-Robert

La cuisine pédagogique est composée de 4 postes de travail, équipés en matériel performant : 2 tables de cuisson vitrocéramiques, 2 tables de cuisson électriques et 4 fours à air pulsé.

Avec de grandes surfaces de travail, la cuisine permet de travailler en binômes et d'avoir une vue globale des élèves.



## LES SALLES D'ENSEIGNEMENT

### SANITAIRE & SOCIAL

La Salle d'Enseignement Sanitaire et Social est la combinaison réussie de Plans de Travail, de Meubles de Rangement et d'Equipements Electro-ménager, par association ou intégration...

L'Expérience acquise dans la confection des mobiliers de laboratoire est mise à profit pour constituer les ensembles adaptés aux besoins spécifiques de cet enseignement.

Ce catalogue contient l'ensemble des équipements nécessaires à la réalisation des implantations de CSS. On retrouve au chapitre "Paillasse" et au chapitres "Rangements de Laboratoires" les meubles à associer aux appareils électroménagers proposés au chapitre "Equipements Meublants".

Certaines intégrations justifient des adaptations réalisées par notre département technique: Fours intégrés, Plaques de Cuisson encastrées...



Lycée Darius Milhaud - 94 Le Kremlin-Bicêtre

Pôle « Services à l'utilisateur » : Dans cette configuration, la cuisine pédagogique est constituée de 8 postes de travail. Nous avons créé spécialement pour cet établissement une armoire triple corps pour le rangement des ustensiles de cuisine. Une zone buanderie a été créée avec lave linge et sèche linge.

## Casseroliers, vaisseliers, équipements de cuisine...

...vous satisfaire avec du mobilier de rangement qui vous apporte l'esthétique, le confort et l'ergonomie vous garantissant un vrai plaisir d'enseigner au quotidien.

Avec plus de 40 ans d'existence, MOBILAB vous offre des produits et services de qualité, deux piliers de notre réussite et de la satisfaction de nos clients !





## GAMME INOX

POUR VOS CUISINES OU LABORATOIRES...



Vous recherchez une table inox pour l'équipement d'une cuisine ou d'un laboratoire ?

Mobilab propose une gamme complète en inox pour les professionnels.

Nos tables existent dans de nombreuses dimensions, se déclinent avec ou sans dossier, sur pieds (verin ABS), roulettes (Polyamide / Inox) ou bien encore suspendue (sur projet). Selon l'usage que vous leur destinez, nous concevons des tables répondant à vos besoins : table avec bac de plonge, table de dressage, de déboitage, fixe ou de découpe...

Nous proposons aussi tous les accessoires nécessaires dans l'univers des espaces Inox: Lave-mains, Dessertes, Rayonnages...etc

La collection présentée dans ce catalogue n'est qu'une sélection... D'autres modèles et d'autres dimensions peuvent être proposés sur devis.

## LAVE MAINS INOX & ACCESSOIRES DE LAVE MAINS



### Lave main à commande fémorale 460 x 380 x 524 mm - 9 Kg

Lave-mains à commande fémorale cuve rectangulaire  
Cuve emboutie - Forme rectangulaire - Lave avant bras  
Avec dossier incliné à 30°, flexible de liaison, siphon, bec col de cygne, raccord EC/EF en 1/2"  
Clapet anti-retour  
Prémélangeur eau chaude / froide  
Robinet poussoir réglé en usine à : 6 l/min  
Faible consommation d'eau, faites rimer écologie avec économies !

#### Les plus :

Ergonomie : Panneau fémoral adapté à toute taille d'utilisateur  
Hygiène : Dossier incliné à 30°, pas de rétention liquide  
Sécurité : Adapté à la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) avec tempo stop agréé SRIPS

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Lave main à commande fémorale	460 x 380 x 524 mm - 9 Kg INOC 3000	380 €

### Sèche mains électrique automatique 278 x 210 x 246 - 6.7 Kg

Construction : en acier épaisseur 2 mm  
Finition : époxy blanc  
Puissance : 2,450 kW - 220 V

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Sèche mains électrique automatique	278 x 210 x 246 - 6.7 Kg INOC 3010	626 €



### Distributeur de Papier en Feuilles 265 x 110 x 340 mm

Distributeur d'essuie-mains papier pliés :  
Capot ABS blanc  
Châssis ABS gris  
Capacité : 400 à 600 essuie-mains  
Visualisation du niveau de papier  
4 points de fixation  
Fermeture sécurisée avec clé  
Ergonomie : changement facile des consommables

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Distributeur de Papier en Feuilles	265 x 110 x 340 mm INOC 3020	44 €

### Distributeur de Papier en Rouleau 220 x 220 x 310 mm

Capot ABS transparent fumé - Châssis ABS gris  
Capacité : 450 formats (bobine Ø 205 mm)  
4 points de fixation  
Fermeture sécurisée avec clé

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Distributeur de Papier en Rouleau	220 x 220 x 310 mm INOC 3022	44 €



LMDESS5



### Distributeur de savon inox 850 ml, 105 x 115 x 182 mm

Inox brillant AISI 304L  
Système de fixation renforcé  
Verrouillage du capot à clé  
Voyant de niveau translucide  
Hygiène : appareil tout inox (même la pompe)

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Distributeur de savon inox	850 ml, 105 x 115 x 182 mm INOC 3030	91 €

### Support de Sac Poubelle à Pédale - Sacs jusqu'à 100 L

Fabrication : inox AISI 304L  
Ouverture : par pédale  
2 roulettes Ø 60 mm à l'arrière  
Couvercle : PVC Ø 345 mm (gris, bleu, jaune, vert, rouge au choix)

#### Les plus :

Ergonomie : Sangle caoutchouc très facilement amovible  
Hygiène : Inox AISI 304 (18.10)  
Tri selectif (possible, avec capots de couleurs sur devis)

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Support de Sac Poubelle à Pédale	Sacs jusqu'à 100 L INOC 3035	369 €



TRI SÉLECTIF

CPB10A

CPB07A

## LES TABLES INOX



Table à dossieret - largeur 600



Table centrale - largeur 600

### Table inox sur vérins : Largeur 600 ou 700 mm / Centrale ou à dossieret

Dessus inox AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép.19 mm  
Dossieret plat 100 x 20 mm (arrière non fermé)  
Deux Largeurs au choix 700 ou 600 mm  
Angles droits  
Bandeau tout inox  
Coins pliés  
Bords droits tombés de 40 mm  
Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm, démontables  
Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté  
Vérins ABS réglables sur 30 mm  
Charge totale admise = 150 kg (répartis)

#### Les plus :

Sécurité : Bords tombés 3 plis qui évitent tout dépôt et les contaminations cachées, et préviennent tout risque de coupure  
Plan de travail tout inox = longévité accrue  
Bandeau tout inox = nettoyabilité et longévité  
Étagère basse en option type ETG - Profondeur 475 mm



Table à dossieret - largeur 700



Table centrale - largeur 700

### TABLE INOX SUR VÉRINS - LARGEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	TABLES CENTRALES		TABLES À DOSSERET	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Table Inox 1000 x 600 x 900 mm	INOC 6010	506 €	INOC 6110	554 €
Table Inox 1200 x 600 x 900 mm	INOC 6012	540 €	INOC 6112	591 €
Table Inox 1400 x 600 x 900 mm	INOC 6014	581 €	INOC 6114	637 €
Table Inox 1600 x 600 x 900 mm	INOC 6016	628 €	INOC 6116	678 €
Table Inox 1800 x 600 x 900 mm	INOC 6018	672 €	INOC 6118	738 €
Table Inox 2000 x 600 x 900 mm	INOC 6020	707 €	INOC 6120	771 €

### TABLE INOX SUR VÉRINS - LARGEUR 700 MM

Descriptif (L x p x H mm)	TABLES CENTRALES		TABLES À DOSSERET	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Table Inox 1000 x 700 x 900 mm	INOC 7010	506 €	INOC 7110	558 €
Table Inox 1200 x 700 x 900 mm	INOC 7012	541 €	INOC 7112	596 €
Table Inox 1400 x 700 x 900 mm	INOC 7014	581 €	INOC 7114	628 €
Table Inox 1600 x 700 x 900 mm	INOC 7016	632 €	INOC 7116	690 €
Table Inox 1800 x 700 x 900 mm	INOC 7018	674 €	INOC 7118	746 €
Table Inox 2000 x 700 x 900 mm	INOC 7020	719 €	INOC 7120	777 €

### OPTIONS : ÉTAGÈRES

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Etagère Basse Optionnelle 1000 mm	INOE 1000	134 €
Etagère Basse Optionnelle 1200 mm	INOE 1200	143 €
Etagère Basse Optionnelle 1400 mm	INOE 1400	149 €
Etagère Basse Optionnelle 1600 mm	INOE 1600	169 €
Etagère Basse Optionnelle 1800 mm	INOE 1800	186 €
Etagère Basse Optionnelle 2000 mm	INOE 2000	204 €

### OPTIONS : ROULETTES

Adaptation en Usine à la Commande  
2 avec frein + 2 sans frein  
Charge Totale répartie 100 kg

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Jeu de Roulette 125 mm	INOR 135	218 €

## Table Inox 1 Cuve dite "Table du Chef"

Tout inox AISI 304L  
 Cuve : inox, soudée, dimensions (L x l x P) : 400 x 400 x 250 mm  
 Livrées avec bonde et tube surverse  
 Largeur 700 mm  
 Dossier plat 100 x 20 mm (arrière non fermé)  
 Angles droit  
 Coins soudés  
 Bandeau tout inox  
 Bords droits tombés de 40 mm  
 Dessus tout inox AISI 304L renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge ép. 19 mm  
 Pieds en tube inox Ø 38 mm démontables  
 Vérins ABS réglables sur 30 mm  
 Étagère basse en option type ETG - Profondeur 475 mm

Position de la cuve à préciser à la commande

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Table du Chef Inox 1 Cuve (à Droite ou à Gauche)	1200 x 700 x 900 mm INOC 7212	955 €
Table du Chef Inox 1 Cuve (à Droite ou à Gauche)	1400 x 700 x 900 mm INOC 7214	1 006 €
Table du Chef Inox 1 Cuve (à Droite ou à Gauche)	1600 x 700 x 900 mm INOC 7216	1 095 €

### OPTIONS

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Tiroir Optionnel pour Table de Profondeur 600 mm	370 x 467 x 127 mm INOT 6006	305 €
Tiroir Optionnel pour Table de Profondeur 700 mm	370 x 567 x 127 mm INOT 7010	313 €
Bloc 3 Tiroirs pour Tables de Profondeur 700 mm	420 x 583 x 556 mm INOT 7310	1 036 €



**Bloc 3 tiroirs optionnel**  
 Pour tables démontables de profondeur 700 uniquement  
 Poignées intégrées  
 Fourni avec 3 bacs gastros GN1/1 profondeur 100 mm, en polycarbonate



**Tiroir optionnel**  
 + 1 bac inox GN2/3 hauteur 100 mm  
 Sur glissières télescopiques inox  
 Charge maxi par tiroir : 5 kg en utilisation

## Les Plonges



Largeur 700 mm ou 600 mm  
 Dessus : inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement  
 Bords droits tombés de 40 mm  
 Angles droits  
 Egouttoir : cannelé  
 Livraison avec bonde et tube surverse simple  
 Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)  
 Dossier plat (ht 100 x l. 20 mm) arrière non fermé  
 Bandeau tout inox

#### Cuve de :

- 500 x 500 x 300 pour Tables en 700 mm  
 - 500 x 400 x 300 pour Tables en 600 mm  
 Étagère basse en option type ETG  
 Coins soudés  
 Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm démontables  
 Vérins ABS réglables sur 30 mm

#### Les plus :

Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté  
 Livraison démontée  
 Étagères basses en inox AISI 304L 15/10 ème (en option)  
 A préciser Egouttoir à Droite ou à Gauche

### ACCESSOIRES POUR PLONGES ET TABLES DE CHEF

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Douchette Mélangeuse (sans robinet de puisage) H = 1200 mm	INOC 5030	400 €
Douchette Mélangeuse Avec robinet de puisage H = 1200 mm	INOC 5031	545 €
Robinet Mélangeur Monotrou Saillie 300 mm / Hauteur 300 mm	INOC 5035	128 €

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Plonge 1 Cuve + 1 Egouttoir Inox	1200 x 600 x 900 mm INOP 6112	919 €
Plonge 1 Cuve + 1 Egouttoir Inox	1400 x 600 x 900 mm INOP 6114	937 €
Plonge 2 Cuves + 1 Egouttoir Inox	1800 x 600 x 900 mm INOP 6118	1 210 €
Plonge 1 Cuve + 1 Egouttoir Inox	1200 x 700 x 900 mm INOP 7212	830 €
Plonge 2 Cuves + 1 Egouttoir Inox	1600 x 700 x 900 mm INOP 7214	1 065 €
Plonge 2 Cuves + 1 Egouttoir Inox	1800 x 700 x 900 mm INOP 7218	1 158 €



Robinet Mélangeur Monotrou  
 Modèle Economique



#### Douchette Mélangeuse

Fixation sur table + équerre de fixation murale  
 Acier inox AISI 304L  
 Mélangeur avec clapets anti-retour selon norme européenne EN13959  
 Ressort de sécurité  
 Flexible l. 1200 mm en tresse acier inox AISI 304L + EPDM standard, dn 12.5  
 Débit en litre par minute pour une pression de 3/4 bars: 17 l/min  
 Hauteur totale: 1200 mm  
 Manettes ergonomiques avec tête à clapet 1/4 de tour  
 Robinetteries EC/EF à tête céramique haute qualité  
 Tête de douchette en inox intérieur selon normes européennes CE, ROHS et ACS

## LES SOLUTIONS DE RANGEMENTS EN INOX

### Les Bahuts Tout Inox



Largeur 600 ou 700 mm  
 Tout inox AISI 304L  
 Dessus à bords droits tombés de 40 mm, renforcé par un panneau collé en mélaminé hydrofuge  
 2 portes coulissantes suspendues  
 Poignées intégrées  
 Sans serrure  
 Dessus central ou adossé  
 1 étagère intérieure réglable en hauteur  
 Charge maxi : 50 kg répartis par niveau  
 Sur pieds composite Ø 40 hauteur 155 mm, réglables sur +70 mm (hauteur maxi 220)  
 Livrés avec le dessus monté  
 Les plus :  
 Hygiène : Portes coulissantes suspendues sans rail inférieur pour nettoyer d'un coup d'éponge

#### OPTIONS POUR BAHUTS

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Dossieret Inox Optionnel pour Bahut 1000 mm	INOD 1000	103 €
Dossieret Inox Optionnel pour Bahut 1200 mm	INOD 1200	109 €

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Bahuts Tout Inox à Portes Coulissantes 1000 x 600 x 900 mm	INOBS 6010	1 209 €
Bahuts Tout Inox à Portes Coulissantes 1200 x 600 x 900 mm	INOBS 6012	1 315 €
Bahuts Tout Inox à Portes Coulissantes 1000 x 700 x 900 mm	INOBS 7010	1 252 €
Bahuts Tout Inox à Portes Coulissantes 1200 x 700 x 900 mm	INOBS 7012	1 421 €



### Les Bahuts Mixtes à Portes et Tiroirs

Meuble 2 portes coulissantes :  
 Tout inox AISI 304L  
 2 portes coulissantes suspendues  
 Poignées intégrées  
 1 étagère intérieure réglable en hauteur  
 Pieds composite noir hauteur 155 mm (+70 mm de réglage)  
 Charge maxi : 50 kg répartis par niveau  
 Sans serrure  
 Bloc 3 tiroirs gastros GN1/1 :  
 Tout inox AISI 304L  
 Poignées intégrées  
 Pouvant recevoir des bacs gastros GN1/1 (non fournis)  
 Sur glissières inox

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Bahut 2 portes coulissantes + 3 Tiroirs gastros GN1/1 - 1500 x 700 x 900 mm	INOM 7315	2 875 €
Bahut 2 portes coulissantes + 3 Tiroirs gastros GN1/1 - 2000 x 700 x 900 mm	INOM 7320	3 277 €

### Les Meubles Suspendus



Hauteur 600 mm  
 Inox AISI 304L  
 2 portes coulissantes suspendues  
 1 étagère réglable en hauteur  
 Livrés montés avec 2 pattes de fixation murale  
 Charge maxi : 50 kg répartis par niveau  
 Sans serrure  
 Toit plat

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble à Suspendre Tout Inox Portes Coulissantes 1000 x 407 x 600 mm	INOS 1110	748 €
Meuble à Suspendre Tout Inox Portes Coulissantes 1200 x 407 x 600 mm	INOS 1112	818 €



## Les Kits Rayonnages

Structure portante en profilé aluminium à haute résistance et anodisé à 20 microns  
 4 niveaux, espace inter-niveaux : 395 mm  
 Clayettes : amovibles en polyéthylène, à haute résistance et certifié atoxique  
 Charge maxi par étagère : 240 kg

**Les plus :**

Ultra économique  
 Facile à installer  
 Facile à nettoyer  
 Supporte de lourdes charges

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Kit Rayonnage de 995 x 375 x 1700 mm	INOR 341	362 €

## Armoire 2 Portes Battantes 1200 x 600 x 1935 mm

Tout inox AISI 304L  
 Structure renforcée de série  
 Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire  
 Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable  
 1 serrure et 1 poignée par porte  
 Serrure à 2 points sur chaque porte  
 Aérations hautes et basses  
 Charge par étagère : 50 kg répartis  
 Pieds : ABS noir Ø 40 mm, réglables sur 70 mm  
 Hauteur de façade : 1810 mm  
 Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets  
 Finition soudée  
 Double plancher assurant une stabilité optimisée

**Les plus :**

Ergonomie : 1 serrure et 1 poignée par porte  
 Hygiène : Dessus et plafond lisses et inclinés à 15°  
 Sécurité : Portes battantes encastrées sous le toit = sécurité supplémentaire à la fermeture à clé - Plis écrasés sur les étagères et triple pli sur les côtés



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Armoire 2 Portes Battantes 1200 x 600 x 1935 mm	INOA 1012	2323 €



## Armoire 2 Portes Coulissantes 1200 x 600 x 1935 mm

Tout inox AISI 304L  
 Dessus : incliné à 15°  
 2 portes coulissantes doublées sans rail inférieur  
 Hauteur façade : 1772 mm  
 Serrure + poignées  
 4 pieds composite noir Ø 40, hauteur 155 mm, réglables sur 70 mm (6 pieds à partir de 1600 mm)  
 3 étagères (largeur 506 mm) dont 2 réglables en hauteur  
 Charge par niveau : 50 kg répartis

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Armoire 2 Portes Coulissantes 1200 x 600 x 1935 mm	INOA 2012	2721 €

## Armoire Entretien (ou à Balais) 1 Porte 600 x 475 x 1935 mm

Tout inox AISI 304L  
 Structure renforcée de série  
 Portes battantes doublées pour une meilleure stabilité et rigidité de l'armoire  
 Portes battantes renforcées sur 3 charnières en acier inoxydable  
 1 serrure et 1 poignée par porte  
 Serrure à 2 points sur chaque porte  
 Aérations hautes et basses  
 Charge par étagère : 50 kg répartis  
 Pieds : ABS noir Ø 40 mm, réglables sur 70 mm  
 Disponibles sur roulettes (sauf modèle 1 porte)  
 Hauteur de façade : 1810 mm

Dessus incliné à 15° anti-dépose d'objets  
 Finition soudée  
 Double plancher assurant une stabilité optimisée

**Les plus :**

1 cloison verticale s'arrêtant à 300 mm du bas et 3 petites étagères dont 1 réglable en hauteur  
 Ergonomie : 1 serrure et 1 poignée par porte  
 Hygiène : Dessus et plafond lisses et inclinés à 15°  
 Sécurité : Portes battantes encastrées sous le toit = sécurité supplémentaire à la fermeture à clé - Plis écrasés sur les étagères et triple pli sur les côtés



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Armoire Entretien (ou à Balais) 1 Porte 600 x 475 x 1935 mm	INOA 1006	1415 €

Lycee Polyvalent Liberté - 93 Romainville

Nous avons agencé et créé un pôle technique de soins et d'ergonomie. Sur le même espace se trouvent la zone enfant, la zone adulte, l'espace commun et zone de lancement de cours. La zone enfant comprend un espace repos enfant avec lits, 6 postes de change équipés avec baignoire, douchette, placard, poubelle.



## LES PAILLASSES DE PUÉRICULTURE

### CRÈCHES & NÉONATOLOGIE

BIOLAB MOBILAB partenaires de votre créativité...

Nous vous accompagnons dans tous vos projets d'aménagement, du début à la fin.

De l'audit de vos besoins, à la conception de votre projet personnalisé, du suivi de la production dans notre usine de Crosne au sud de Paris, jusqu'à l'installation sur site.

Nous sommes garants de la qualité, de l'esthétique et de la fonctionnalité de tous nos meubles.



## LES PAILLASSES DE PUÉRICULTURE, CRÈCHES ET NÉONATOLOGIE



Le plateau est réalisé en stratifié de forte épaisseur 30 mm. Le plateau est ceinturé par un chant PVC rigide de forte épaisseur.



La paillasse est livrée avec douche et bouchon

Hauteur des Paillasse normalisée à 900 mm, adaptée à la station debout.  
Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc.  
Course de 50 mm



Une baignoire moulée est encastrée à l'extrémité droite du plateau. Les joints silicones assurent une parfaite étanchéité. Elle est équipée d'un mitigeur avec douche montée sur flexible. Un coussin à langer est posé sur la partie libre du plateau.



Le plateau est posé sur 2 meubles de type placard à portes battantes l'un réservé aux rangements l'autre est un espace de protection des fluides au droit de la baignoire. Une poubelle est fixée sur une des portes.

Paillasse Economique de Puériculture  
Ces paillasse sont toujours proposées en profondeur 750 mm et en trois largeurs 1500 mm, 1800 mm ou 2400 mm  
Modèle présenté : "Paillasse de Puériculture de dimensions 2400 x 750 x 900 mm"  
Autres dimensions, et tiroirs sur devis.

**Pensez à l'Installation !**  
Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.



Coloris des Meubles et Tapis  
demander notre palette



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Puériculture 1500 x 750 x 900 mm	SPE 9153	1570 €
Paillasse Puériculture 1800 x 750 x 900 mm	SPE 9183	1676 €
Paillasse Puériculture 2400 x 750 x 900 mm	SPE 9193	2497 €
Tapis de Change Optionnel 50 x 70 mm	SPE 120	69 €

# MOBILIER DE LABORATOIRE



Lycée Darius Milhaud - 94 Le Kremlin-Bicêtre  
Les élèves travaillent en îlots.  
La salle se compose d'une zone puériculture et d'une zone soins à la personne.



## LES PAILLASSES DE PUERICULTURE A PLATEAU MONOCOQUE

Douchette chromée pour la baignoire et le lave-mains.  
Cartouche à disques céramique.



Meuble en panneaux surfacés mélaminé (PPSM) de 19 mm (coloris selon palette), Hydrofuge (CTBH), avec 1 tiroir sous le change et Placards à Portes sur charnières invisibles réglables. Chants PVC et Poignées Métalliques

*Paillasse de Puériculture Gamme Bambino - Modèle ONDINE  
"Paillasse de Puériculture de dimensions 1350 x 670 x 900 mm"  
Sur Placard Multirangement*

Monocoque Acrylique comprenant en un moulage unique: un espace change, une baignoire, une tablette à produits, un lave-mains, poubelle amovible avec couvercle. Plateau avec Baignoire à Droite ou à Gauche (à préciser suivant le projet)

Tapis de change avec housse cousue, M2, coloris au choix



*Paillasse de Puériculture Modèle BETAMAT  
"Paillasse de Puériculture de dimensions 1010 x 70 x 900 mm"  
Sur Placard Multirangement*



Tapis de change avec housse cousue, M2, coloris au choix

Monocoque Polyester avec gelcoat de qualité sanitaire comprenant en un moulage unique: un espace change, une baignoire, une tablette à produits, deux portes, un tiroir, deux casiers de rangement, poubelle amovible avec couvercle. Plateau avec Baignoire à Droite ou à Gauche (à préciser suivant le projet)

*D'autres équipements du meuble sous baignoire que ceux sélectionnés en catalogue peuvent être étudiés sur devis...  
(Attention les photos sont présentées avec des configurations spécifiques)*

Coloris des Meubles et Tapis  
demander notre palette



### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse Puériculture Modèle Ondine 1350 x 670 x 900 mm	SPE 1350	5208 €
Paillasse Puériculture Modèle Betamat 1010 x 670 x 900 mm	SPE 1010	4212 €
Bloc 3 tiroirs Optionnel	SPE 130	492 €



## LES PAILLASSES

### D'INFIRMERIE

#### Hygiénique...

L'Hygiène est une nécessité absolue, dans le domaine de la santé, dans les laboratoires pharmaceutiques ou alimentaires...

Varicor permet de répondre aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène et de fonctionnalité tout en conservant ses qualités esthétiques. La forte densité, l'homogénéité, la non porosité et l'assemblage d'éléments sans joint apparent, ne laissent aucune chance aux germes et bactéries... Les micro-organismes n'adhèrent pas à la surface, ce qui limite la formation de biofilm...

L'Eau de Javel permet de désinfecter le Varicor de façon très efficace (réduction de la population bactérienne à 99,99%).



## LES PAILLASSES D'INFIRMERIE

Le plateau est réalisé en Varicor de forte épaisseur 30 mm.

Un Façonnage Innovant...  
Le matériau est traité sans joint ni jonction visible et s'harmonise parfaitement avec d'autres matériaux...

Un Matériau Minéral haut de gamme...  
Varicor, est un matériau minéral de consistance absolument homogène, coloré dans la masse...  
Il se compose à 2/3, d'une charge minérale naturelle (hydroxyde d'aluminium), et à 1/3, d'une résine à base de polyester.




Le plateau est posé sur des meubles, un meuble équipé de 4 tiroirs, deux meubles de type placard à portes battantes l'un réservé aux rangements l'autre est un espace de protection des fluides sous la cuve. Une poubelle est fixée sur une des portes.  
Le Modèle en 1500 mm est équipé d'un placard sous évier et d'un meuble à tiroirs...  
Les Modèles en 1800 et 2400 mm sont équipés d'un placard sous évier, un second placard et un meuble à tiroirs...

Une cuve large de type évier avec égouttoirs est intégrée directement dans le plateau...  
Elle est équipée d'un mitigeur avec douchette montée sur flexible.

### Solide et Résistant...

Le varicor résiste à l'eau, à l'humidité et à presque tous les produits chimiques...  
Le varicor résiste parfaitement aux chocs et est difficilement inflammable.  
Les éventuelles traces d'usure et accros se réparent facilement.

Hauteur des Paillasses normalisée à 900 mm, adaptée à la station debout.  
Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

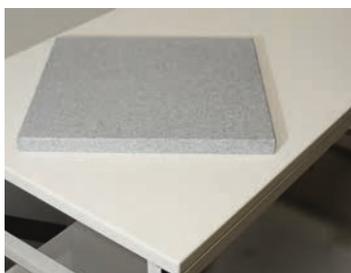

### Un Choix de Coloris de Surfaces...

Toutes les teintes Varicor se distinguent par leur aspect satiné mat.  
Des traces et particulièrement les rayures sont plus apparentes sur les matériaux foncés...  
C'est pour cela que notre choix s'est porté sur 2 coloris peu sensibles aux traces: Gris Granit ou Blanc Satin...

En option, un dossier, des équipements électriques peuvent être installés sur ces tables...  
Les Robinetteries spéciales sont proposées sur devis, commande à distance, commande au coude ou à cellule optique...

Coloris des Meubles  
demander notre palette



### Pensez à l'Installation !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.  
Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Paillasse d'infirmierie	1500 x 750 x 900 mm	SPE 8715 1 949 €
Paillasse d'infirmierie	1800 x 750 x 900 mm	SPE 8718 2 360 €
Paillasse d'infirmierie *	2400 x 750 x 900 mm	SPE 8724 3 278 €

\* Au delà de 1800 mm, les tables sont formées de deux modules à juxtaposer.



## DES COMPLÉMENTS ASTUCIEUX

DOSSERETS, TABLETTES ABATTANTES, REHAUSSES...

### Réhausse Murale ou Centrale

La réhausse est réalisée en mélaminé de 19 mm sur structure métallique Mobilab.

Elle peut être posée sur des combinaisons de Paillasse et de Bahuts en îlots centraux ou en linéaires muraux, avec une fixation par le plateau. La tablette de dépose est légèrement en dépassement, un bandeau ceinturant sous tablette porte les prises électriques et masque les câblages.

Elle mesure 300 mm de profondeur pour une hauteur de 600 mm au-dessus du plateau. La console repose sur quatre potelets, elle est proposée en modules de 1200, 1500 ou 1800 mm de longueur juxtaposables à volonté... (Dimensions spéciales sur projets).

Des blocs de prises optionnels peuvent être fixés de part et d'autre de la réhausse. Les câblages circulant sous la tablette.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Réhausse 1200 x 300 x 600 mm	MOB 3018	430 €
Réhausse 1500 x 300 x 600 mm	MOB 3019	517 €
Réhausse 1800 x 300 x 600 mm	MOB 3020	626 €



Ils sont adaptables sur mesures en fonction de vos projets...

### Les caissons de fluides : MOB 3022

Ce sont des éléments de coffrage qui permettent de faire circuler les fluides et de porter les accessoires situés en fond de paillasse. Ils peuvent aussi constituer une solution d'habillage des obstacles muraux (tuyaux, piliers...), en standard ils ont une hauteur de 130 mm et une profondeur de 150 mm.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Caisson de fluides le ml	MOB 3022	141 €

### Les Dosserets Anti-chutes : MOB 3002

Les dosserets sont proposés au mètre linéaire. Dosseret en mélaminé de 19 mm d'épaisseur et de hauteur 100 mm (en dépassement du plateau de 70 mm). Se fixe sur la structure le plateau des paillasses Mobilab. La faible hauteur limite le risque de dissimulation des élèves et laisse peu d'espace aux tags tout en empêchant la chute des objets.



Descriptif	Référence	Prix TTC
Dosseret anti-chutes le ml	MOB 3002	30 €

### Les Dosserets Anti-projections : MOB 3007

Le mètre linéaire  
Paroi en verre sécurit trempé de 8 mm d'épaisseur, avec arêtes rabattues et angles arrondis. Se fixe sur la structure métallique des tables Mobilab, à l'arrière d'une paillasse ou en sandwich entre 2 paillasses placées face à face. Cette protection est particulièrement demandée dans les salles de chimie pour parer aux projections de produits ou de flammèches. La Hauteur de ces parois est fixée en standard à 565 mm pour dépasser de 500 mm du plateau. (Sur devis, les parois peuvent être équipées de découpes et passe-cables...)

Descriptif	Référence	Prix TTC
Dosseret anti-projections le ml	MOB 3007	227 €



### Les Tablettes Abattantes

Proposées en 2 profondeurs 600 mm ou 750 mm pour s'adapter sur les différents modèles de paillasses Mobilab. Ces tablettes permettent de prolonger les paillasses pour un usage d'appoint. Réalisées en mélaminé de 19 mm d'épaisseur, elles mesurent 500 mm de large. Un dispositif de Charnières Consoles Ekmatic permet de rabattre la tablette ou de la maintenir horizontale. Ces charnières fixées sur les piétements de nos paillasses, justifient une adaptation particulière pour être fixées sur des meubles d'origine différente...

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tablette Abattante profondeur 600 mm	MOB 3003	145 €
Tablette Abattante profondeur 750 mm	MOB 3013	174 €

# LES CUVES DE LABORATOIRE ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

- Un Choix de Cuves en Vulcathène Polysinc ou Sanisérap ou en Grés Porcher
- Les Accessoires Nécessaires à leur Mise en Oeuvre

Le Vulcathène est un polypropylène à haute densité.

Il présente d'excellentes qualités de résistance mécanique, une très bonne tenue à température élevée, et est pratiquement insensible à la corrosion.

Le vulcathène obéit aux règlements de sécurité relatifs à la protection des bâtiments contre l'incendie (art CO 24 du décret des immeubles recevant du public).

## LES CUVES EN VULCATHÈNE - POLYSINC



Cuve Vulcathène 460 x 460 mm - Polysinc  
Profondeur Utile 300 mm.  
Dimensions Utiles 400 x 400 mm  
Avec trop plein et Bonde surmoulée  
Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.  
Chainette (optionnelle)



Cuve Vulcathène 350 x 350 mm - Polysinc  
Profondeur Utile 200 mm.  
Dimensions Utiles 300 x 300 mm  
Bonde surmoulée  
Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.

Cuve Vulcathène 560 x 460 mm - Polysinc  
Profondeur Utile 300 mm.  
Dimensions Utiles 500 x 400 mm  
Avec trop plein et Bonde surmoulée.  
Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.  
Chainette (optionnelle)



Cuve Vulcathène 300 x 150 mm - Polysinc  
Profondeur Utile 150 mm.  
Dimensions Utiles 250 x 100 mm  
Bonde surmoulée  
Bouchon et Grille sont fournis avec la cuve.  
Chainette (optionnelle)

Siphon - Polysinc (Non Photographié)  
Garde d'eau normalisée de 50 à 130 mm  
Diamètre extérieur 40 mm.  
Joint inclus

## LES CUVES EN VULCATHÈNE - SANISÉRÁP



Cuve Vulcathène 300 x 150 mm  
Profondeur Utile 80 mm.  
Bonde surmoulée



Cuve Vulcathène 300 x 300 mm  
Profondeur Utile 190 mm.  
Bonde surmoulée



Cuve Vulcathène 450 x 450 mm  
Profondeur Utile 210 mm.  
Avec trop plein  
Bonde surmoulée



Cuve Vulcathène 600 x 450 mm  
Profondeur Utile 310 mm.  
Avec trop plein  
Bonde surmoulée



Siphon Prylex  
Garde d'eau normalisée à 50 mm  
Diamètre extérieur 40 mm.  
Prévoir un Joint américain vendu séparément



Joint Américain  
Complet  
Diamètre 40 mm  
1 Joint Américain est  
nécessaire avec chaque  
siphon...



Accessoires de Cuves Vulcathène  
à Commander Séparément  
- Grilles vendues par lot de 10  
- Bouchons vendus par lot de 10  
- Chaîne de 540 mm


## LES CUVES EN GRÈS DE REVIN



Cuve Grès 450 x 450 mm  
Profondeur Utile 250 mm. Avec trop plein  
Prévoir Un Vidage pour Cuve Simple



Cuve Grès 320 x 320 mm  
Profondeur Utile 195 mm.  
Bonde surmoulée  
Prévoir Un Vidage pour Cuve Simple

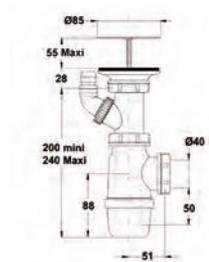

### Vidages pour Cuves Grès

Vidage pour Cuve simple ou Vidage pour Cuve Doubles...

Les Vidages pour Cuves Doubles sont destinés aux Laveries à Cuves en Bandeau et aux Eviers (Voir Chapitre Laveries et Equipements d'Enseignement Sanitaire et Social)



Cuve Vulcathène 610 x 450 mm  
Profondeur Utile 235 mm.  
Avec trop plein  
Prévoir Un Vidage pour Cuve Simple

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Cuves en Vulcathène Polysinc</b>		
Cuve Vulcathène 300 x 150 mm	AB 211	35 €
Cuve Vulcathène 300 x 300 mm	AB 212	102 €
Cuve Vulcathène 450 x 450 mm	AB 213	196 €
Cuve Vulcathène 600 x 450 mm	AB 214	210 €
<b>Les Cuves en Vulcathène SaniSérap</b>		
Cuve Vulcathène 300 x 150 mm	AB 111	35 €
Cuve Vulcathène 300 x 300 mm	AB 112	102 €
Cuve Vulcathène 450 x 450 mm	AB 113	196 €
Cuve Vulcathène 600 x 450 mm	AB 114	210 €
<b>Les Cuves en Grès</b>		
Cuve Grès 300 x 300 mm	AB 11	148 €
Cuve Grès 450 x 450 mm	AB 12	290 €
Cuve Grès 600 x 450 mm	AB 13	384 €
<b>Les Accessoires de Cuves</b>		
Siphon diamètre 40 mm - Polysinc	AV 205	26 €
Siphon Prylex diamètre 40 mm - Sanisérap	AV 105	26 €
Joint Américain - Sanisérap	AV 103	12 €
Lot de 10 Bouchons en Vulcathène (Beige / Noir)	AV 130	63 €
540 mm de Chainette (Beige / Noir)	AV 131	28 €
Lot de 10 Grilles en Vulcathène (Beige / Noir)	AV 132	21 €
Vidage pour Cuve Grès Simple	AV 350	28 €
Vidage pour Cuve Grès Double	AV 352	21 €

# LA ROBINETTERIE ANTISIPHONNAGE ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

- La Garantie d'un Grand Constructeur: PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Norme CE et Agrément Education Nationale NFD 18-201

### Plus d'Informations...

De nombreux modèles de robinetterie, commande au pied, commande au coude, commande optique... peuvent vous être proposés, n'hésitez pas à nous interroger.

Les Robinets anti-siphonnage sont des systèmes anti-aspiration à valves. Ces ensembles sont recommandés dans les laboratoires à hauts risques.


Descriptif	Saillie (A)	Référence	Prix TTC
<b>Chandelier Anti-siphonnage 1 Robinet EN</b>			
Chandelier Simple Fixe	150 mm	H 9072PT	230 €
Chandelier Simple Orientable	150 mm	H 9063PT	230 €
Chandelier Simple Orientable	200 mm	H 9163PT	236 €
Chandelier Simple Orientable	250 mm	H 9663PT	236 €
<b>Chandelier Anti-siphonnage 2 Robinets EN</b>			
Chandelier Double Fixe	150 mm	H 9069PT	299 €
Chandelier Double Fixe	200 mm	H 9169PT	299 €
Chandelier Double Fixe	250 mm	H 9669PT	305 €



### Chandelier Anti-aspiration à 1 robinet EN

proposé en 4 versions:  
- Modèle Fixe - Rejet 150 mm à Embout Démontable diamètre 10 mm  
- Modèles Orientables à Embout Démontable diamètre 10 mm, Rejet 150 mm, 200 mm ou 250 mm.

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives. Diamètre G=1/2". Serrage 55 mm.

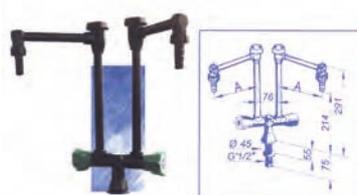

### Chandelier Anti-aspiration à 2 robinets EN

Modèles Fixes à Embouts Démontables diamètre 10 mm  
proposé en 3 versions: Rejet 150 mm, 200 mm ou 250 mm.

Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives. Diamètre G=1/2". Serrage 55 mm.

## LA ROBINETTERIE

### DE LABORATOIRE

- La Garantie d'un Grand Constructeur : FIRSTLABO - PIEL
- Uniformité de la Gamme et Continuité de Fabrication
- Normalisation Européenne et Agrément Education Nationale NFD 18-201

#### Avis d'expert...


Guide de Choix de Vos Chandeliers... Chaque modèle est présenté avec un plan coté.

Pour choisir votre robinet, 2 cotes sont importantes:

- la Saillie (A) correspond à la distance de chute de l'eau entre la colonne du chandelier et la cuve,
  - la hauteur du robinet (entre le manette et le plan de travail) qui détermine l'espace maximum de passage d'un récipient,
- Toutes les autres cotes sont destinées aux techniciens qui interviennent dans l'entretien et la pose des laboratoires




Chandelier à 1 robinet EN, proposé en 2 versions:  
 - Embout Fixe diamètre 6 mm  
 - Embout Démontable diamètre 10 mm  
 Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives

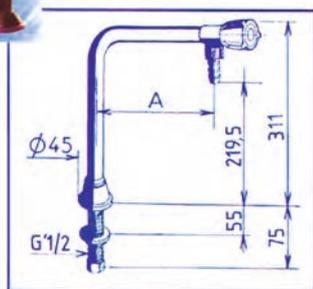

Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Chandelier 1 Robinet EN - Embout Fixe 6 mm</b>				
Chandelier 1 Robinet Embout Fixe	150 mm	245 mm	H 9038PT	89 €
Chandelier 1 Robinet Embout Fixe	200 mm	245 mm	H 9138PT	90 €
<b>Chandelier 1 Robinet EN - Embout Démontable 10 mm</b>				
Chandelier 1 Robinet Embout Démontable	150 mm	311 mm	H 9036PT	84 €
Chandelier 1 Robinet Embout Démontable	200 mm	311 mm	H 9136PT	88 €
Chandelier 1 Robinet Embout Démontable	250 mm	311 mm	H 9636PT	89 €


Chandelier Antivandalisme à 1 robinet, Embout Fixe diamètre 6 mm Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives. Colonne renforcée et queue de robinet en diamètre 3/8". Hauteur 150 mm ou 245 mm. Résistance Accrue au pliage

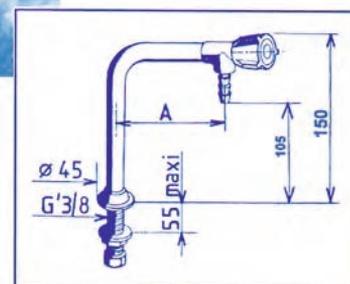

Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Chandelier 1 Robinet Antivandalisme Hauteur 150 mm</b>				
Chandelier 1 Robinet Antivandalisme	140 mm	150 mm	H 9079PT	124 €
Chandelier 1 Robinet Antivandalisme	200 mm	150 mm	H 9179PT	127 €
<b>Chandelier 1 Robinet Antivandalisme Hauteur 245 mm</b>				
Chandelier 1 Robinet Antivandalisme	140 mm	245 mm	H 9078PT	112 €
Chandelier 1 Robinet Antivandalisme	200 mm	245 mm	H 9178PT	122 €



Chandelier à 2 robinets Eau Froide  
 1 Embout Fixe diamètre 6 mm  
 et 1 Embout démontable diamètre 10 mm  
 Robinets en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

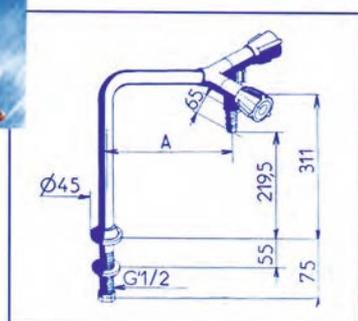


Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Chandelier 1 Robinet Antivandalisme Hauteur 150 mm</b>				
Chandelier 2 Robinets	200 mm	311 mm	H 9137PT	160 €
Chandelier 2 Robinets	250 mm	311 mm	H 9637PT	165 €
<b>Chandelier 1 Robinet Antivandalisme Hauteur 245 mm</b>				
Chandelier 2 Robinets Antivandalisme	200 mm	311 mm	H 9177PT	172 €
Chandelier 2 Robinets Antivandalisme	250 mm	311 mm	H 9677PT	177 €



### Colonne à Bec Orientable et Embout Démontable

Robinet en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Destiné à alimenter en Eau Froide: des laveries, des double-bacs, et à alimenter des montages de réfrigérants et trompes à vide.

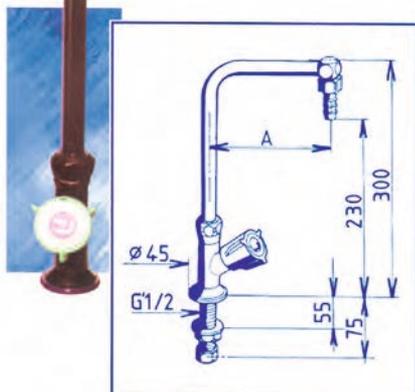

Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Colonne à Bec Orientable et Embout Démontable diamètre 10 mm</b>				
Colonne Orientable	200 mm	300 mm	H 9133PT	111 €
Colonne Orientable	250 mm	300 mm	H 9633PT	116 €

### Mélangeur Eau Chaude/ Eau Froide à Bec Orientable

Robinet en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Embout démontable diamètre 10 mm.

Alimentation Eau Chaude / Eau Froide Monotrou

Destiné à alimenter en Eau Froide: des laveries, des double-bacs, et à alimenter des montages de réfrigérants et trompes à vide.




Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Mélangeur EC/ EF Orientable et Embout Démontable diamètre 10 mm</b>				
Mélangeur Orientable	200 mm	300 mm	H 9135PT	158 €
Mélangeur Orientable	250 mm	300 mm	H 9635PT	168 €



### Colonnes à Raccorder sur Commande à Distance

Proposées en 2 modèles à Bec Fixe ou à Bec Orientable.


Robinet en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

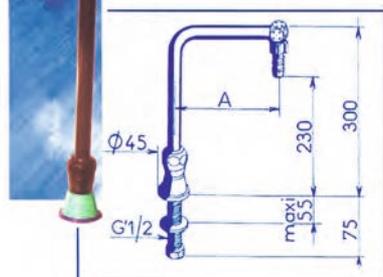

### Commande à Distance par Robinet à Tringle Téléscopique

Dispositif à poser en bandeau de paillasse.

La tringle mesure 600 à 800 mm et passe sous le plateau.

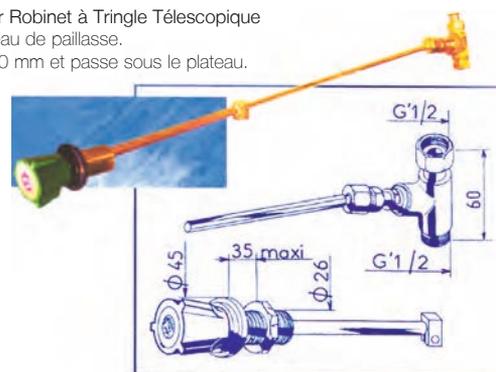

Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Commande à Distance Téléscopique</b>				
Commande à Distance - Ensemble Complet	(sans objet)	(sans objet)	H 9075PT	128 €
<b>Colonnes pour Commandes à Distance</b>				
Colonne Fixe Embout 10 mm - Démontable	250 mm	300 mm	H 9236PT	92 €
Colonne Orientable Embout 10 mm - Démontable	250 mm	300 mm	H 9237PT	96 €

### Mitigeur avec Douchette à commande séparée

Douchette amovible 2 jets sur flexible escamotable sous table de 1500 mm.

Le mitigeur est équipé d'un limiteur de température anti-brûlures et d'un limiteur de débit.

Le modèle est chromé.

La hauteur de la douchette sur son statif est de 180 mm

Modèle thermostatique pour maternités et crèches

### Mitigeur à Douchette intégrée dans la tête

Hauteur sous bec 126 mm, saillie 210 mm

Flexible SPEX 1 mètre M10

Aérateur étoile.



Descriptif	Saillie (A)	Hauteur	Référence	Prix TTC
<b>Mitigeur avec Douchette</b>				
Mitigeur à Douchette à commande séparée	(sans objet)	(sans objet)	H 75717	380 €
Mitigeur à Douchette intégrée dans la tête	(sans objet)	(sans objet)	H 75070	270 €



# LES ROBINETS SPÉCIAUX

## DE LA GAMME SANILAB PRESTO

Une robinetterie de qualité spécifiquement pensée pour les milieux exigeant un niveau d'hygiène élevé ou une ergonomie d'utilisation... Pôles Santé, Puériculture, Cuisines Professionnelles et Pédagogiques, Poste PMR...

### Qualités d'Hygiène:

Tous les produits de la gamme, sont conçus pour résister aux chocs thermiques et/ou chimiques (sous réserve de respecter les protocoles en vigueur).

Les bacs et nez de rejets sont d'une conception unique qui évite les zones de rétention après l'aérateur étoile.

Tous nos produits sont équipés de Flexibles SPEX et d'un brise jet hygiénique.

### Economie:

Notre cartouche diamètre 40 mm unique sur le marché permet de réaliser des économies d'eau importantes

Un large choix de manettes:

Nous vous proposons des manettes adaptées à tous types d'utilisations et d'utilisateurs particuliers : manettes standards, commandes distantes (au coude, sur tringles, au pied ou fémorale), commande Infra Rouge.

### Maintenance :

Les matières utilisées dans la conception de nos robinets garantissent une grande durabilité à nos produits.

Les cartouches céramiques, thermostatiques et têtes céramiques sont remplaçables sans dépose du mitigeur.

### Certifications AFNOR :

Tous les produits sont certifiés NF (les Mitigeurs mécaniques sont NF-EN 817 ; Robinets Simples et Mélangeurs NF-EN 200, les mitigeurs thermostatiques NF-EN 1111). Ces certifications portent sur la qualité des revêtements, l'interchangeabilité des accessoires, l'étanchéité, l'endurance, les débits, le confort d'utilisation, les performances mécaniques et acoustiques, la résistance à l'usure....

### Dans cette collection nous proposons :

- 1 Mitigeur à Commande Longue (coude, avant bras, poignet)
- 1 Mitigeur Douchette à Commande Longue (coude, avant bras, poignet)
- 1 Mitigeur à Commande Fémorale
- 1 Mitigeur à Commande au Pieds
- 1 Mitigeur à Commande Infra Rouge sur Secteur

(\*Autres modèles sur devis)



**Mitigeur à Commande « Coude »**  
Mitigeur à bec lisse orientable  
Hauteur sous bec 135 mm  
Saillie 235 mm  
Flexible SPEX M12 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm  
Aérateur étoile M24 x 1



**Mitigeur Douchette à Commande « Coude »**  
Mitigeur à bec lisse orientable  
Douchette sur Flexible Extractible  
Hauteur sous bec 126 mm  
Saillie 210 mm  
Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm  
Aérateur étoile M24 x 1



**Mitigeur à Commande « Fémorale »**  
Mitigeur à bec lisse « Fixe » ou « Orientable »  
Hauteur sous bec 200 mm  
Saillie 200 mm  
Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm  
Aérateur étoile M24 x 1  
Commande fémorale de Longueur 390 mm au totale (340 mm de commande directe)

Descriptif	Référence	Prix TTC
Mitigeur à Commande « Coude »	H 75028	138 €

Descriptif	Référence	Prix TTC
Mitigeur Douchette à Commande « Coude »	H 75071	286 €

Descriptif	Référence	Prix TTC
Mitigeur à Commande « Fémorale » - Bec Fixe	H 75186-83	206 €
Mitigeur à Commande « Fémorale » - Bec Orientable	H 75189-83	206 €




**Mitigeur à Commande « au Pied »**  
Mitigeur à bec lisse « Fixe » ou « Orientable »  
Hauteur sous bec 200 mm  
Saillie 200 mm  
Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 350 mm  
Aérateur étoile M24 x 1  
Pédale simple Arrivée mâle G 1/2" (15 x 21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

Descriptif	Référence	Prix TTC
Mitigeur à Commande « au Pied » - Bec Fixe	H 75186-14	226 €
Mitigeur à Commande « au Pied » - Bec Orientable	H 75189-14	226 €



**Mitigeur à Commande « Infra Rouge Secteur »**  
Mitigeur à bec lisse  
Hauteur sous bec 200 mm (\* autre sur études)  
Saillie 150, 200 ou 250 mm  
Flexible SPEX M10 x 1, EP G3/8, longueur 650 mm  
Aérateur étoile M24 x 1  
Tête sphérique  
Alimentation Secteur

Descriptif	Référence	Prix TTC
Mitigeur à Commande « Infra Rouge Secteur » - Saillie 150	H 75151	750 €
Mitigeur à Commande « Infra Rouge Secteur » - Saillie 200	H 75153	762 €
Mitigeur à Commande « Infra Rouge Secteur » - Saillie 250	H 75156	768 €

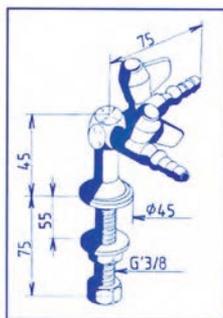

## Les Nourrices de Gaz

Robinetts en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Modèle Education Nationale

Proposés en 4 versions:

- Simple Gaz
- Double Gaz à 90°
- Simple Gaz à Raccord Rapide avec obturation
- Double Gaz à 90° à Raccord Rapide avec obturation

Utilisables pour tous gaz combustible.

Généralement utilisés en milieu scolaire pour une alimentation en Gaz Naturel




Descriptif	Référence	Prix TTC
Nourrice Simple Gaz	H 9428PT	64 €
Nourrice Double Gaz	H 9429PT	99 €
Nourrice Simple Gaz à Raccord Rapide	H 9488PT	118 €
Nourrice Double Gaz à Raccord Rapide	H 9489PT	190 €

Pour les tuyaux NORMAGAZ voir notre rubrique "Matériel de laboratoire"

Commande à Distance par Robinet à Tringle Téléscopique  
Dispositif à poser en bandeau de paillasse.  
La tringle mesure 600 à 800 mm et passe sous le plateau.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Commande à Distance Gaz	H 9475PT	116 €
Téte Gaz pour Commande à Distance	H 9419PT	40 €

Téte 6 mm à Raccorder sur  
Commande à Distance  
Robinetts en laiton revêtu de Pyroflex Noir,  
revêtement résistant aux projections  
corrosives.

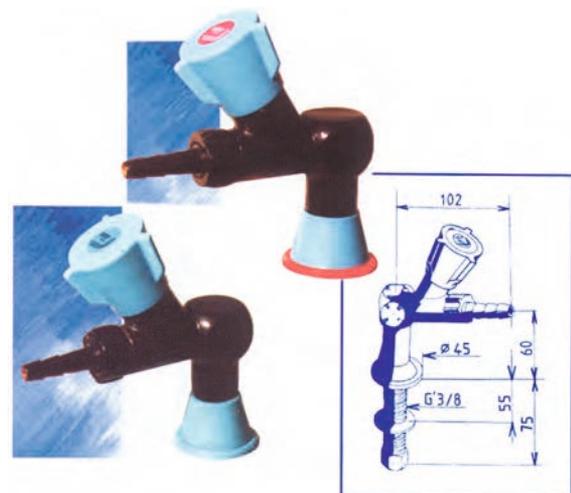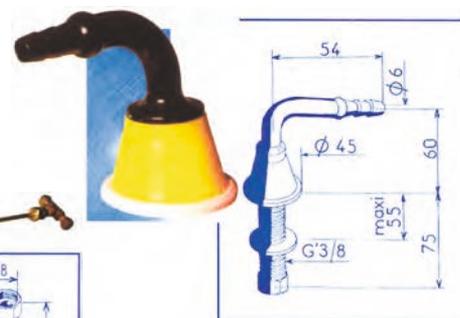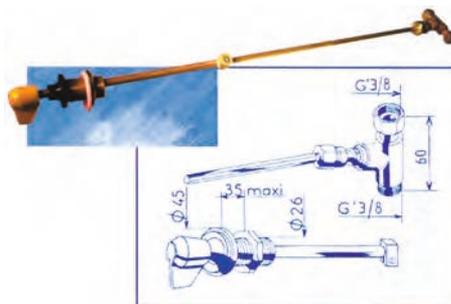

## Les Nourrices pour Vide et Air Comprimé


Robinetts en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Modèle pour le Vide Normalisé avec Pastille Bleue

Modèle pour Air Comprimé Normalisé avec Pastille Rouge

Proposés en Simple ou Double Nourrice

Descriptif	Référence	Prix TTC
Nourrice Simple pour le Vide	H 9328PT	82 €
Nourrice Double pour le Vide	H 9329PT	136 €
Nourrice Simple pour l' Air Comprimé	H 9628PT	82 €
Nourrice Double pour l' Air Comprimé	H 9629PT	136 €

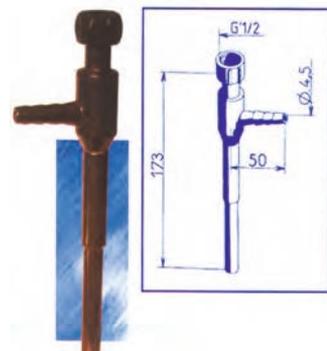

## Trompe à Vide

Robinetts en laiton revêtu de Pyroflex Noir, revêtement résistant aux projections corrosives.

Se visse directement sur les robinets Eau de la gamme, à la place de l'embout démontable

## Manettes Eau et Gaz de Rechange

Les manettes sont complètes avec volant, vis, pastille.

Vendues par 10 Pièces



Flexible d'Alimentation Eau  
Longueur 1000 mm  
Femelle / Femelle 15/21"



Descriptif	Référence	Prix TTC
Trompe à Vide	H 9006PT	89 €
Embout Démontable diamètre 10 mm	H 9011PT	34 €
Lot de 10 Manettes Eau de rechange	H 9410	59 €
Lot de 10 Manettes Gaz de rechange	H 9420	59 €
Flexible d'Alimentation Eau 1000 mm	H 87003	12 €

# LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

## BLOCS, RAMPES, COLONNES... SOLUTIONS DE CÂBLAGE

Les blocs électriques précâblés à fixer sur poste de travail sont des blocs prémontés en usine pour l'équipement des paillasses, tables roulantes et postes de travail divers.

Ils sont réalisés à partir d'un boîtier en aluminium rigide classé non feu, fermé à ses deux extrémités par des joues latérales clipsées et vissées.

La hauteur du profilé a été choisie pour être fixé sur les voiles de fond des paillasses, les bandeaux et dossierets... son épaisseur évite le dépassement du plateau, supprimant les risques d'arrachement.

Plusieurs versions de blocs sont proposés en standard : 2 PC, 3 PC, 4 PC..., Prises Détrompées, Prises RJ45...

Les RJ 45 de type mosaïc CAT 6-ftp prémontées sur bloc multiprises ou sur boîtiers individuels sont à câbler directement lors de l'installation du réseau informatique par une entreprise spécialisée.



En Standard les Blocs de prises sont fixés sur le Voile de Fond des Paillasses. Les câblages circulent sous goulotte sous le plan de travail, depuis le plot Technique.



Bandeau au mètre linéaire destiné à la Fixation des Prises en façade de paillasses (A)



Goulotte Contre-pieds Métallique destinée au câblage des prises de courant sur les tables sèches. Attentes au droit du pieds... (B)



Caisson de Câblage Mélaminé destiné au raccordement des prises de courant sur les tables sèches, lorsque les attentes existantes peuvent être exploitées... (C)



Console Inter-Tables destinée à la fixation des blocs prises en centre de paillasses ou de combinaisons de bahuts. Câblage sous console. (D)

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Blocs Électriques à Prises Standards</b>		
Bloc précâblé 2 PC 220 V + T 16 A	SEL 10	76 €
Bloc précâblé 3 PC 220 V + T 16 A	SEL 20	87 €
Bloc précâblé 4 PC 220 V + T 16 A	SEL 21	112 €
Bloc précâblé 6 PC 220 V + T 16 A	SEL 26	117 €
Bloc précâblé 2 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45	SEL 14	76 €
Bloc précâblé 3 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45	SEL 24	87 €
Bloc précâblé 4 PC 220 V + T 16 A + 1 RJ 45	SEL 34	116 €
<b>Les Blocs Électriques à Prises Détrompées</b>		
Bloc prémonté RJ 45 (Boîtier Séparé)	SEL 48	42 €
Bloc 2 PC 220 V + T 16A à détrompeur	SEL 100	90 €
Bloc 3 PC 220 V + T 16A à détrompeur	SEL 200	113 €
Bloc 2 PC 220 V + T 16A à détrompeur + 1 RJ 45	SEL 104	116 €
Bloc 3 PC 220 V + T 16A à détrompeur + 1 RJ 45	SEL 204	126 €
<b>Les Solutions de Câblage</b>		
Bandeau sans prise au mètre linéaire (A)	SEL 300	41 €
Goulotte Contre-pieds Métallique (B)	SEL 302	34 €
Caisson de Câblage en Bois (C)	SEL 304	125 €
Console Inter-Table sans prises (2000 mm max.) - (D)	SEL 306	69 €
Goulotte de Câblage 60 x 40 mm (2000 mm)	TE 950	50 €
Goulotte de Câblage 2 Passages 130 x 55 mm (2000 mm)	TE 970	58 €


## BANDEAUX RAMPES

**Rampe Electrique Pré-câblée** Norme NFC 15-100  
Avec Disjoncteur Différentiel et 6 Prises Câblés 2 Phases + T  
4 Modèles. Livrée avec 2 pattes de fixations  
Autres équipements possibles sur devis.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Rampe Electrique Pré-équipée 1200mm	TE 912	312 €
Rampe Electrique Pré-équipée 1500mm	TE 915	347 €
Rampe Electrique Pré-équipée 1800mm	TE 918	380 €
Rampe Electrique Pré-équipée 2000mm	TE 920	396 €



## COLONNES & BLOCS VERTICAUX

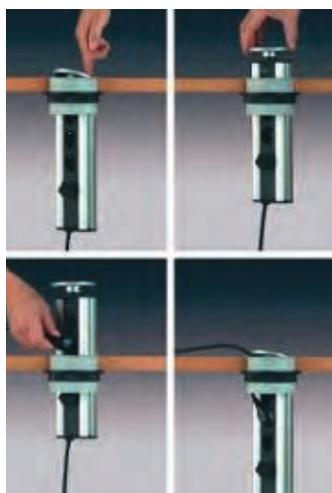


**Bloc vertical à fixer dans le plan de travail.**  
Colonne escamotable par simple pression.  
4 emplacements format mosaic à équiper selon vos besoins.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Bloc Vertical Escamotable (Vide)	SEL 892	238 €

Les Colonnes en Descente Sous Plafond à Equiper de Prises  
Réalisées en aluminium anodisé.  
Les colonnes sont destinées à amener l'électricité à la verticale d'un poste de travail en descente sous plafond.  
Les colonnes disposent d'une face à équiper.  
Elles doivent être équipées d'une platine et d'un vérin en partie haute permettant la fixation.  
Une collerette en ABS blanc est destinée à s'appuyer sur le faux plafond.  
Elles sont à équiper du nombre de prises souhaitées et d'un plastron pour disjoncteur.  
Les Prises Standards ou A Détrompeur sont livrés en modèles clipsables 2 PC ou 3 PC.  
Prises Legrand Type Mosaic.

## CÂBLES SPÉCIAUX...

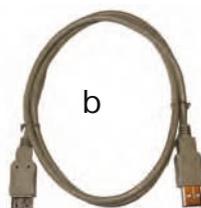

Descriptif	Référence	Prix TTC
Câble Prolongateur M/F 5000 mm (a)	SEL 811	16 €
Câble USB/USB 2 A/A 1000 mm (b)	SEL 813	9 €
Câble USB/USB 2 A/A 3000 mm (b)	SEL 812	6 €
Câble d'Alimentation M/M 5000 mm (c)	SEL 815	12 €
Câble 3RCA M/ 3RCA M/ 1 RCAV 2RCA A 2000 mm (d)	SEL 817	8 €
Câble 3RCA M/ 3RCA M/ 1 RCAV 1RCA A 5000 mm (d)	SEL 818	10 €
Cordon 2 RCA (e)	SEL 819	8 €
Cordon RJ 45 CAT6 FTP - 1000 mm (f)	SEL 920	4 €
Cordon RJ 45 CAT6 FTP - 3000 mm (f)	SEL 921	6 €
Cordon RJ 45 CAT6 FTP - 5000 mm (f)	SEL 922	9 €
Cordon RJ 45 CAT6 FTP - 10000 mm (f)	SEL 923	16 €

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Colonnes Sous Plafond Sans Prise</b>		
Colonne Simple Face 2700 mm	SEL 827	504 €
Colonne Simple Face 2800 mm	SEL 830	534 €
Colonne Simple Face 2900 mm	SEL 833	560 €
Accessoires de Fixation pour Colonne	SEL 850	59 €
<b>Les Blocs Electriques Standards à Clipser</b>		
Module Prises 2 PC 220 V - 16 A	TE 952	35 €
Module Prises 3 PC 220 V - 16 A	TE 953	51 €
Module RJ 45	TE 956	48 €
<b>Les Blocs Electriques à Prises Détrompées à Clipser</b>		
Bloc 2 PC 220 V + T 16A à détrompeur	TE 957	46 €
Bloc 3 PC 220 V + T 16A à détrompeur	TE 958	62 €

Collège "Delalande" - 91 Athis-Mons - Projet Réalisé en Partenariat avec le Conseil Général de l'Essonne  
Salle de Technologie composée de 3 pôles d'enseignement : 1 Pôle Informatique en contour de salle, un pôle de cours au centre de la salle, un pôle technique composé d'établissements en îlots.  
Les îlots permettent d'organiser des projets de groupes pour 4 à 8 élèves...  
Sièges, Tableaux, Meubles de Rangement, Equipements Electriques....etc, complètent cet agencement, nous vous invitons à poursuivre la visite...



## LES ÉTABLIS

### DE TECHNOLOGIE & D'ATELIER - GAMME TECHNOMOB

- Le choix de 2 revêtements de forte épaisseur : stratifié ou multiplis
- Un châssis en tube de forte section carrée

#### L'avis du technicien...

Pensez à vos équipements électriques. Les Blocs peuvent être fixés sur les plateaux d'établissements...De nombreuses autres solutions : colonnes, bandeaux, consoles permettent d'alimenter les établis en courant fort et en courant faible...voir rubrique "Accessoires"

# ÉTABLIS & TABLES SPÉCIALES

Le plateau en 40 mm d'épaisseur est proposé en 2 types de revêtements: Stratifié ou Multiplis. Un Chant PVC Rigide ceinture les Plateaux

En option les établis peuvent recevoir tous types d'équipements électriques fixés en bandeau, sur joue latérale ou sur rampe de coffrage en arrière du plateau.

Châssis mécano-soudé en tube carré de 50 x 50 mm de section, revêtu d'une peinture époxy cuite au four.

Une barre repose-pieds assure le maintien de l'écartement des piètements et sert d'appui à des planchers ou demi-planchers bas

Piètements de type "Cadre Soudé" à double entretoise de même section assemblés par boulonnage aux longerons.

Hauteur de Table 900 mm.

*Etablis de Technologie - TechnoMob*  
Cet établi est proposé en 4 largeurs : 1200, 1500, 1800 et 2000 mm et en 2 profondeurs 750 mm ou 900 mm.

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm



*Etabli de Technologie à Plancher Total*



*Etabli de Technologie à Demi-Plancher*

Plancher ou Demi-plancher en Mélaminé de 19 mm en appui sur les entretoises des piètements et la barre repose-pieds

**Vous pouvez personnaliser vos établis en les aménageant de blocs de rangement suspendus, de réhausse, Portes Claviers escamotables, Supports d'Ecrans et Supports d'Unité Centrale...**



Stratifié (laboratoires de contrôle, mesure et tables d'assemblage)



Multiplis de Hêtre (Mécanique, Enseignements Industriels)



Réhausse à Etagère Réglable  
Réalisée en Tôle pliée 12/10 ème, l'étagère est revêtue de caoutchouc strié. Etagère réglable selon 3 de profondeur 400 mm.



Etagère Supplémentaire  
Réalisée en Tôle pliée 12/10 ème, les étagères sont revêtues de caoutchouc strié. De profondeur 400 mm.

Les Etablis TechnoMob		Revêtement Stratifié		Revêtement Multiplis	
Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
Etabli 1200 x 750 x 900 mm	TE 7023	380 €	TE 7028	357 €	
Etabli 1500 x 750 x 900 mm	TE 7083	432 €	TE 7088	404 €	
Etabli 1800 x 750 x 900 mm	TE 7033	458 €	TE 7038	446 €	
Etabli 2000 x 750 x 900 mm	TE 7043	482 €	TE 7048	480 €	
Etabli 1200 x 900 x 900 mm	TE 10023	530 €	TE 10028	422 €	
Etabli 1500 x 900 x 900 mm	TE 10083	599 €	TE 10088	449 €	
Etabli 1800 x 900 x 900 mm	TE 10033	670 €	TE 10038	495 €	
Etabli 2000 x 900 x 900 mm	TE 10043	699 €	TE 10048	518 €	
<b>Options</b>					
Dossier Antichute (au Mètre Linéaire)	MOB 3002	30 €	MOB 3002	30 €	
Support Clavier Extractible	ACI 200314	95 €	ACI 200314	95 €	
Bras support d'Ecran	ACI 53102	328	ACI 53102	328	

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>LES PLANCHERS OPTIONNELS</b>		
Demi-plancher (adapté à l'établi) le ml	TE 50	88 €
Plancher (adapté à l'établi) le ml	TE 55	99 €
<b>LES REHAUSSES 1 ETAGÈRE</b>		
Réhausse Simple 1200 x 400 x 650 mm	TE 712	254 €
Réhausse Simple 1500 x 400 x 650 mm	TE 715	261 €
Réhausse Simple 1800 x 400 x 650 mm	TE 718	305 €
Réhausse Simple 2000 x 400 x 650 mm	TE 720	312 €
<b>ETAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES</b>		
Etagère supplém. 1200 x 400 x 650 mm	TE 711	82 €
Etagère supplém. 1500 x 400 x 650 mm	TE 714	86 €
Etagère supplém. 1800 x 400 x 650 mm	TE 717	128 €
Etagère supplém. 2000 x 400 x 650 mm	TE 719	136 €


# LES ÉTABLIS

## DE TECHNOLOGIE - GAMME TECHNOPRO

- Un châssis en "U" d'acier de très forte section 80 x 42 mm - Portée 1000 Kg
- De multiples solutions de rangements sous plateau
- 3 types de revêtements de forte épaisseur : stratifié, multiplis, glasal

Le plateau de Très Forte Epaisseur est proposé en 3 types de revêtements: Stratifié 30 mm, Multiplis 40 mm ou Glasal 40 mm.  
Un Chant Rigide ceinture les plateaux en stratifié et glasal.

En option les établis peuvent recevoir tous types d'équipements électriques fixés en bandeau, sur joue latérale ou sur rampe de coffrage en arrière du plateau.

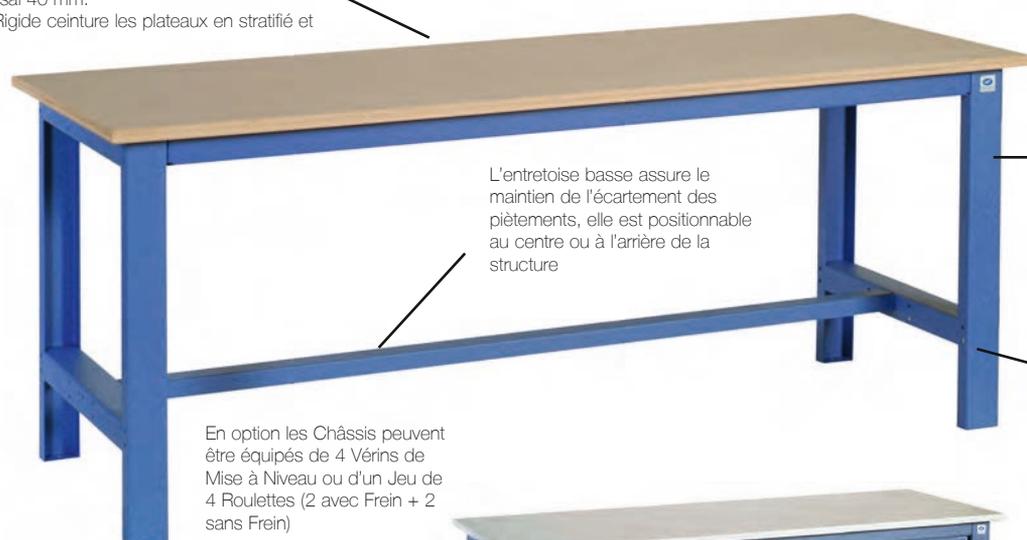

En option les Châssis peuvent être équipés de 4 Vérins de Mise à Niveau ou d'un Jeu de 4 Roulettes (2 avec Frein + 2 sans Frein)

Châssis Mécano Soudé, composé de 2 pieds échelle en acier 25/10 ème plié en "U" de section rectangulaire 80 x 42 et de 3 Entretoises en tôle d'acier 25/10 ème plié en "U" de section 60 x 40.

Etablis de Technologie - TechnoPro  
Cet établi est proposé en 4 largeurs : 1200, 1500, 1800 et 2000 mm et en profondeur 900 mm.

Les piétements sont fixables au sol



Etabli de Technologie TechnoPro équipé d'un Caisson Suspendu à 1 Tiroir (380 x 665 x 155 mm à Droite ou à Gauche - Hauteur utile 100 mm. Serrure)



Etabli de Technologie TechnoPro équipé d'un Caisson Suspendu à 3 Tiroirs (430 x 665 x 280mm / 2 Tiroirs hauteur utile 50 mm + 1 Tiroir 100 mm). Serrure centralisée.



Etabli de Technologie TechnoPro équipé d'un Caisson Suspendu à 4 Tiroirs (430 x 665 x 495 mm / 4 Tiroirs hauteur utile 100 mm). Serrure centralisée.



Stratifié (laboratoires de contrôle, mesure et tables d'assemblage)



Multiplis de Hêtre (Mécanique, Enseignements Industriels)



Glasal Sans Amiante (Electricité, Electronique,...).  
Matériau résistant aux fortes températures



Exemple d'établi équipé d'un bloc à 1 porte



Exemple d'établi équipé d'un Pied Coffre à 3 tiroirs (430 x 665 x 800mm / 1 Tiroirs hauteur utile 75 mm + 2 Tiroirs 300 mm). Serrure centralisée.

Autres équipements sur Devis...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>Les Etablis Revêtus de Stratifié (sans équipement)</b>		
Etabli Stratifié 1200 x 750 x 840 mm	TEP 7023	530 €
Etabli Stratifié 1500 x 750 x 840 mm	TEP 7083	582 €
Etabli Stratifié 1800 x 750 x 840 mm	TEP 7033	599 €
Etabli Stratifié 2000 x 750 x 840 mm	TEP 7043	640 €
<b>Les Etablis Revêtus de Multiplis (sans équipement)</b>		
Etabli Multiplis 1200 x 750 x 840 mm	TEP 7028	433 €
Etabli Multiplis 1500 x 750 x 840 mm	TEP 7088	506 €
Etabli Multiplis 1800 x 750 x 840 mm	TEP 7038	552 €
Etabli Multiplis 2000 x 750 x 840 mm	TEP 7048	579 €
<b>Les Etablis Revêtus de Glasal (sans équipement)</b>		
Etabli Glasal 1200 x 750 x 840 mm	TEP 7029	699 €
Etabli Glasal 1500 x 750 x 840 mm	TEP 7089	964 €
Etabli Glasal 1800 x 750 x 840 mm	TEP 7039	1120 €
Etabli Glasal 2000 x 750 x 840 mm	TEP 7049	1295 €
<b>Les Caissons Suspendus</b>		
Caisson Métallique 1 Tiroir (100 mm)	TE 100	268 €
Caisson Métallique 2 Tiroirs (150 mm)	TE 200	489 €
Caisson Métallique 3 Tiroirs (100 mm)	TE 300	580 €
Caisson Métallique 4 Tiroirs (75 mm)	TE 400	670 €
Caisson Métallique 1 Porte	TE 500	378 €
<b>Les Etablis Revêtus de Stratifié avec Pied Coffre 3 Tiroirs</b>		
Etabli Stratifié 1500 x 750 x 840 mm	TEPC 7383	1210 €
Etabli Stratifié 1800 x 750 x 840 mm	TEPC 7333	1238 €
Etabli Stratifié 2000 x 750 x 840 mm	TEPC 7343	1280 €
<b>Les Etablis Revêtus de Multiplis avec Pied Coffre 3 Tiroirs</b>		
Etabli Multiplis 1500 x 750 x 840 mm	TEPC 7388	1139 €
Etabli Multiplis 1800 x 750 x 840 mm	TEPC 7338	1183 €
Etabli Multiplis 2000 x 750 x 840 mm	TEPC 7348	1211 €
<b>Les Etablis Revêtus de Stratifié avec Pied Coffre 5 Tiroirs</b>		
Etabli Stratifié 1500 x 750 x 840 mm	TEPC 7583	1358 €
Etabli Stratifié 1800 x 750 x 840 mm	TEPC 7533	1375 €
Etabli Stratifié 2000 x 750 x 840 mm	TEPC 7543	1416 €
<b>Les Etablis Revêtus de Multiplis avec Pied Coffre 5 Tiroirs</b>		
Etabli Multiplis 1500 x 750 x 840 mm	TEPC 7588	1275 €
Etabli Multiplis 1800 x 750 x 840 mm	TEPC 7538	1293 €
Etabli Multiplis 2000 x 750 x 840 mm	TEPC 7548	1315 €

Les établis de profondeur 1000 mm sur devis.



Exemple d'établi équipé d'un Pied Coffre à 5 tiroirs (430 x 665 x 800mm / 2 Tiroirs hauteur utile 75 mm + 1 Tiroir 125 mm + 2 Tiroirs 200 mm). Serrure centralisée.



Desserte TechnoMob à 2 Plateaux

Desserte TechnoMob à 3 Plateaux



Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les accessoires Optionnels</b>		
Desserte 2 Niveaux - Plateau Caoutchouc	TE 2021	372 €
Desserte 2 Niveaux - Plateau Stratifié	TE 2023	558 €
Desserte 2 Niveaux - Plateau Multiplis	TE 2028	451 €
Desserte 3 Niveaux - Plateau Caoutchouc	TE 2031	436 €
Desserte 3 Niveaux - Plateau Stratifié	TE 2033	699 €
Desserte 3 Niveaux - Plateau Multiplis	TE 2038	607 €

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les accessoires Optionnels</b>		
Jeu de 4 Vérins	TEPC 10	64 €
Jeu de 4 Roulettes diamètre 160 mm	TEPC 15	105 €
Kit Séparateurs pour Tiroirs (75 mm)	TEPC 25	105 €
Kit Séparateurs pour Tiroirs (100 mm)	TEPC 26	115 €

Collège La Nacelle - 91 Corbeil- Essonnes

Salle Polyvalente de Technologie et Informatique.

De vastes îlots de travail sont constitués par association tables revêtues de plateaux en stratifiés et d'un module polygone Informatique. Cette solution d'agencement favorise le travail en groupe.



## LES POSTES EN ILOTS

### DE TECHNOLOGIE ET INFORMATIQUE - GAMME TECHNOSPACE

- Une solution spécifiquement conçue pour le travail en groupe
- Une solution polyvalente et flexible
- Une approche nouvelle des espaces de cours et travaux pratiques
- Un module, des centaines de possibilités...



Deux coloris proposés au choix: Sable ou Blanc Kaolin

En option les tables peuvent être équipées d'un dossier anti-chutes, de meubles de rangement sous pailasse à porte ou à tiroirs, et de tout type d'équipement électrique... Voir notre rubrique "accessoires".

Module Informatique équipé d'un meuble Unité Centrale fermé à clés et d'un support de clavier extractible... Le Plateau débordant permet aux élèves de s'installer tout autour...



Plateau en Stratifié à Bords Droits PVC  
Chant PVC de forte épaisseur plaqué en pourtour de plateau

**Le Module Polygone est le coeur de ce principe d'agencement...**  
**Il constitue le poste de liaison entre les différentes tables qui constituent l'îlot, grâce à ses 4 côtés de 750 mm...**  
**Il offre un poste complet de Manipulations Assistées par Ordinateur...**  
**Il est Proposé en Version Sans Informatique sous la référence TECS 7903**

Structure Métallique soudée en tube carré de 35 x 35 mm revêtu de peinture époxy.

#### AVIS D'EXPERT

Les équipements en îlots nécessitent une étude précise sur Plans...  
Demandez le conseil et l'assistance de nos techniciens...

Modèle présenté, TECS 7993 "Paillasse Polygone Informatique en Stratifié 636/ 636 x 750/750/750/750 x 900 mm"  
Encombrement total 1697 mm (d'une extrémité à l'autre)  
Plateau coloré Sable  
Hauteur des Tables normalisée à 900 mm.  
Sur demande ces tables peuvent être réalisées en hauteur inférieure.

Les éléments qui peuvent être associés :

- Tables de profondeur 750 mm avec les polygones d'arête 750 mm
- Tables de profondeur 600 mm avec les polygones d'arête 600 mm



Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Un voile de fond fixé en 4 points sur les piètements assure l'indéformabilité du parallélogramme.  
Il peut supporter des blocs de prises (à commander séparément).  
En option le voile peut être substitué par une barre d'écartement afin de pouvoir s'asseoir de part et d'autre de la table.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES TABLES TECHNOSPAC STRATIFIÉ - PROFONDEUR 600 MM</b>		
Table Technospace 600 x 600 x 900 mm	TECS 6003	302 €
Table Technospace 750 x 600 x 900 mm	TECS 6073	335 €
Table Technospace 1200 x 600 x 900 mm	TECS 6023	358 €
Table Technospace 1350 x 600 x 900 mm	TECS 6053	389 €
Table Technospace 1500 x 600 x 900 mm	TECS 6083	399 €
Table Technospace 1800 x 600 x 900 mm	TECS 6033	418 €
<b>Les Modules Polygones - Arête 600 mm</b>		
Module Polygone Simple - arrêtes 600 mm	TECS 6903	530 €
Module Polygone Informatique - arrêtes 600 mm	TECS 6993	675 €
<b>Les Tables Technospace Stratifié - Profondeur 750 mm</b>		
Table Technospace 600 x 750 x 900 mm	TECS 7003	317 €
Table Technospace 750 x 750 x 900 mm	TECS 7073	351 €
Table Technospace 1200 x 750 x 900 mm	TECS 7023	373 €
Table Technospace 1350 x 750 x 900 mm	TECS 7053	404 €
Table Technospace 1500 x 750 x 900 mm	TECS 7083	418 €
Table Technospace 1800 x 750 x 900 mm	TECS 7033	439 €
<b>Les Modules Polygones - Arête 750 mm</b>		
Module Polygone Simple - arrêtes 750 mm	TECS 7903	553 €
Module Polygone Informatique - arrêtes 750 mm	TECS 7993	699 €



# MOBILIER DE LABORATOIRE

Collège Rosa Luxembourg - 91 Lisses


La conception d'une salle résulte de la combinaison de demandes spécifiques et de contraintes liées au site.

Les contraintes de ce projet : la configuration particulière de cette salle composée de pylones en béton le long des murs, qu'il a fallu intégrer entre les plots...



Collège Ferry - 94 Villeneuve-Saint-Georges

Les paillasse doivent être polyvalentes, résister aussi bien aux équipements lourds (maquettes, moteurs...), qu'aux abrasions (outils, produits...), le choix du stratifié offre une solution résistante, solide et facile à entretenir.

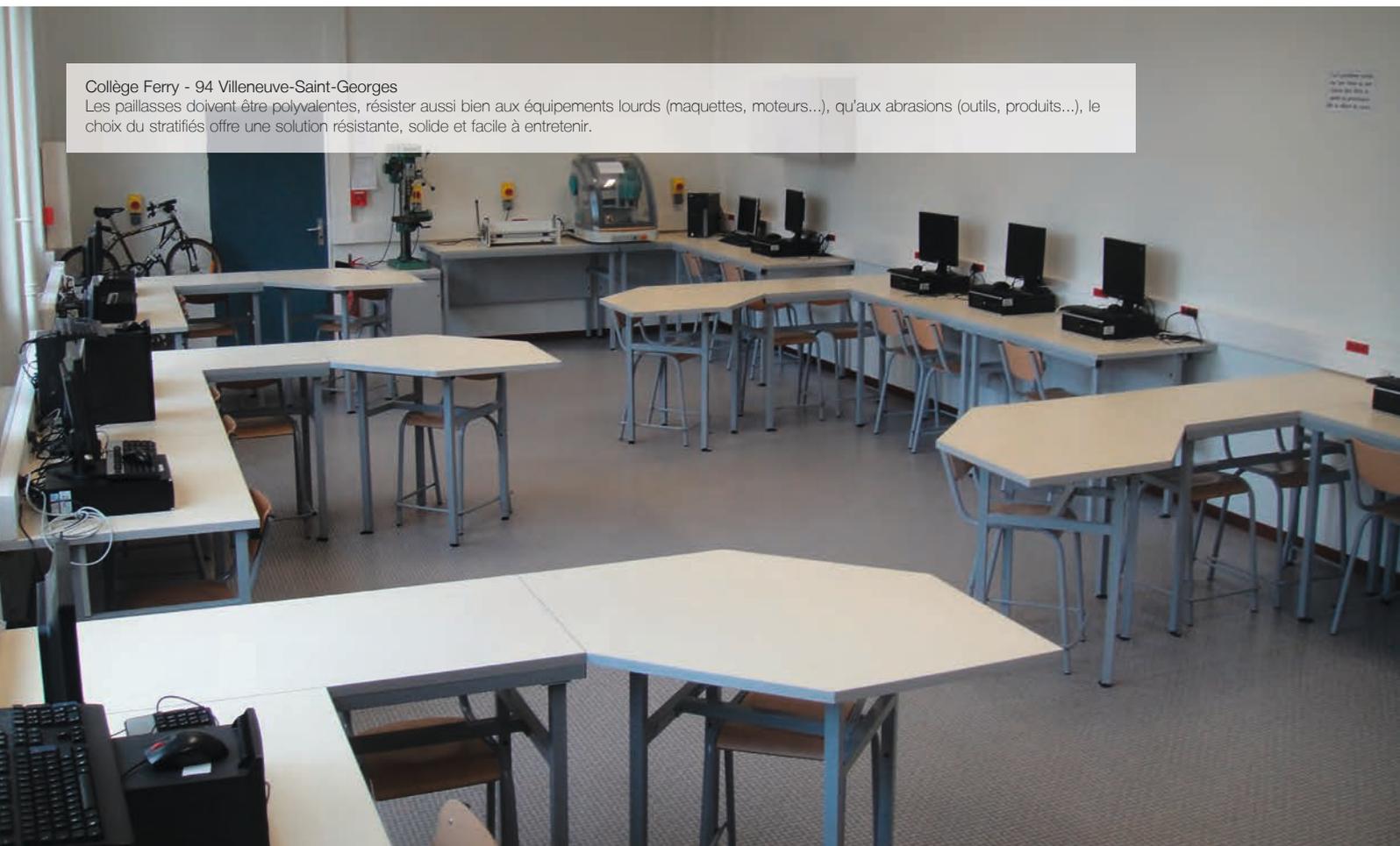

# LES POSTES EN ILOTS



## LES MOBILIERS

### DE RANGEMENT METALLIQUES - GAMME TECHNOMOB

- Volume important de rangement
- Un large choix : armoires hautes ou basses, à portes battantes ou rideaux, à tiroirs
- Coffres forts et armoires fortes complètent la gamme



Grande Profondeur 665 mm (permettant de recevoir des bacs format Europe)

Grande Largeur 1000 mm

Serrure à condamnation centralisée des tiroirs

Combinaisons de Tiroirs de Profondeur utile 75, 100, 125, 150, 200, 225 et 300 mm selon les modèles.



Dimensions 1000 x 665 x 1000 mm



Hauteur 1000 mm

Poignée serrure ergonomique, encastrée



2 Étagères Réglables au pas de 50 mm. Charge 150 Kg.



Kit Complet permettant l'aménagement des tiroirs en 75 et 100 en 5 couloirs, comprenant :  
1 ceinture métallique crantée au pas de 25 mm,  
4 intercalaires longitudinaux crantés,  
16 intercalaires transversaux crantés (Équipement pour 1 Tiroir)



**LES COFFRES FORTS**  
Construction en double-paroi avec structure indéformable monobloc. Ces armoires sont construites en matériaux ignifugés Norme DIN 4102. Fixation au sol par 4 percements (2 dans le dos, 2 à la base)  
Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°. Serrure à clés double pannetons. Elles sont équipées de 2 étagères. 2 modèles de coffres sont proposés en 55 litres et 75 litres. Finition époxy Gris Clair ral 9006.

Les Armoires TechnoMob sont réalisées en tôle pliée 12 et 20/10 ème nervurée et soudée, Corps Monobloc

Les Armoires Hautes sont équipées selon les modèles de Portes à Rideaux, de Portes Battantes Pleines ou de Portes Battantes Vitrées en métacrylate de forte épaisseur. Les Armoires Basses sont équipées selon les modèles de Portes à Rideaux, de Portes Battantes Pleines, de Portes Battantes Vitrées ou de Combinaisons de Tiroirs de Diverses hauteurs.

L'Unité des dimensions (Largeur 1000 mm, Profondeur 665 mm, Hauteurs 1000 ou 1950 mm) permet de juxtaposer les meubles en jouant sur la combinaison des différents modèles.

Couleurs de la Gamme TechnoMob - Corps Gris Clair / Portes et Façades de Tiroirs au choix Bleu ral 5015, autres coloris sur devis (attention surcoût de mise en peinture). A l'exception des Armoires à Portes Rideaux proposées en couleur unie, Gris Clair.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>ARMOIRES BASSES TECHNOMOB</b>		
Armoire Basse Portes Battantes Pleines - profond 600 mm	TE 60102	653 €
Armoire Basse Portes Battantes Vitrées - profond 600 mm	TE 60202	778 €
Armoire Basse Portes Rideaux - profond 600 mm	TE 60302	840 €
<b>ARMOIRES BASSES TECHNOMOB A TIROIRS</b>		
Armoire Basse à 4 Tiroirs (1 x 75) / (1 x 225) / (2 x 300)	TE 6905	1200 €
Armoire Basse à 7 Tiroirs (2 x 75) / (3 x 100) / (1 x 200) / (1 x 250)	TE 6907	1740 €
Armoire Basse à 9 Tiroirs (9 x 100)	TE 6909	1998 €
<b>ACCESSOIRES</b>		
Étagère Supplémentaire	TE 6040	76 €
Kit d'Intercalaires pour Meubles à Tiroirs TechnoMob II (H 75 mm)	TE 6900	107 €
Kit d'Intercalaires pour Meubles à Tiroirs TechnoMob II (H 100 mm)	TE 6910	105 €
<b>COFFRES FORTS</b>		
Coffre Fort 430 x 395 x 610 mm	AMF 60	1159 €
Coffre Fort 430 x 395 x 810 mm	AMF 80	1310 €

# LES ARMOIRES MÉTALLIQUES DE LABORATOIRE ET TECHNOLOGIE



Grande Profondeur 665 mm (permettant de recevoir des bacs format Europe)

Poignée serrure ergonomique, encastrée



4 Etagères Réglables au pas de 50 mm. Charge 150 Kg.

Portes battantes renforcées par oméga



Vitrage métacrylate sans reflets



Nos autres mobiliers métalliques... Retrouvez les Vestiaires et Rayonnages au chapitre "Mobiler de Collectivités" de ce catalogues...

Coloris Gris Perle Ral 7035, peinture époxy cuite au four à 180° après dégraissage et phosphatation

5 Etagères offrant un linéaire de 5970 mm de rangement de dossiers suspendus

Tôle 20/10 ème avec blindage au manganèse du système de condamnation

Trous de scellement au sol (2 trous de diamètre 14 mm)



Porte d'épaisseur 60 mm

Penes actifs au nombre de 6 en diamètre 25 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES ARMOIRES HAUTES GRANDE PROFONDEUR TechnoMob II</b>		
Armoire Haute Portes Battantes Pleines. Prof 665 mm	TE 6210	961 €
Armoire Haute Portes Battantes Vitrées . Prof 665 mm	TE 6220	1 267 €
Armoire Haute Portes Rideaux . Prof 665 mm	TE 6230	1 178 €
<b>Options</b>		
Etagère Supplémentaire	TE 6040	76 €
<b>Les Armoires Fortes</b>		
Armoire Forte	1000 x 480 x 1980 mm	AMF 800 1827 €

Dimensions extérieures: 1000 x 480 x 1980 mm  
Dimensions utiles 995 x 420 x 1975 mm.  
Soit un volume de 830 litres - Poids 70 Kg

# LES ARMOIRES

## À PORTES PLIANTES

- Grand volume de rangement
- Deux modèles mono-porte et double-portes
- Débattement d'ouverture limité

Les armoires de grand volume à Portes Pliantes sont bien adaptées aux laboratoires pour leur large espace de rangement et les nombreuses solutions d'aménagement intérieur.

Les armoires Mobilab sont les seules à proposer une profondeur utile de 600 mm permettant de ranger les objets les plus encombrants (oscilloscopes, alimentations, verrerie, etc...).

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire.



**Une structure métallique robuste**

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise niveau supporte la parfaite assise de l'armoire


Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur segmentant l'espace en 2 volumes identiques...

L'espace intérieur est équipé de 5 étagères réglables sur le modèle mono-porte.

Les Portes Pliantes glissent avec souplesse sur des rails réglables, libérant la presque totalité d'accès au volume de rangement. Par ailleurs une fois ouvertes les portes dépassent à peine de 25 cm, empiétant faiblement sur les allées.

Ces armoires sont équipées d'étagères en mélaminé de 19 mm

L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables en plus de l'étagère centrale fixe sur le modèle double-portes.

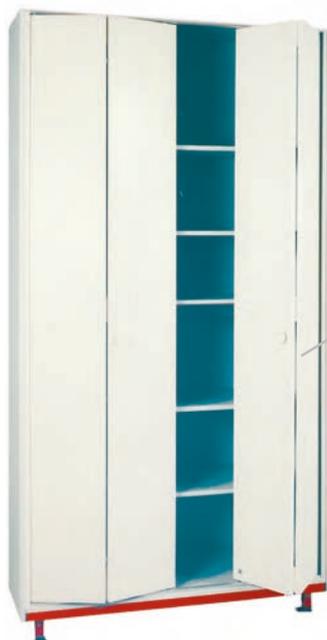

Deux modèles sont proposés, l'un mono-porte (600 x 600 x 2000 mm), l'autre à deux portes pliantes (1200 x 600 x 2000 mm).

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES ARMOIRES MONO- COLONNE PORTES PLIANTES BOIS</b>		
Armoire 600 x 600 x 2000 mm - Etagères Mélaminé	RA 10	722 €
<b>Les Armoires Double-portes Pliantes Bois</b>		
Armoire 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Mélaminé	RA 110	915 €

# LES ARMOIRES

## A PORTES BATTANTES

- Associations modulables et esthétiques : en linéaires ou dos à dos en agencement central
- Profondeur appréciée pour les équipements de grand volume
- Un sur-meuble à portes battantes optionnel



Armoires Portes Pleines présentées avec Sur-meuble optionnel  
2 profondeurs 450 mm ou 600 mm  
Largeur 1200 mm (ou Monocolonne 600 mm)  
Hauteur 2000 mm (2400 mm avec sur-meuble optionnel)

### Des Agencements Astucieux...

Ces armoires polyvalentes trouvent leur place dans les laboratoires, mais aussi dans les salles de cours, les bureaux, les ateliers...

La forme du caisson, sans débordement permet toutes les associations: en linéaires muraux, dos à dos pour segmenter et organiser des circulations de stockages, ou en îlots...L'Alternance d'armoires à portes pleines et à portes vitrées est possible...

### Des Armoires de Grande Profondeur:

Les Armoires Mobilab sont les seules modèles bois sur structure métallique à être proposées en deux profondeurs au choix 450 mm ou 600 mm pour ranger les objets les plus encombrants.

*Une Structure Métallique Robuste:*

Une chaise métallique en tubes carrés modèlés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

*Un Design Pratique et Esthétique:*

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire. (Autres couleurs sur demande)

Les portes battantes sont en panneau mélaminé de 19 mm montées sur charnières invisibles et munies d'une poignée serrure à crémone 3 points.

Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur en segmentant l'espace en 2 volumes identiques. L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables en Mélaminé de 19 mm ou en Latté de 22 mm.

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES ARMOIRES À PORTES PLEINES ET SUR-MEUBLES DE PROFONDEUR 450 MM</b>		
Armoire 1200 x 450 x 2000 mm - Etagères Mélaminées	RA 430	576 €
Armoire 1200 x 450 x 2000 mm - Etagères Lattées	RA 431	631 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 450 x 400 mm	RA 435	260 €
<b>Les Armoires à Portes Pleines et Sur-meubles de Profondeur 600 mm</b>		
Armoire 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Mélaminées	RA 30	598 €
Armoire 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Lattées	RA 31	658 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 600 x 400 mm	RA 35	285 €
Armoire 600 x 600 x 2000 mm - Type Monocolonne 1 Porte	RA 32	541 €
Sur-Meuble d'Armoire Monocolonne 600 x 600 x 400 mm	RA 34	250 €



Armoires Portes Vitrées présentées avec  
Étagères Lattées  
2 profondeurs 450 mm ou 600 mm  
Largeur 1200 mm (ou Monocolonne 600 mm)  
Hauteur 2000 mm (2400 mm avec sur-meuble)

## LES ARMOIRES

### A PORTES VITRÉES

- Des agencements astucieux...
- De larges fenêtres transparentes pour un repérage visuel immédiat
- Associations modulables et esthétiques : en linéaires ou dos à dos en agencement central
- Un sur-meuble à portes battantes optionnel

#### Des Agencements Astucieux...

Ces armoires polyvalentes trouvent leur place dans les laboratoires, mais aussi dans les salles de cours, les bureaux, les ateliers... La forme du caisson, sans débordement permet toutes les associations: en linéaires muraux, dos à dos pour segmenter et organiser des circulations de stockages, ou en îlots...L'Alternance d'armoires à portes pleines et à portes vitrées est possible...

# LES ARMOIRES EN BOIS DE LABORATOIRE

Une structure métallique robuste  
Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Les armoires peuvent être sur-montées de sur-meubles à portes pleines de hauteur 400 mm, ce qui porte la hauteur totale de l'armoire à 2400 mm

L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables.

Ces armoires sont équipées soit d'étagères en mélaminé de 19 mm soit d'étagères en Lattée de forte portée.  
Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur en segmentant l'espace en 2 volumes identiques



Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire.

Les armoires Mobilab sont proposées en 2 profondeurs au choix de 450 mm ou 600 mm pour permettre de ranger les objets les plus encombrants

Les portes en panneau mélaminé de 19 mm sont équipées sur les 3/4 de leur surface d'une fenêtre transparente en métacrylate

Les portes sont condamnées par poignée serrure à crémone 3 points. La porte gauche peut être maintenue fermée par crochet flexible

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>Les Armoires à Portes Pleines Vitrées et Sur-meubles de Profondeur 450 mm</b>		
Armoire 1200 x 450 x 2000 mm - Etagères Mélaminées	RA 440	746 €
Armoire 1200 x 450 x 2000 mm - Etagères Lattées	RA 441	808 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 450 x 400 mm	RA 435	260 €
<b>Les Armoires à Portes Pleines Vitrées et Sur-meubles de Profondeur 600 mm</b>		
Armoire 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Mélaminées	RA 40	787 €
Armoire 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Lattées	RA 41	861 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 600 x 400 mm	RA 35	285 €
Armoire 600 x 600 x 2000 mm - Monocolonne 1 Porte Vitrée	RA 42	658 €
Sur-Meuble d'Armoire Monocolonne 600 x 600 x 400 mm	RA 34	250 €



# LES ARMOIRES

## A PORTES COULISSANTES

- Gain de place, dans les salles exigües et couloirs de circulation
- Associations modulables et esthétiques : en linéaires ou dos à dos en agencement central
- Un Sur-meuble à portes coulissantes optionnel



### Des Armoires de Grande Profondeur:

Les Armoires à Portes Coulissantes Mobilab sont proposées profondeur 600 mm (Profondeur utile 530 mm) pour ranger les objets les plus encombrants.

Une Structure Métallique Robuste:

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

Un Design Pratique et Esthétique:

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire. (Autres couleurs sur demande)

Les portes en mélaminé de 19 mm se déplacent sans frottement sur un système de rails hauts et bas évitant la déformation des panneaux. Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur en segmentant l'espace en 2 volumes identiques. L'espace intérieur est équipé de 8 étagères réglables en Mélaminé de 19 mm ou en Latté de 22 mm.

Les Portes peuvent être équipées d'une serrure à fermeture centralisée, optionnelle.



Armoires Portes Coulissantes  
Profondeurs 600 mm  
Largeur 1200 mm  
Hauteur 2000 mm (2400 mm avec sur-meuble)



Sur-Meuble d'Armoires à Portes Coulissantes  
Profondeurs 600 mm  
Largeur 1200 mm  
Hauteur 400 mm



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
LES ARMOIRES A PORTES COULISSANTES		
Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Mélaminées	RA 50	710 €
Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 2000 mm - Etagères Lattées	RA 51	747 €
Sur-Meuble d'Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 400 mm	RA 36	311 €
Kit Serrure pour Portes Coulissantes (à l'unité)	DC 300	101 €

# LES ARMOIRES

## MULTIRANGEMENTS

- Armoire mixte équipée de tiroirs en partie basse et d'étagères en partie haute
- Les couleurs des tiroirs permettent un rangement synoptique
- Grand volume de rangement

Armoires Multirangements  
Profondeurs 450 mm ou 600 mm au choix  
Largeur 1050 mm  
Hauteur 2000 mm  
Armoire livrée sans bacs

Les armoires Multirangements sont proposées en profondeur 450 mm ou 600 mm et en une unique largeur de 1050 mm adaptée à la mise en place de 3 colonnes de Bac-tiroirs.

Les portes sont condamnées par poignée serrure à crémone 3 points. La porte gauche peut être maintenue fermée par crochet flexible

Les coulisses en ABS rigide indéformables sont posées en usine. 10 Paires de Coulisses habillent chaque colonne, autorisant l'équipement d'une colonne avec au maximum 10 bacs F1 (hauteur 75 mm) ou 5 bacs F2 (hauteur 150 mm)

Les trois colonnes peuvent être indifféremment équipées de bac-tiroirs, modèles F1 (hauteur 75 mm), F2 (hauteur 150 mm) ou F3 (hauteur 300 mm)

Une structure métallique robuste  
Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire



Ces armoires sont équipées en partie haute d'étagères en mélaminé de 19 mm, une étagère fixe centrale et 2 étagères réglables.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps de l'armoire.

Bac-Tiroirs F2 (hauteur 150 mm)...voir Gratnell's Système dans ce catalogue

Bac-Tiroirs F1 (hauteur 75 mm) peuvent être équipés en option d'inserts de segmentation multicases...voir Gratnell's Système dans ce catalogue

Bac-Tiroirs F3 (hauteur 300 mm), ce bac occupe l'espace de 4 bacs F1...voir Gratnell's Système dans ce catalogue

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES ARMOIRES À MULTIRANGEMENTS</b>		
Armoire 1050 x 450 x 2000 mm (sans bacs)	RA 3145	780 €
Armoire 1050 x 600 x 2000 mm (sans bacs)	RA 3160	808 €
<b>Les Sur-meubles d'Armoires</b>		
Sur-meuble 1050 x 450 x 400 mm	RA 37	285 €
Sur-meuble 1050 x 600 x 400 mm	RA 38	285 €
<b>Les Bac-Tiroirs</b>		
Lot de 6 Bacs Tiroirs 312 x 427 x 75 mm (*)	RG F1	40 €
Lot de 3 Bacs Tiroirs 312 x 427 x 150 mm (*)	RG F2	40 €
Lot de 2 Bacs Tiroirs 312 x 427 x 300 mm (*)	RG F3	40 €

### DES AGENCEMENTS ASTUCIEUX...

Ces armoires polyvalentes trouvent leur place dans les laboratoires, mais aussi dans les salles de cours, les bureaux, les ateliers... La forme du caisson, sans débordement permet toutes les associations: en linéaires muraux, dos à dos pour segmenter et organiser des circulations de stockages, ou en îlots...L'alternance d'armoires à portes pleines et à portes vitrées est possible...

### PENSEZ AUSSI AUX BAC-TIROIRS... (\*)

Choisissez les tailles de bacs et les couleurs (Rouge, Bleu, Vert, Jaune ou Translucide) adaptées à vos besoins. N'oubliez pas les accessoires optionnels: inserts, couvercles...



## CRÉEZ VOTRE ARMOIRE



### SELON VOS BESOINS

- Créez vos meubles selon vos envies !
- Double-corps, triple-corps ou monocorps... en fonction de vos besoins !
- Portes vitrées, portes pleines, coulissantes ou battantes... il n'y a pas de limites à votre création !



# UN CONCEPT...

...DES CENTAINES DE POSSIBILITÉS !

Dans les pages qui suivent vous allez pouvoir créer le meuble dont vous avez besoin, en fonction de vos envies et de votre budget. Les meubles peuvent aussi bien être utilisés individuellement comme les bahuts ou les meubles à poser ou à suspendre, ou bien ils peuvent être combinés entre eux pour en créer de nouveaux meubles tels que les meubles double ou triple-corps. Nos meubles ne sont pas scandinaves, ils sont fabriqués en France, à Crosne dans le 91, et ce depuis 40 ans !

## UN BAHUT

Format, type de porte ou nombre de tiroirs, selon votre choix... +



OU



## UNE ARMOIRE A POSER

Format, type de porte selon votre choix... =



OU



## ARMOIRE DOUBLE-CORPS



## UN BAHUT

+ UNE ARMOIRE A POSER

+ UNE ARMOIRE A POSER =

## ARMOIRE TRIPLE-CORPS



OU



OU



OU



### QUELQUES IDÉES...

Associer en linéaires, en îlots, en paillasse centrales de préparation...  
 Composer des associations mixtes: portes et tiroirs pour tout ranger...  
 Combiner des revêtements différents pour des plans de travail spécifiques... Superposer des vitrines, des bibliothèques ...  
 Juxtaposer des plots techniques, des plots informatiques...

## LES BAHUTS MOBILAB

### À PORTES COULISSANTES

- C'est la combinaison de 2 fonctions complémentaires : un plan de travail et un rangement
- C'est la base de développement de toute une gamme
- Seul ou combiné à d'autres meubles, il répond à des usages inattendus

Les portes coulissantes sont montées sur un double système de rails et galets téflon

En option, les bahuts peuvent être condamnés par serrure

Tous les bahuts sont proposés en hauteur 900 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les bahuts sont proposés avec 2 portes coulissantes ou 2 portes batantes.

Une paroi intermédiaire segmente le volume du bahut en 2 larges compartiments équipés chacun d'une étagère mélaminée réglable en hauteur

**Bahut à Portes Coulissantes**  
Plan de Travail Grés Emailé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Une structure métallique robuste. Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

**Bahut à Portes Coulissantes**  
Plan de Travail en Verre Emailé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

**Bahut à Portes Coulissantes**  
Plan de Travail Mélaminé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

#### LES BAHUTS A PORTES COULISSANTES - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TRESPA		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut P. Coul. 1200 x 600 x 900 mm	RA 5122	573 €	RA 5120	672 €	RA 5127	748 €	RA 5123	645 €	RA 5125	776 €	RA 5128	815 €
Bahut P. Coul. 1500 x 600 x 900 mm	RA 5152	607 €	RA 5150	718 €	RA 5157	794 €	RA 5153	690 €	RA 5155	849 €	RA 5158	982 €

#### LES BAHUTS A PORTES COULISSANTES- PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TRESPA		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut P. Coul. 1200 x 750 x 900 mm	RA 5322	624 €	RA 5320	761 €	RA 5327	804 €	RA 5323	725 €	RA 5325	885 €	RA 5328	934 €
Bahut P. Coul. 1500 x 750 x 900 mm	RA 5352	674 €	RA 5350	799 €	RA 5357	844 €	RA 5353	784 €	RA 5355	920 €	RA 5358	1106 €

#### LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Descriptif	Référence	Prix TTC
Kit Serrure pour Portes Coulissantes	DC 300	101 €
Dosseret au mètre linéaire	MOB 3002	30 €

# LES BAHUTS MOBILAB

## À PORTES BATTANTES

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Tous les bahuts sont proposés en hauteur 900 mm

Une structure métallique robuste. Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Une paroi intermédiaire segmente le volume du bahut en 2 larges compartiments équipés chacun d'une étagère mélaminée réglable en hauteur

En option, les bahuts peuvent être condamnés par serrure à barillet

Bahut à Portes Battantes  
Plan de Travail Mélaminé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Les portes battantes sont montées sur charnières invisibles à ouverture 120°



Bahut à Portes Battantes  
Plan de Travail Grés Emailé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm



Bahut à Portes Battantes  
Plan de Travail en Verre Emailé  
Il est proposé en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Il se décline en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

### LES BAHUTS A PORTES BATTANTES - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TRESPA		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut P. Bat. 1200 x 600 x 900 mm	RA 6122	573 €	RA 6120	672 €	RA 6127	748 €	RA 6123	645 €	RA 6125	776 €	RA 6128	815 €
Bahut P. Bat. 1500 x 600 x 900 mm	RA 6152	607 €	RA 6150	718 e	RA 6157	794 €	RA 6153	690 €	RA 6155	849 €	RA 6158	982 €

### LES BAHUTS A PORTES BATTANTES - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TRESPA		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut P. Bat. 1200 x 750 x 900 mm	RA 6322	624 €	RA 6320	761 €	RA 6327	804 €	RA 6323	725 €	RA 6325	885 €	RA 6328	934 €
Bahut P. Bat. 1500 x 750 x 900 mm	RA 6352	674 €	RA 6350	799 €	RA 6357	844 €	RA 6353	784 €	RA 6355	920 €	RA 6358	1106 €

### LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Descriptif	Référence	Prix TTC
Kit Serrure pour Portes battantes	DC 100	75 €
Dosseret au mètre linéaire	MOB 3002	30 €

Dimensions spéciales sur demande...  
N'oubliez pas que nous fabriquons vos meubles sur mesures !

Collège "Paul Eluard" 91 Vigneux sur Seine

Salle de préparation de SVT.

Un îlot central constitué par la juxtaposition de bahuts à tiroirs de profondeur 600 mm et de bahuts à portes de même profondeur.

L'Ensemble mesure 3000 x 1200 x 900 mm



## LES BAHUTS MOBILAB

### A TIROIRS

- C'est la combinaison de 2 fonctions complémentaires : un plan de travail et un rangement
- Seul ou combiné à d'autres meubles, le bahut à tiroirs répond à des usages multiples
- Le tiroir offre une solution de rangement très organisée

#### QUELQUES IDÉES...

Associer en linéaires, en îlots, en paillasse centrales de préparation...

Composer des associations mixtes: portes et tiroirs pour tout ranger...

Combiner des revêtements différents pour des plans de travail

spécifiques...Superposer des vitrines, des bibliothèques ...

Juxtaposer des plots techniques, des plots informatiques...

# LES BAHUTS DE LABORATOIRE

**Bahuts à Tiroirs**  
Plan de Travail Mélaminé, Grès ou Verre Emailé  
Proposés en 2 profondeurs 600 ou 750 mm.  
Ils se déclinent en 2 largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Tous les bahuts sont proposés en hauteur 900 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les Tiroirs sont montés sur glissières métalliques à galets téflon.  
Une façade est complétée d'une poignée filante.  
Les tiroirs sont de profondeur 100 mm.

12 Tiroirs de largeur 500 mm équipent les bahuts en 1200 mm  
18 Tiroirs de largeur 400 mm équipent les bahuts en 1500 mm

La combinaison proposée est réalisée par association de 3 bahuts de profondeur 600 mm à Portes et à Tiroirs et 1 Paillasse Sèche, revêtus de verre émaillé.  
L'Ensemble mesure 2400 x 1200 x 900 mm

Une structure métallique robuste.  
Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire



## LES BAHUTS A TIROIRS - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TOPLAB		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut 12 tiroirs 1200 x 600 x 900 mm	RA 7122	1323 €	RA 7120	1485 €	RA 7127	1548 €	RA 7123	1398 €	RA 7125	1527 €	RA 7128	1565 €
Bahut 18 tiroirs 1500 x 600 x 900 mm	RA 7152	1536 €	RA 7150	1851 €	RA 7157	1890 €	RA 7153	1620 €	RA 7155	1778 €	RA 7158	1911 €

## LES BAHUTS A TIROIRS - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	PLATEAU MÉLAMINÉ		PLATEAU GRÉS		PLATEAU VERRE		PLATEAU STRATIFIÉ		PLATEAU TOPLAB		PLATEAU VARICOR	
	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC
Bahut 12 tiroirs 1200 x 750 x 900 mm	RA 7322	1578 €	RA 7320	1747 €	RA 7327	1830 €	RA 7323	1683 €	RA 7325	1839 €	RA 7328	1887 €
Bahut 18 tiroirs 1500 x 750 x 900 mm	RA 7352	1690 €	RA 7350	1836 €	RA 7357	1923 €	RA 7353	1806 €	RA 7355	1953 €	RA 7358	2133 €

## LES ACCESSOIRES OPTIONNELS

Descriptif	Référence	Prix TTC
Dosseret au mètre linéaire	MOB 3002	30 €

# ARMOIRE

## 14 OU 17 TIROIRS

- Développé en partenariat avec des enseignants et des préparateurs
- 2 largeurs de tiroirs 500 et 1000 mm utiles
- Meuble de collection pour rangements d'objets de tailles diverses

Les Demi-Tiroirs sont de largeur 500 mm utile  
Les Grands Tiroirs sont de largeur 1000 mm utile

Une structure métallique robuste.  
Une chaise métallique en tube carré soudé, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Modèle proposé en 2 versions: 14 ou 17 Tiroirs  
Les grands tiroirs sont toujours positionnés en partie haute du meuble pour éviter l'affaissement de l'ensemble...

14 Demi-Tiroirs de largeur 500 mm utile  
3 Grands Tiroirs de largeur 1000 mm utile

Armoire 17 Tiroirs  
Profondeur 600 mm.  
Largeur 1200 mm  
Hauteur : 1400 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les Tiroirs sont montés sur glissières métalliques à galets téflon.  
Une façade est complétée d'une poignée filante.  
Les tiroirs sont de profondeur 100 mm.

Armoire 14 Tiroirs  
Profondeur 600 mm.  
Largeur 1200 mm  
Hauteur : 1400 mm

8 Demi-Tiroirs de largeur 500 mm utile  
6 Grands Tiroirs de largeur 1000 mm utile

**Dimensions spéciales sur demande...**  
N'oubliez pas que nous fabriquons vos meubles à tiroirs sur mesures !

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble 14 Tiroirs - 6 Grands en Haut + 8 Petits	RA 9142	1075 €
Meuble 17 Tiroirs - 3 Grands en haut + 14 Petits	RA 9272	1213 €

## MEUBLES

### À ROCHES 12 OU 15 TIROIRS & BAHUTS MIXTES



Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les Tiroirs sont en métal renforcé, montés sur glissières à galets.  
Une façade décorative en mélaminé est complétée d'une poignée filante.  
Limite de poids 50 Kg par tiroir (correctement répartis)

Deux Modèles sont proposés :  
Modèle 12 Tiroirs en 3 Colonnes de 4 Tiroirs de Grande Profondeur 190 mm.  
Modèle 15 Tiroirs de Forte Portée en 3 Colonnes de 5 Tiroirs de Profondeur 150 mm (photo).  
Dimensions des meubles: 1500 x 750 x 900 mm

Une structure métallique robuste.  
Une chaise métallique en tube carré soudé, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Deux Modèles sont proposés :  
Modèle 10 Tiroirs + 1 Porte Battante (photo)  
Modèle 5 Tiroirs + 2 Portes Battantes  
Dimensions des meubles: 1500 x 750 x 900 mm

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du bahut.

Les portes battantes sont montées sur charnières invisibles à ouverture 120°

Une structure métallique robuste.  
Une chaise métallique en tube carré soudé, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Les Tiroirs sont en métal renforcé, montés sur glissières à galets.  
Une façade décorative en mélaminé est complétée d'une poignée filante.  
Limite de poids 50 Kg par tiroir (correctement répartis)

**Dimensions spéciales ou options sur demande...**  
N'oubliez pas que nous fabriquons vos meubles à tiroirs sur mesures !  
Vous pouvez nous demander d'étudier la réalisation de dimensions particulières, ou d'options ; plateau en grès, verre...

#### MEUBLE A ROCHES - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble 12 Tiroirs Forte Portée - 1500 x 600 x 900 mm	RA 9548	1060 €
Meuble 15 Tiroirs Forte Portée - 1500 x 600 x 900 mm	RA 9550	1398 €

#### MEUBLE A ROCHES - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble 12 Tiroirs Grande Profondeur - 1500 x 750 x 900 mm	RA 9549	1117 €
Meuble 15 Tiroirs Forte Portée - 1500 x 750 x 900 mm	RA 9551	1483 €

#### BAHUTS MIXTES À PORTES ET TIROIRS - PROFONDEUR 600 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble Mixte 10 Tiroirs + 1 Porte - 1500 x 600 x 900 mm	RA 9598	1360 €
Meuble Mixte 5 Tiroirs + 2 Portes - 1500 x 600 x 900 mm	RA 9599	1178 €

#### BAHUTS MIXTES À PORTES ET TIROIRS - PROFONDEUR 750 MM

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Meuble Mixte 10 Tiroirs + 1 Porte - 1500 x 750 x 900 mm	RA 9600	1 435 €
Meuble Mixte 5 Tiroirs + 2 Portes - 1500 x 750 x 900 mm	RA 9601	1 241 €



## LES MEUBLES

À POSER (SUR TABLES ET BAHUTS) OU À SUSPENDRE



**ATTENTION !**

Pour les meubles suspendus, n'oubliez pas de commander les Kits de Fixation Murale (1 kit par meuble). Le kit doit absolument être installé en usine...

# LES MEUBLES A POSER OU A SUSPENDRE



Les meubles vitrés sont équipés de deux portes en verre sécurisé de 4 mm d'épaisseur rodées tout autour. Elles sont munies d'onglets permettant de les faire coulisser dans les rails hauts et bas en ABS encastrés.


Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps du de la vitrine.

Tous les meubles à poser ou à suspendre ont une profondeur de 300 mm. Ils sont proposés en deux largeurs 1200 mm ou 1500 mm

Tous les meubles sont livrés avec deux demi-étagères réglables

Meubles à Poser ou à Suspendre "Vitrine"  
Hauteur du Module 600 mm

Tous les meubles "placard" en 1200 mm ou 1500 mm de largeur sont équipés de 4 portes battantes permettant une ouverture totale de chaque demi espace

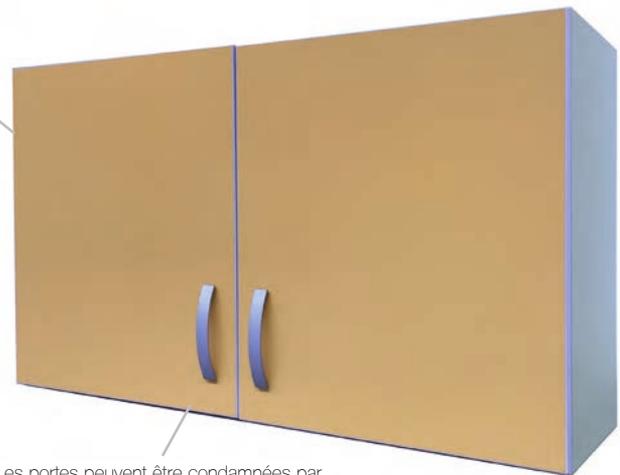

Les portes peuvent être condamnées par serrure, en option.

Meubles à Poser ou à Suspendre "Placard"  
Hauteur du Module 600 mm

(Attention : façades en couleurs sous conditions et surcout)



Caisson ouvert de même concept que les autres meubles à poser ou à suspendre et un espace composé de 2 demi-étagères réglables

Meubles à Poser ou à Suspendre "Bibliothèque"  
Hauteur du Module 600 mm

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Meubles à Poser ou à Suspendre "Bibliothèque"</b>		
Les Sur-meubles Bibliothèques - 1200 x 300 x 600 mm	RA 8200	311 €
Les Sur-meubles Bibliothèques - 1500 x 300 x 600 mm	RA 8500	352 €
<b>Les Meubles à Poser ou à Suspendre "Placard"</b>		
Les Sur-meubles Placards - 1200 x 300 x 600 mm	RA 8220	388 €
Les Sur-meubles Placards - 1500 x 300 x 600 mm	RA 8520	445 €
<b>Les Meubles à Poser ou à Suspendre "Vitrine"</b>		
Les Sur-meubles Vitrines - 1200 x 300 x 600 mm	RA 8207	512 €
Les Sur-meubles Vitrines - 1500 x 300 x 600 mm	RA 8507	599 €
<b>Les Options</b>		
Kit de Fixation Murale pour Meubles Suspendus	RA 8097	94 €
Kit Serrure pour Portes Battantes	DC 100	75 €

Lycée "Guillaume Budé" 94 Limeil Brévannes

Salle de préparation de Physiques.

En pourtour de Salle, des linéaires d'Armoires Double-corps à Portes Pleines sur Bahuts à Portes Coulissantes.

Un lot central constitué par la juxtaposition de bahuts.



## LES ARMOIRES DOUBLE-CORPS

### A PORTES PLEINES

- Un choix de grands volumes de rangement
- Un concept de superposition garantissant leur stabilité et solidité
- Deux corps Indépendants multiplie les combinaisons d'agencement de votre espace



# LES ARMOIRES EN BOIS DE LABORATOIRE

## Une Gamme d'Armoires de Collection, pour les Très Grands Volumes :

Les Armoires Double-corps Mobilab sont proposées en 2 Largeurs au choix 1200 mm ou 1500 mm et 2 Profondeurs 600 mm ou 750 mm.

Leur Hauteur est de 2100 mm. Elles peuvent être équipées de Sur-meubles à portes battantes (RA 35) ou coulissantes (RA 36), pour atteindre une hauteur de 2500 mm sous plafond.

Une Structure Métallique Robuste: Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

## Armoires Double-corps à Portes Pleines

Modèle présenté : DC 8305 "Portes Battantes Hautes et Portes Coulissantes Basses"  
Dimensions 1500 x 600 x 2100 mm

## Un Design Pratique et Esthétique :

Le meuble Haut, à portes battantes pleines de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demi-étagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins. Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Les portes battantes à charnières invisibles sont équipées de poignées filantes. En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et crémone 2 points.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, proposé en deux versions: à portes battantes ou à portes coulissantes. Il peut être équipé d'une serrure en option.

LES PANNEAUX MÉLAMINÉS DE 19 MM SERVANT À LA RÉALISATION DE NOS MEUBLES STANDARDS SONT STOCKÉS EN COULEUR GRIS CLAIR.

DES COULEURS DIFFÉRENTES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES SELON UN NUANCIER ADRESSÉ SUR DEMANDE, À PARTIR DE 3 MEUBLES COMMANDÉS SIMULTANÉMENT...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES DOUBLE-CORPS PORTES BATTANTES HAUTES ET BASSES - PROFONDEUR 600 MM</b>		
Armoire Double-Corps (PB/PB) 1200 x 600 x 2100 mm	DC 8002	967 €
Armoire Double-Corps (PB/PB) 1500 x 600 x 2100 mm	DC 8005	1069 €
<b>Les Double-Corps Portes Battantes Hautes et Basses - Profondeur 750 mm</b>		
Armoire Double-Corps (PB/PB) 1200 x 750 x 2100 mm	DC 8012	1 084 €
Armoire Double-Corps (PB/PB) 1500 x 750 x 2100 mm	DC 8015	1 202 €
<b>Les Double-Corps Portes Battantes Hautes / Coulissantes Basses - Profondeur 600 mm</b>		
Armoire Double-Corps (PB/PC) 1200 x 600 x 2100 mm	DC 8302	1 002 €
Armoire Double-Corps (PB/PC) 1500 x 600 x 2100 mm	DC 8305	1 100 €
<b>Les Double-Corps Portes Battantes Hautes / Coulissantes Basses - Profondeur 750 mm</b>		
Armoire Double-Corps (PB/PC) 1200 x 750 x 2100 mm	DC 8312	1 118 €
Armoire Double-Corps (PB/PC) 1500 x 750 x 2100 mm	DC 8315	1 235 €
<b>Les Serrures Optionnelles</b>		
Kit Serrure pour Portes Battantes (à l'unité)	DC 100	75 €
Kit Serrure pour Portes Coulissantes (à l'unité)	DC 300	101 €
<b>Les Sur-Meubles</b>		
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 600 x 400 mm	RA 35	285 €
Sur-Meuble d'Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 400 mm	RA 36	311 €




Lycée "Charles le Chauve" 77 Roissy en Brie

Salle de Sciences Physiques.

Un ensemble d'armoires double-corps est installé en linéaire le long du mur côté couloir...

Le choix d'armoires à portes coulissantes sur toute la hauteur s'est imposé afin de libérer totalement l'allée de circulation vers les portes de sortie...

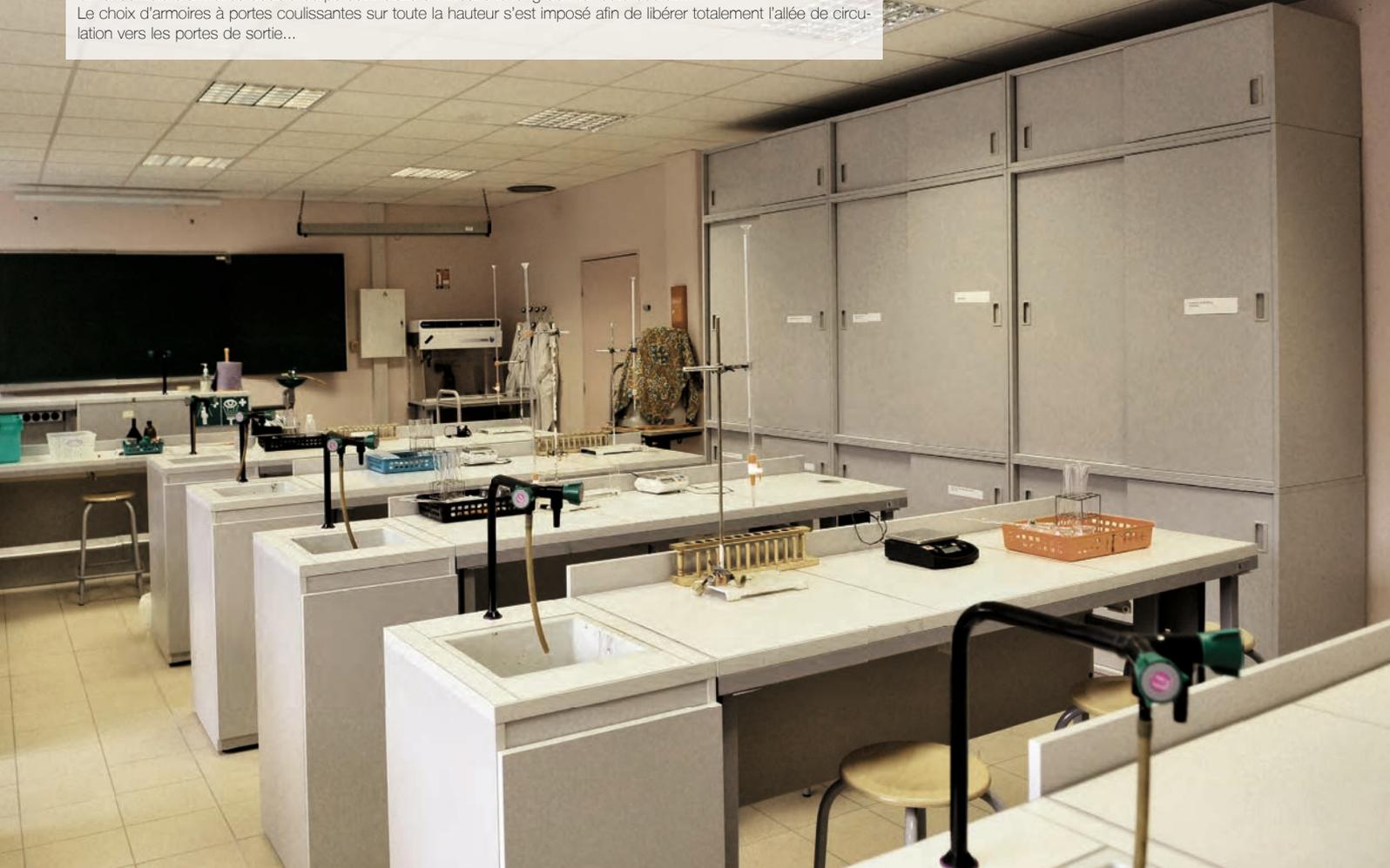

## LES ARMOIRES DOUBLE-CORPS

### A PORTES COULISSANTES

- Un choix de grands volumes de rangement
- Un concept de superposition garantissant leur stabilité et solidité
- Deux corps Indépendants multiplient les combinaisons d'agencement de votre espace



# LES ARMOIRES EN BOIS DE LABORATOIRE

Une Gamme d'Armoires de Collection, pour les Très Grands Volumes:

Les Armoires Double Corps Mobilab sont proposées en 2 Largeurs au choix 1200 mm ou 1500 mm et 2 Profondeurs 600 mm ou 750 mm. La partie supérieure est toujours de profondeur 600 mm.

Leur Hauteur est de 2100 mm. Elles peuvent être équipées de Sur-meubles à portes battantes (RA 35) ou coulissantes (RA 36), pour atteindre une hauteur de 2500 mm sous plafond.

Une Structure Métallique Robuste: Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Bordeaux ral 3004 en standard. Autres couleurs sur demande).

Armoires Double Corps à Portes Pleines Coulissantes  
Modèle présenté : DC 66312 "Portes Coulissantes Hautes et Portes Coulissantes Basses"  
Dimensions 1200 x 750 x 2100 mm

LES PANNEAUX MÉLAMINÉS DE 19 MM SERVANT À LA RÉALISATION DE NOS MEUBLES STANDARDS SONT STOCKÉS EN COULEUR GRIS CLAIR. DES COULEURS DIFFÉRENTES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES SELON UN NUANCIER ADRESSÉ SUR DEMANDE, À PARTIR DE 3 MEUBLES COMMANDÉS SIMULTANÉMENT...

Un Design Pratique et Esthétique:

Le meuble Haut, à portes pleines coulissantes de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demi-étagères réglables permettent la segmentation du volume selon vos besoins.

Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Les portes coulissantes sont équipées de poignées encastrées. En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, à portes coulissantes. Les meubles à portes peuvent être équipés d'une serrure en option.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES DOUBLE-CORPS PORTES COULISSANTES HAUTES ET PORTES COULISSANTES BASSES - PROFONDEUR 600 MM</b>		
Armoire Double-Corps (PC/PC) 1200 x 600 x 2100 mm	DC 66302	1 151 €
Armoire Double-Corps (PC/PC) 1500 x 600 x 2100 mm	DC 66305	1 199 €
<b>Les Double-Corps Portes Coulissantes Hautes et Portes Coulissantes Basses - Profondeur 750 mm</b>		
Armoire Double-Corps (PC/PC) 1200 x 750 x 2100 mm	DC 66312	1 255 €
Armoire Double-Corps (PC/PC) 1500 x 750 x 2100 mm	DC 66315	1 315 €
<b>Les Serrures Optionnelles</b>		
Kit Serrure pour Portes Coulissantes (à l'unité)	DC 300	101 €
<b>Les Sur-Meubles</b>		
Sur-Meuble d'Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 400 mm	RA 36	311 €

Lycée "Hector Berlioz" 94 Vincennes

Salle de préparation de Chimie.

En pourtour de Salle, des linéaires d'Armoires Double-Corps à Portes Vitrées sur Bahuts à Portes Battantes .

Un Ilot central constitué par la juxtaposition de bahuts et de Paillasse.



## LES ARMOIRES DOUBLE-CORPS

### A PORTES VITRÉES

- Un choix de grands volumes de rangement
- Un concept de superposition garantissant leur stabilité et solidité
- Deux corps Indépendants multiplient les combinaisons d'agencement de votre espace



# LES ARMOIRES EN BOIS DE LABORATOIRE

Ces armoires sont proposées en 2 profondeurs 600 mm ou 750 mm. Elles mesurent une hauteur totale de 2100 mm.

Le Métacrylate, est un matériau parfaitement transparent. Remplace avantageusement le verre, les risques de casse sont inexistant

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, proposé en deux versions: à portes battantes ou à portes coulissantes. Il peut être équipé d'une serrure en option.

Une structure métallique robuste  
Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps de l'armoire.

Les portes battantes sont équipées de charnières invisibles.  
En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et crémone 2 points.

Un Design Pratique et Esthétique:  
Le meuble Haut, à portes battantes pleines de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demi-étagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins. Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Armoires Double -corps à Portes Vitrées DC 9305  
Modèle présenté : Portes Battantes Vitrées Hautes et Portes Coulissantes Basses  
Dimensions 1500 x 600 x 2100 mm

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>LES DOUBLE-CORPS VITRÉS - PORTES BATTANTES HAUTES ET BASSES - PROFONDEUR 600 MM</b>		
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PB) 1200 x 600 x 2100 mm	DC 9002	1 183 €
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PB) 1500 x 600 x 2100 mm	DC 9005	1 286 €
<b>LES DOUBLE-CORPS VITRÉS - PORTES BATTANTES HAUTES ET BASSES - PROFONDEUR 750 MM</b>		
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PB) 1200 x 750 x 2100 mm	DC 9012	1 316 €
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PB) 1500 x 750 x 2100 mm	DC 9015	1 434 €
<b>LES DOUBLE-CORPS VITRÉS - PORTES BATTANTES HAUTES / COULISSANTES BASSES - PROFOND. 600 MM</b>		
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PC) 1200 x 600 x 2100 mm	DC 9302	1 234 €
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PC) 1500 x 600 x 2100 mm	DC 9305	1 333 €
<b>LES DOUBLE-CORPS VITRÉS - PORTES BATTANTES HAUTES / COULISSANTES BASSES - PROFOND. 750 MM</b>		
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PC) 1200 x 750 x 2100 mm	DC 9312	1 352 €
Armoire Vitrée Double-Corps (PB/PC) 1500 x 750 x 2100 mm	DC 9315	1 467 €
<b>Les Serrures Optionnelles</b>		
Kit Serrure pour Portes Battantes (à l'unité)	DC 100	75 €
Kit Serrure pour Portes Coulissantes (à l'unité)	DC 300	101 €
<b>Les Sur-Meubles</b>		
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 600 x 400 mm	RA 35	285 €
Sur-Meuble d'Armoire Portes Coulissantes 1200 x 600 x 400 mm	RA 36	311 €



LES PANNEAUX MÉLAMINÉS DE 19 MM SERVANT À LA RÉALISATION DE NOS MEUBLES STANDARDS SONT STOCKÉS EN COULEUR GRIS CLAIR. DES COULEURS DIFFÉRENTES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES SELON UN NUANCIER ADRESSÉ SUR DEMANDE, À PARTIR DE 3 MEUBLES COMMANDÉS SIMULTANÉMENT...

Lycée "Hector Berlioz" 94 Vincennes

Salle de préparation de Chimie.

En pourtour de Salle, des linéaires d'Armoires Double-Corps Vitrées sur Bahuts à Portes et Bahuts à Tiroirs

Un Ilot central constitué par la juxtaposition de bahuts et de Paillasses.



## LES ARMOIRES DOUBLE-CORPS

### SUR BAHUTS À TIROIRS

- Mixité des solutions de rangement : placard et tiroirs
- Un choix de grands volumes de rangement
- Mise en valeur des collections exposées



# LES ARMOIRES EN BOIS DE LABORATOIRE

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps de l'armoire.

Les Portes Vitrées sont en Métacrylate, matériau parfaitement transparent. Remplace avantageusement le verre, les risques de casse sont inexistant.

Les portes battantes sont équipées de charnières invisibles...  
En option, ces armoires peuvent être condamnées par serrures à clés et cré-mone 2 points.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, proposé en trois versions selon la largeur.

12 Tiroirs (2 Colonnes de 6 Tiroirs)  
15 Tiroirs (3 Colonnes de 5 Tiroirs)  
18 Tiroirs (3 Colonnes de 6 Tiroirs)

Le meuble Haut, à Portes Battantes Pleines ou à Portes Battantes Vitrées de Hauteur 1200 mm est aménagé de 4 Demi-étagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins. Des étagères supplémentaires sont proposées en option.

Ces armoires sont proposées en 2 profondeurs:  
- Réhausse 600 mm sur Bahut de 600 mm  
- Réhausse 600 mm sur Bahut de 750 mm  
Elles mesurent une hauteur totale de 2100 mm.

Armoires Double-corps à Portes Vitrées sur Bahut 18 Tiroirs DC 109718  
Dimensions au sol 1500 x 750 x 2100 mm

Une structure métallique robuste  
Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

LES PANNEAUX MÉLAMINÉS DE 19 MM SERVANT À LA RÉALISATION DE NOS MEUBLES STANDARDS SONT STOCKÉS EN COULEUR GRIS CLAIR. DES COULEURS DIFFÉRENTES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES SELON UN NUANCIER ADRESSÉ SUR DEMANDE, À PARTIR DE 3 MEUBLES COMMANDÉS SIMULTANÉMENT...

Descriptif (L x p x H mm)		Référence	Prix TTC
<b>LES DOUBLE-CORPS SUR BAHUTS À TIROIRS PROFONDEUR 600 MM</b>			
Armoire Portes Pleines sur Bahut 12 Tiroirs	1200 x 600 x 2100 mm	DC 108612	1 717 €
Armoire Portes Pleines sur Bahut 15 Tiroirs	1500 x 600 x 2100 mm	DC 108615	1 945 €
Armoire Portes Pleines sur Bahut 18 Tiroirs	1500 x 600 x 2100 mm	DC 108618	1 998 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 12 Tiroirs	1200 x 600 x 2100 mm	DC 109612	1 933 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 15 Tiroirs	1500 x 600 x 2100 mm	DC 109615	2 163 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 18 Tiroirs	1500 x 600 x 2100 mm	DC 109618	2 215 €
<b>Les Double-Corps sur Bahuts à Tiroirs Profondeur 750 mm</b>			
Armoire Portes Pleines sur Bahut 12 Tiroirs	1200 x 750 x 2100 mm	DC 108712	2 037 €
Armoire Portes Pleines sur Bahut 15 Tiroirs	1500 x 750 x 2100 mm	DC 108715	2 090 €
Armoire Portes Pleines sur Bahut 18 Tiroirs	1500 x 750 x 2100 mm	DC 108718	2 217 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 12 Tiroirs	1200 x 750 x 2100 mm	DC 109712	2 268 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 15 Tiroirs	1500 x 750 x 2100 mm	DC 109715	2 291 €
Armoire Portes Vitrées sur Bahut 18 Tiroirs	1500 x 750 x 2100 mm	DC 109718	2 451 €
<b>Les Serrures Optionnelles</b>			
Kit Serrure pour Portes Battantes (à l'unité)		DC 100	75 €





Lycée "Richelieu" 92 Rueil-Malmaison  
Salle de préparation de Chimie.  
En pourtour de Salle, des linéaires d'Armoires Triple-Corps Vitrées sur Bahuts à Portes coulissantes  
Un îlot central constitué par la juxtaposition de bahuts et de Paillasse.



## LES MODULES POUR ARMOIRES TRIPLE-CORPS

### MULTIPLIEZ LES COMBINAISONS

- Un choix de grands volumes de rangement
- Un concept de superposition garantissant leur stabilité et solidité
- Trois corps Indépendants multiplient les combinaisons d'agencement de votre espace
- Avantage du 3<sup>ème</sup> module, facilement accessible à seulement 1,60 m



## BAHUTS FORTE PORTÉE POUR TRIPLE CORPS

Pour composer des meubles triple corps 2 critères sont à respecter :

- Une hauteur globale des 3 modules adaptée aux hauteurs sous plafond ou faux plafond des salles

- Une capacité de portance élevée du Bahut Porteur

Les Bahuts de cette gamme, sont spécifiquement conçus en 850 mm sur structure métallique renforcée et filletage de vérins adaptés pour une haute résistance au poids.

La hauteur globale d'un triple corps atteint ainsi 2450 mm avant réglage des vérins, pour une hauteur maximum de 2500 mm.

Deux largeurs de bahuts: 1200 mm ou 1500 mm

Deux profondeurs de bahuts: 600 mm ou 750 mm pour les objets de très grandes dimensions (rhéostats, moteurs, maquettes pédagogiques...)

La gamme se décline en bahuts à Portes Coulissantes, bahuts à portes Battantes, ou Bahuts à 12 tiroirs (2 colonnes 6; peuvent être réalisés sur mesures en 2 x 5 ou 2 x 4 Tiroirs plus profonds)

Le caisson des modèles à porte est segmenté en 2 compartiments par un refend central. Il est équipé de 2 Etagères réglables au pas de 2,5 cm.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>BAHUTS À PORTES COULISSANTES POUR TRIPLE-CORPS P=600 MM</b>		
Bahut Portes Coulissantes 1200 x 600 x 850 mm	TRCB 5122	573 €
Bahut Portes Coulissantes 1500 x 600 x 850 mm	TRCB 5152	607 €
<b>BAHUTS À PORTES COULISSANTES POUR TRIPLE-CORPS P=750 MM</b>		
Bahut Portes Coulissantes 1200 x 750 x 850 mm	TRCB 5322	624 €
Bahut Portes Coulissantes 1500 x 750 x 850 mm	TRCB 5352	674 €
<b>BAHUTS À PORTES BATTANTES POUR TRIPLE-CORPS P=600 MM</b>		
Bahut Portes Battantes 1200 x 600 x 850 mm	TRCB 6122	573 €
Bahut Portes Battantes 1500 x 600 x 850 mm	TRCB 6152	607 €
<b>BAHUTS À PORTES BATTANTES POUR TRIPLE-CORPS P=750 MM</b>		
Bahut Portes Battantes 1200 x 750 x 850 mm	TRCB 6322	624 €
Bahut Portes Battantes 1500 x 750 x 850 mm	TRCB 6352	674 €
<b>BAHUTS À 12 TIROIRS POUR TRIPLE-CORPS P=600 MM</b>		
Bahut 12 Tiroirs 1200 x 600 x 850 mm	TRCB 7122	1 323 €
Bahut 12 Tiroirs 1500 x 600 x 850 mm	TRCB 7152	1 536 €
<b>BAHUTS À 12 TIROIRS POUR TRIPLE-CORPS P=750 MM</b>		
Bahut 12 Tiroirs 1200 x 750 x 850 mm	TRCB 7322	1 578 €
Bahut 12 Tiroirs 1500 x 750 x 850 mm	TRCB 7352	1 690 €

## LES MODULES "REHAUSSES" POUR TRIPLE CORPS

Pour composer des meubles triple corps de critères sont à respecter :

Les modules réhausse de cette gamme, sont spécifiquement conçus en 800 mm.

La hauteur globale d'un triple corps atteint ainsi 2450 mm avant réglage des vérins, pour une hauteur maximum de 2500 mm.

Deux largeurs de rehausse: 1200 mm ou 1500 mm

Une profondeur unique de rehausse: 600 mm.

La gamme se décline en Rehausses à Portes Coulissantes, Rehausses à portes Battantes, Rehausses à portes Vitrées, ou Réhausse Bibliothèque...

Tous les modules peuvent être associés indifféremment...

Le caisson des rehausses est segmenté en 2 compartiments par un refend central. Il est équipé de 2 Etagères réglables au pas de 2,5 cm.



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
<b>REHAUSSE BIBLIOTHÈQUE POUR TRIPLE-CORPS H=800 MM</b>		
Rehausse Bibliothèque 1200 x 600 x 800 mm	TRCH 8027	310 €
Rehausse Bibliothèque 1500 x 600 x 800 mm	TRCH 8057	348 €
<b>REHAUSSE À PORTES COULISSANTES POUR TRIPLE-CORPS H=800 MM</b>		
Rehausse à Portes Coulissantes 1200 x 600 x 800 mm	TRCH 8522	418 €
Rehausse à Portes Coulissantes 1500 x 600 x 800 mm	TRCH 8552	453 €
<b>REHAUSSE À PORTES BATTANTES POUR TRIPLE-CORPS H=800 MM</b>		
Rehausse à Portes Battantes 1200 x 600 x 800 mm	TRCH 8622	383 €
Rehausse à Portes Battantes 1500 x 600 x 800 mm	TRCH 8652	424 €
<b>REHAUSSE À PORTES BATTANTES VITRÉES POUR TRIPLE-CORPS H=800 MM</b>		
Rehausse à Portes Battantes Vitrées 1200 x 600 x 800 mm	TRCH 8627	383 €
Rehausse à Portes Battantes Vitrées 1500 x 600 x 800 mm	TRCH 8657	424 €

## LES ACCESSOIRES DE "CUSTOMISATION"

Amusez vous avec nos options de Customisation, afin de créer votre espace selon vos goûts...

Choisissez la Couleur des Façades de Tiroirs et Portes (en standard les meubles sont livrés en panneaux Gris Clair, sur structure métallique Gris 7040)... pour cela il vous suffit de nous demander le nuancier des «unis» disponibles

(Au minimum 3 meubles de couleur identique; le caisson est toujours gris clair)

Choisissez nos poignées «Acier Brossé» pour un fini plus design...

Pensez aux serrures de portes pour les équipements que vous souhaitez mettre d'avantage à l'abri...

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Option Panneaux de Façades en Couleur (surcoût par module)	TRCH UNI	12 €
Poignées Design Acier Brossé (à l'unité)	TRCH POI	4,50 €
Kit Serrures pour 2 portes battantes	TRCH 100	44 €
Kit Serrures pour 2 portes coulissantes	TRCH 300	81 €



## LES MEUBLES

### SOUS PAILLASSES

- Proposés en 2 versions à portes ou à tiroirs
- A glisser sous les paillasses
- Combinaisons murales multiples en tailles et modèles

Poignée Filante.  
Les portes peuvent être équipées de serrures en option



Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasses murales



Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constitue le corps du meuble



# LES MEUBLES SOUS PAILLASSES



4 Roulettes monodirectionnelles permettent de déplacer les meubles pour le nettoyage sous paillasses

Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasses murales

La hauteur des meubles sous paillasses est normalisée à 700 mm pour un éventuel bandeau avant.



Les tiroirs sont de profondeur 150 mm.

La façades est complétée d'une poignée filante.

Les Tiroirs sont montés sur glissières métalliques à galets téflon.



Nouveau... Les meubles sous paillasses Mixtes équipés d'une partie placard et d'un tiroir au dessus du Placard. Ils sont proposés en largeur 600 ou 800 mm...

Un meuble mixte 1 porte et 4 Tiroirs est proposé en largeur 900 mm... (Modèle non photographié)



**NOUVEAU**

## LES MEUBLES SOUS PAILLASSES - HAUTEUR 700 MM

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES À PORTES</b>		
Meuble 1 Porte - 510 x 450 x 700 mm	RP 101	232 €
Meuble 2 Portes - 600 x 450 x 700 mm	RP 102	246 €
Meuble 2 Portes - 700 x 450 x 700 mm	RP 103	305 €
Meuble 2 Portes - 850 x 450 x 700 mm	RP 104	320 €
Meuble 2 Portes - 1020 x 450 x 700 mm	RP 105	352 €
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES À TIROIRS</b>		
Meuble 4 Tiroirs - 510 x 450 x 700 mm	RP 201	398 €
Meuble 4 Tiroirs - 600 x 450 x 700 mm	RP 202	427 €
Meuble 4 Tiroirs - 700 x 450 x 700 mm	RP 203	461 €
Meuble 4 Tiroirs - 850 x 450 x 700 mm	RP 204	510 €
Meuble 4 Tiroirs - 1020 x 450 x 700 mm	RP 205	567 €
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES MIXTES PORTE / TIROIR</b>		
Meuble 1 Porte/ 1 Tiroir - 600 x 450 x 700 mm	RP 282	369 €
Meuble 2 Portes/ 1 Tiroir - 800 x 450 x 700 mm	RP 284	393 €
Meuble 1 Porte/ 4 Tiroirs - 900 x 450 x 700 mm	RP 286	617 €

## LES MEUBLES SOUS PAILLASSES - HAUTEUR 800 MM

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES À PORTES</b>		
Meuble 1 Porte - 510 x 450 x 800 mm	RP 8101	266 €
Meuble 2 Portes - 600 x 450 x 800 mm	RP 8102	283 €
Meuble 2 Portes - 700 x 450 x 800 mm	RP 8103	350 €
Meuble 2 Portes - 850 x 450 x 800 mm	RP 8104	368 €
Meuble 2 Portes - 1020 x 450 x 800 mm	RP 8105	396 €
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES À TIROIRS</b>		
Meuble 4 Tiroirs - 510 x 450 x 800 mm	RP 8201	437 €
Meuble 4 Tiroirs - 600 x 450 x 800 mm	RP 8202	468 €
Meuble 4 Tiroirs - 700 x 450 x 800 mm	RP 8203	499 €
Meuble 4 Tiroirs - 850 x 450 x 800 mm	RP 8204	550 €
Meuble 4 Tiroirs - 1020 x 450 x 800 mm	RP 8205	598 €
<b>MEUBLES SOUS PAILLASSES MIXTES PORTE / TIROIR</b>		
Meuble 1 Porte/ 1 Tiroir - 600 x 450 x 800 mm	RP 8282	399 €
Meuble 2 Portes/ 1 Tiroir - 800 x 450 x 800 mm	RP 8284	432 €
Meuble 1 Porte/ 4 Tiroirs - 900 x 450 x 800 mm	RP 8286	678 €

# LES ARMOIRES TABLEAUX

## SIMPLE CORPS A PORTES BATTANTES

- L'Armoire devient tableau et la salle s'agrandit...
- Une surface magnétique et scriptible encastrée dans la porte
- Le professeur dispose de rangements immédiatement accessibles

**Une surface blanche magnétique qui favorise le contraste pour un Excellent Confort de Lecture, d'écriture au marqueur et d'Effaçage à sec**

Ces armoires sont en panneaux de mélaminé haute densité de 19 mm d'épaisseur.

Les portes sont en stratifié contrebalancé, montées sur charnières invisibles et munies d'une poignée serrure à crémonne 3 points. La porte gauche peut être maintenue fermée par crochet flexible.


Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire

Les Armoires Tableaux sont proposées en 2 profondeurs 450 mm et 600 mm permettant de ranger les objets les plus encombrants.

Un panneau de refend rigidifie l'armoire dans sa hauteur segmentant l'espace en 2 volumes identiques.

Les armoires peuvent être sur-montées de sur-meubles à portes pleines de hauteur 400 mm, ce qui porte la hauteur totale de l'armoire à 2400 mm

Ces armoires sont équipées de 8 étagères en mélaminé de 19 mm de forte portée.

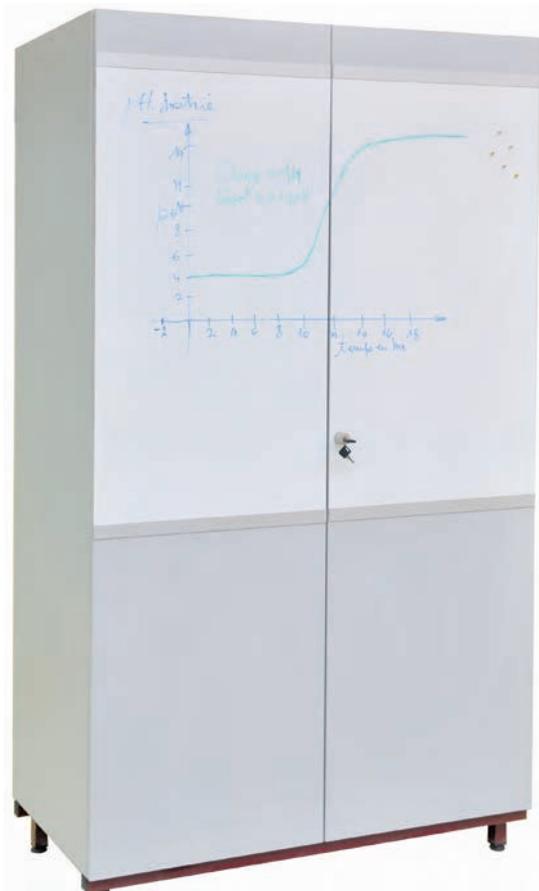

**Armoires à Portes Battantes "Tableaux"**  
Dimensions 1200 x 600 x 2000 mm  
(hauteur 2400 mm avec sur-meuble optionnel)

Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Armoire Tableau 1200 x 450 x 2000 mm	RA 820	788 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 450 x 400 mm	RA 435	260 €
Armoire Tableau 1200 x 600 x 2000 mm	RA 830	855 €
Sur-Meuble d'Armoire 1200 x 600 x 400 mm	RA 35	285 €

# LES ARMOIRES TABLEAUX

## DOUBLE CORPS À PORTES COULISSANTES

- Des panneaux de tableaux coulissants constituent les portes de l'armoire
- Une grande surface émaillée blanche magnétique
- Un grand volume de rangement

### Surface en acier vitrifié et émaillé à 800°.

Technique garantissant le contraste des tableaux pour un confort d'écriture, de lecture et d'effaçage; ainsi qu'une très grande résistance pour un usage intensif

Leur Hauteur est de 2100 mm. Elles peuvent être équipées d'une casquette porte Ecran ou Luminaires (Ecrans et Luminaires sont à commander séparément)

### Un Design Pratique et Esthétique :

Le meuble Haut, à portes coulissantes "Tableaux" de Hauteur 1200 mm est équipé de 4 Demi-étagères réglables permettant la segmentation du volume selon vos besoins.

Surface émaillée blanche, pour écriture au marqueur effaçable à sec et affichage magnétique. (Surfaces vertes pour la craie sur devis)...

Double rail en aluminium dans lequel peuvent coulisser 1 à 4 panneaux montés sur galets suivant le modèle choisi.

Le meuble bas est un bahut de hauteur 900 mm, à portes coulissantes.

### Une Structure métallique robuste :

Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise de l'armoire. (Gris RAL 7040 en standard. Autres couleurs sur demande).



Collège Louis Pergaud - 88 Châtel Sur Moselle. Projet réalisé en Partenariat avec le Conseil Général de Vosges.  
Armoires Double-corps à Portes Coulissantes "Tableaux"  
Modèle présenté :  
Dimensions 4500 x 600 x 2100 mm avec Option casquette porte écran...  
Composé par association de 3 Armoires DC 11345

### Une Gamme d'armoires, pour les Très Grands Volumes...

Les Armoires Double-corps Tableaux sont composées d'un bahut de profondeur 600 mm et d'une rehausse de profondeur 500 mm. Tableaux de Hauteur 1200 mm. 2 Largeurs ont été sélectionnées 1200 et 1500 mm. Grande surface d'écriture, d'affichage et de projection. Toutes dimensions peuvent être étudiées...



### Coloris des Panneaux



### Coloris des Structures Métalliques



Descriptif (L x p x H mm)	Référence	Prix TTC
Module Armoire Double Corps "Tableau" 1200 x 600 x 2100 mm	DC 11336	1686 €
Module Armoire Double Corps "Tableau" 1500 x 600 x 2100 mm	DC 11345	1923 €
Casquette porte écran - 1200 mm	DC 11300	98 €
Casquette porte écran - 1500 mm	DC 11305	112 €

# ARMOIRES A TIROIRS VERTICAUX

## EN BOIS & EN MÉTAL

- Des équipements modulables pour satisfaire tous les besoins
- Un concept de rangement très pratique
- Tiroirs verticaux à extraction totale pour un accès facilité aux produits stockés

Serrure individuelle optionnelle

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps de l'armoire.

L'Armoire est équipée de 5 étagères, 2 d'entre elles sont solidaires de la porte, les 3 autres sont libres...

Armoire Tiroir Vertical - Bois  
Module simple de dimensions 600 x 600 x 2000 mm.  
4 Etagères  
Dimensions Utiles d'une étagère 500 x 550 x 50 mm.



Roulette stabilisatrice très forte portée.

Les modules se juxtaposent pour composer des linéaires de rangement

Modèle proposé en 2 largeurs de Profondeur unique 600 mm



Une chaise métallique en tubes carrés soudés, munie de vérins de mise à niveau supporte la parfaite assise des armoires bois et métalliques

Construction en Acier 10/10ème, Peinture Epoxy Blanche ral 9010

Les modules se juxtaposent pour composer des linéaires de rangement

Armoire Tiroir Vertical - Métallique  
Module simple de dimensions 560 x 500 x 1825 mm.  
4 Etagères  
Dimensions Utiles d'une étagère 435 x 445 x 50 mm.  
Ci-contre, linéaire de 2 modules simples...



Serrure individuelle optionnelle

Etagère hauteur 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères

Porte/Tiroir sur rails coulissants hauts et bas. Roulette stabilisatrice très forte portée.

LES PANNEAUX MÉLAMINÉS DE 19 MM SERVANT À LA RÉALISATION DE NOS MEUBLES STANDARDS SONT STOCKÉS EN COULEUR GRIS CLAIR.  
DES COULEURS DIFFÉRENTES PEUVENT ÊTRE PROPOSÉES SELON UN NUANCIER ADRESSÉ SUR DEMANDE, À PARTIR DE 3 MEUBLES COMMANDÉS SIMULTANÉMENT...

Descriptif	Référence	Prix TTC
Module Simple - Métallique	560 x 500 x 1825 mm	AMT 661 1162 €
Module Simple - Bois	450 x 600 x 2000 mm	AMT 8610 917 €
Module Simple - Bois	600 x 600 x 2000 mm	AMT 8611 948 €
Kit Serrure Optionnel	DC 100	75 €

# MEUBLES

## À PLANS & CARTES

- Des solutions de classement à plat ou de classement vertical
- Pour tous les documents (cartes, plans, planches et affiches) de format A1 ou A0
- Des équipements modulables pour satisfaire tous les besoins



Dimensions extérieures d'un ensemble de 10 tiroirs avec socle fixe  
Modèle A0 : 1400 x 965 x 970 mm  
Hauteur 1050 mm en version mobile

Classement Horizontal sur Socle Fixe  
Modules de 5 Tiroirs superposables en tôle d'acier.  
Glissières montées sur roulements à billes.  
Formats A0 ou A1.  
Options : Dessus et socle  
Proposés en Versions 7 Tiroirs ou 10 Tiroirs

Une serrure centralise la fermeture d'un module

Les modules sont superposables, pour constituer un ensemble de 10 tiroirs à 14 tiroirs

Modules de 5 ou 7 tiroirs, de construction monobloc en acier 12/10 ème peint époxy.

Chaque tiroir est conçu pour ranger à plat, planches, cartes, posters, jusqu'au format A0.  
Hauteur utile des tiroirs : 55 mm

Le Top et le Socle fixes ou mobiles, sont vendus séparément pour permettre de composer des équipements adaptés au besoins de chacun

Des glissières à roulement à billes et butées d'arrêt assurent une manipulation facile des tiroirs



Socle à 4 pieds hauteur 530 mm en acier

### Dimensions :

- 5 Tiroirs A1 : 1130 x 795 x 420 mm (tiroirs utiles 1030 x 730 x 55 mm)
- 5 Tiroirs A0 : 1400 x 965 x 420 mm (tiroirs utiles 1300 x 920 x 55 mm)
- Hauteur du 7 Tiroirs A1 : 575 mm
- Hauteur du 7 Tiroirs A0 : 575 mm

Descriptif	Référence	Prix TTC
Module 5 Tiroirs A0 Horizontal sans Top	RA 9805	1 199 €
Module 5 Tiroirs A0 Horizontal avec Top	RA 9806	1 343 €
Module 5 Tiroirs A1 Horizontal sans Top	RA 9820	1 091 €
Module 5 Tiroirs A1 Horizontal avec Top	RA 9821	1 199 €
Module 7 Tiroirs A0 sans Top	RA 9833	1594 €
Module 7 Tiroirs A0 Horizontal avec Top	RA 9830	1 752 €
Module 7 Tiroirs A1 sans Top	RA 9835	1492 €
Module 7 Tiroirs A1 Horizontal avec Top	RA 9831	1 580 €
Socle Fixe pour Meuble à Cartes A0	RA 9810	138 €
Socle Fixe pour Meuble à Cartes A1	RA 9811	138 €
Socle à Roulettes pour Meuble à Cartes A0	RA 9812	288 €
Socle à Roulettes pour Meuble à Cartes A1	RA 9813	288 €
Socle à 4 pieds pour Meubles à Cartes A0	RA 9817	298 €
Socle à 4 pieds pour Meubles à Cartes A1	RA 98118	298 €
<b>Meubles 10 tiroirs complets</b>	<b>Référence</b>	<b>Prix TTC</b>
Meuble 10 Tiroirs A0 Horizontal / Socle Fixe	RA 9860	2 560 €
Meuble 10 Tiroirs A1 Horizontal / Socle Fixe	RA 9861	2 320 €
Meuble 10 Tiroirs A0 Horizontal / Socle Mobile	RA 9865	2 736 €
Meuble 10 Tiroirs A1 Horizontal / Socle Mobile	RA 9866	2 510 €



Socle mobile optionnel, équipé de 4 roues forte portée dont 2 avec frein

Chaque tiroir est équipé d'un porte étiquette et d'une poignée.



# LE SYSTÈME GRATNELL'S

## UN CONCEPT UNIQUE

- Un concept unique de classement et de distribution
- Une solution globale pensée pour les préparateurs de laboratoire
- Une organisation synoptique par couleurs

# CHARIOTS & RAYONNAGES

## GRATNELL'S SYSTÈME

*Le système Mobilab Gratnell's a été conçu pour répondre aux problèmes d'organisation et de rangement au laboratoire que ce soit en salle de préparation, en salle de technologie ou en salle banalisée.*

Le rangement obtenu par le jeu des couleurs facilite le classement des objets, et la préparation des travaux pratiques.

### Des Bacs et des Accessoires Astucieux

Un bac F2 occupe l'espace de 2 bacs F1; un bac F3 occupe l'espace de 2 bacs F2.

Les bac-tiroirs sont emboîtables et superposables par inversion.

Ces bacs sont munis d'arrêtoirs évitant leur basculement arrière dans les chariots et les rayonnages, et de renforts du fond pour une solidité accrue.

Des séparations, adhésives permettent de segmenter les bacs F1 en casiers et des couvercles translucides peuvent protéger le contenu des bacs de la poussière ou du renversement

### Ces bacs sont proposés en 3 tailles complémentaires :

- Les Petits Bacs "Format F1" de dimensions 312 x 427 x 75 mm
- Les Bacs Moyens "Format F2" de dimensions 312 x 427 x 150 mm
- Les Grands Bacs "Format F3" de dimensions 312 x 427 x 300 mm

Les chariots et rayonnages sont construits en tubes d'acier carrés de 25 mm de section, munis d'encoches au pas de 25 mm, permettant la fixation de coulisses destinées à recevoir des bac-tiroirs.

Toutes les pièces métalliques sont dégraissées, phosphatées et revêtues de peinture époxy gris mat.

Chaque meuble est livré à plat associé à une notice de montage permettant d'assembler facilement et rapidement chariots et rayonnages.

Les rayonnages fournis en double ou triple colonnes de hauteur 1500 ou 1850 mm sont adaptés aux réserves les plus exigües.

Les chariots mono, double ou triple colonnes ont été imaginés pour faciliter leur passage par les couloirs, les portes et travées les plus étroits.

Ainsi il suffit par exemple de transporter à l'aide des chariots les bacs de même couleur prélevés dans les rayonnages, afin de faciliter la distribution par destination de travaux pratiques, ou par type de manipulations

### Des Chariots et des Rayonnages

L'originalité du système résulte de la complémentarité de deux concepts: le classement et la distribution.

Le classement est assuré par des rayonnages aménagés de bac-tiroirs amovibles.

La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques aux bacs qui aménagent les rayonnages.

### Les Bac-tiroirs

Extrêmement robustes, ils sont réalisés en polypropylène moulé avec additif de talc à 20% (retard de combustibilité), ils sont autoclavables, anti-statiques, résistants aux agents chimiques de laboratoire tolérés par les polystyrènes, ils supportent une température allant jusqu'à 108°C, et les pigments utilisés dans le large éventail de couleurs sont sans cadmium.




# CHARIOTS & RAYONNAGES

## GRATNELL'S

### Gratnell's System

Une solution originale et complémentaire de rangement et de préparation en laboratoire, salle de technologie, ou salle banalisée...  
La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques à ceux qui aménagent les rayonnages et les armoires.

Les chariots et Rayonnages sont constitués d'une ossature en tube d'acier peint époxy au choix : Gris ou Blanc

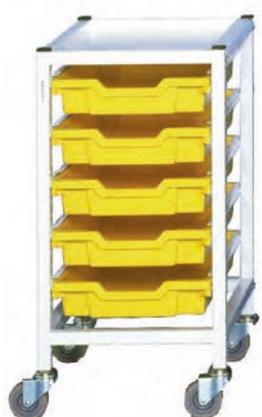

**Chariot Simple Colonne**  
L = 370 x p = 420 x H = 850 mm



**Chariot Triple Colonne**  
L = 1055 x p = 420 x H = 725 ou 850 mm



**Chariot Double Colonne**  
L = 710 x p = 420 x H = 725 ou 850 mm

Les chariots sont proposés en standard en hauteur 850 mm. Les Chariots Double et Triple Colonnes sont proposés au choix en 725 mm pour se glisser sous les paillasses, ou 850 mm (sans précisions, ils sont automatiquement livrés en 850 mm)



**Rayonnage Double Colonne**  
L = 710 x p = 420 x H = 1850 mm



**Rayonnage Triple Colonne**  
L = 1055 x p = 420 x H = 1850 mm

Les Rayonnages sont proposés en double ou triple colonnes, ils s'adaptent aux salles de préparation les plus exigües.

Vous équipez vos Chariots et Rayonnages avec le type de bac-tiroirs de votre choix en Tailles et Couleurs ou étagères métalliques.  
*N'oubliez pas de commander une paire de coulisses par bac...*

Les Chariots et Rayonnages sont livrés à plat, associés à une notice de montage, avec plateau supérieur, et roulettes (sur les chariots seulement). Ils sont livrés Vides.  
Pensez à commander les Bac-Tiroirs et les paires de coulisses nécessaires...

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Chariots Gratnell's Système</b>		
Chariot Simple Colonne H = 850 mm	RG 1825	239 €
Chariot Double Colonne H = 850 mm	RG 2825	299 €
Chariot Double Colonne H = 725 mm	RG 2525	299 €
Chariot Triple Colonne H = 850 mm	RG 3825	330 €
Chariot Triple Colonne H = 725 mm	RG 3525	330 €
<b>Les Chariots Gratnell's - Solutions Pré-équipées* OFFRE SPÉCIALE **</b>		
Chariot Double Colonne H = 850 mm + 9 Bacs (6 F1R + 3 F2B)	RGP 2925	348 €
Chariot Triple Colonne H = 850 mm + 15 Bacs (12 F1R + 3 F2B)	RGP 3925	410 €
<b>Les Rayonnages Gratnell's Système</b>		
Rayonnage Double Colonne	RG 12625	333 €
Rayonnage Triple Colonne	RG 13625	409€

\*Les produits pré-équipés en « OFFRE SPÉCIALE » ne peuvent être soumis à aucune remise complémentaire. Ils sont systématiquement équipés de bacs rouges et bleus.

# LES BACS-TIROIRS

## POUR CHARIOTS ET RAYONNAGES GRATNELL'S

### Les Bac-Tiroirs

Permettant le regroupement, le classement et la distribution, les bac-tiroirs proposent une solution «Géniale» de rangement...comment ne pas y avoir pensé avant ?  
Existant en 3 tailles F1, F2, F3, ils permettent de ranger la majeure partie des matériels, des plus petits (composants, échantillons...) aux plus encombrants (capteurs, interfaces, flacons...).

La diversité des couleurs (translucide, rouge, jaune, vert et bleu) permet un classement par thème.

Forte épaisseur 2,4 mm et renforts latéraux pour une excellente résistance mécanique.

Renforts de fond rendant le bac-tiroir indéformable

Moulage en polypropylène anti-statique, résistant à la majorité des produits chimiques, stérilisable à 108°C, peu combustible du fait de la teneur en talc. Fond parfaitement plat.

Bordure renforcée pour un appui parfait sur les glissières des armoires et chariots

Poignée à dégagement pour contrôle visuel



Bac F1 profondeur 75 mm  
312 x 427 x 75 mm



Bac F2 profondeur 150 mm  
312 x 427 x 150 mm




Bac F3 profondeur 300 mm  
312 x 427 x 300 mm

### Evolutifs

Des accessoires permettent d'optimiser le rangement et de diversifier l'utilisation des bac-tiroirs. Les inserts compartimentés permettent le regroupement des objets de petite taille. Le couvercle translucide permet de transformer les bac-tiroirs en coffrets et de protéger le contenu des bacs de la poussière ou des liquides.



Tailles substituables 4 F1 = 2 F2 = 1 F3 !

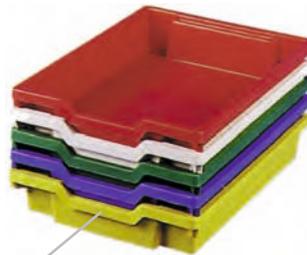


Encastrables



Superposables

Paire de Couliasses  
Une paire est nécessaire par bac commandé

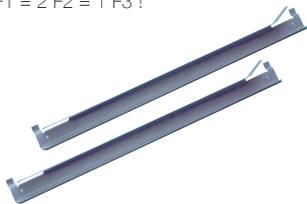

Couvercle Transparent  
Se clipse sur tous les bacs de la gamme

Translucide

Rouge

Jaune

Vert

Bleu

\*Couleur des Bacs à Préciser (1 lot est de coloris uni)

Les bacs sont aussi proposés à l'unité dans la rubrique « Rangetout »

Descriptif	Référence	Prix TTC
Lot de 6 Bacs profondeur 75 mm	RG F1*	40 €
Lot de 3 Bacs profondeur 150 mm	RG F2*	40 €
Lot de 2 Bacs profondeur 300 mm	RG F3*	40 €
Paire de Couliasses Métalliques	RG 360	7 €
Etagère Acier (l'unité)	RG 361	24 €
Lot de 6 Couvercles Translucides	RG 370	25 €
Lot de 3 Inserts à 3 Alvéoles	RG 13	24 €
Lot de 3 Inserts à 4 Alvéoles	RG 14	24 €
Lot de 3 Inserts à 6 Alvéoles	RG 16	24 €
Lot de 3 Inserts à 8 Alvéoles	RG 18	24 €



Inserts de Segmentation pour Bacs F1



Dans une réserve de chimie, le rangement des flacons dans des bacs translucides permet une vision rapide des produits disponibles dans des conditions de sécurité accrues...



Optimisez l'espace libre sous un linéaire de travail. Les chariots s'intègrent côte à côte...





Les rayonnages et chariots Gratnells sont disponibles dans plusieurs hauteurs et largeurs .  
Ils offrent une meilleure utilisation de l'espace que de simples étagères .

Un chariot bien adapté pour chaque utilisation.





Clinique de Bercy - 94220 Charenton-le-Pont  
Meuble rangement installé dans le bloc opératoire

## LES MEUBLES RANGETOUT

### À BACS À TIROIRS

- Ranger, Classer, Repérer...
- Une Infinité de Solutions de Rangement: Caisson Fixes, Mobiles à 1, 2 ou 3 Colonnes, Armoires Ouvertes ou Fermées
- Concevez votre Meuble selon vos besoins



# LES MEUBLES "RANGETOUT"

Caisson en mélaminé de 19 mm gris clair ou hêtre naturel avec chants PVC rigides



**Rangetout Simple Colonne**  
L = 350 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,  
en version fixe ou mobile

Les Modèles de Hauteur 700 mm sont équipés de 6 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 6 Bacs F1 ou de 3 Bacs F2 ou de toutes les combinaisons possibles de bacs F1, F2, F3 de la gamme...



**Rangetout Double Colonne**  
L = 700 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,  
en version fixe ou mobile

Les Meubles Rangetout sont livrés vides à équiper de bacs F1, F2 ou F3, en fonction de vos besoins...

Les glissières sont prémontées pour permettre toutes les combinaisons de bacs

Les Modèles de Hauteur 800 mm sont équipés de 8 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 8 Bacs F1 ou de 4 Bacs F2 ou 2 F3



**Armoire Rangetout Triple Colonne Ouverte**  
L = 1050 x p = 470 x H = 2100 mm



Equipé de roulettes, ils se glissent sous les plans de travail...

**Rangetout Triple Colonne**  
L = 1050 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,  
en version fixe ou mobile

Les parois sont équipées de glissières en PVC rigide sur lesquelles coulisent les bacs

**Armoire Rangetout Triple Colonne à Portes Battantes**  
L = 1050x p = 470 x H = 2100 mm



Descriptif	Référence	Prix TTC	Référence	Prix TTC	
<b>Les "Rangetout" Fixes - Vides</b>		<b>Hauteur 700 mm</b>		<b>Hauteur 800 mm</b>	
Rangetout 1 Colonne	350 x 470 x H mm	RTV 7010	148 €	RTV 8010	166 €
Rangetout 2 Colonnes	700 x 470 x H mm	RTV 7020	208 €	RTV 8020	232 €
Rangetout 3 Colonnes	1050 x 470 x H mm	RTV 7030	258 €	RTV 8030	287 €
Rangetout 4 Colonnes	1400 x 470 x H mm	RTV 7040	358 €	RTV 8040	394 €
<b>Les "Rangetout" Mobiles - Vides</b>					
Rangetout 1 Colonne	350 x 470 x H mm	RTV 7110	194 €	RTV 8110	210 €
Rangetout 2 Colonnes	700 x 470 x H mm	RTV 7120	255 €	RTV 8120	277 €
Rangetout 3 Colonnes	1050 x 470 x H mm	RTV 7130	306 €	RTV 8130	328 €
Rangetout 4 Colonnes	1400 x 470 x H mm	RTV 7140	412 €	RTV 8140	444 €

Les Armoires "Rangetout" - Vides	Référence	Prix TTC
Armoire Ouverte 3 Colonnes	RTV 7230	686 €
Armoire 3 Colonnes à Portes	RTV 7430	830 €

PLUS D'INFORMATIONS...

RETROUVEZ LES BAC-TIROIRS EN PAGE SUIVANTE...  
AINSI QUE LES AUTRES MODÈLES DE LA GAMME.

# DESSERTES RANGETOUT

## À BACS À TIROIRS

Les Armoires et Dessertes Rangetout sont livrées vides à équiper de bacs F1, F2 ou F3, en fonction de vos besoins...

Ces Modèles sont équipés de 6 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 6 Bacs F1 ou de 3 Bacs F2 ou de toutes les combinaisons possibles de bacs F1, F2, F3 de la gamme...



**Desserte Rangetout Triple Colonne**  
L = 1190 x p = 600 x H = 900 mm,  
Plateau Supérieur Mélaaminé...

Ce sont des mobiliers de très forte portée grâce à une structure métallique mécano-soudée.

En option, les dessertes peuvent être revêtues de différents types de plateaux: Grès, Verre, Stratifié...demandez nous un devis.



Couvercles translucides clipsables sur tous les bacs en option



Les bacs F1 peuvent être équipés en option d'inserts de segmentation



**Desserte Rangetout Simple Colonne**  
L = 435 x p = 600 x H = 900 mm,  
Plateau Supérieur Mélaaminé...



Les glissières sont prémontées pour permettre toutes les combinaisons de bacs

Le plateau vaste et linéaire constitue une véritable surface de manipulation



**Desserte Rangetout Double Colonne**  
L = 845 x p = 600 x H = 900 mm,  
Plateau Supérieur Mélaaminé...



**Tailles substituables 4 F1 = 2 F2 = 1 F3 !**

Bac F1 profondeur 75 mm  
312 x 427 x 75 mm

Bac F2 profondeur 150 mm  
312 x 427 x 150 mm

Bac F3 profondeur 300 mm  
312 x 427 x 300 mm

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Les Dessertes "Rangetout" - Vides</b>		
Desserte 1 Colonne	RTV 6010	343 €
Desserte 2 Colonnes	RTV 6020	454 €
Desserte 3 Colonnes	RTV 6030	525 €
<b>Les Bacs Tiroirs et Accessoires pour Bacs</b>		
Bac F1 à l'Unité 312 x 427 x 75 mm	RT F1	8 €
Bac F2 à l'Unité 312 x 427 x 150 mm	RT F2	14 €
Bac F3 à l'Unité 312 x 427 x 300 mm	RT F3	23 €
Lot de 3 Inserts à 3 Alvéoles	RG 13	24 €
Lot de 3 Inserts à 4 Alvéoles	RG 14	24 €
Lot de 3 Inserts à 6 Alvéoles	RG 16	24 €
Lot de 3 Inserts à 8 Alvéoles	RG 18	24 €
Lot de 6 Couvercles Translucides	RG 370	25 €

# DESSERTES ROULANTES

## MOBIROLL

- Faible encombrement
- Forte portée
- Un choix d'équipements et de revêtements

### DES ACCESSOIRES ASTUCIEUX...

LE PLATEAU HAUT PEUT EN OPTION ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN DOSSERET ANTI-CHUTES 3 FACES.

UN BLOC 2 PC FIXÉ SOUS LE PLATEAU SUPÉRIEUR PERMET DE RENDRE AUTONOME LA DESSERTTE SUR LAQUELLE LES ÉQUIPEMENTS PEUVENT RESTÉS BRANCHÉS, LE CORDON DE RACCORDEMENT AVEC FICHE MESURE 1,50 MÈTRES



Desserte MobiRoll 2 Plateaux  
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm

Toutes les dessertes ont une hauteur standard de 900 mm permettant de les positionner au même niveau que les paillasses

Le plateau supérieur peut être revêtu de Mélaminé, Grès Collé, Verre émaillé

Toutes les dessertes Mobilab, sont réalisées à l'aide d'une structure en tube carré de forte section 35 x 35 mm

Les piétements en H sont entretouillés à plusieurs niveaux pour permettre selon le modèle de disposer 2 ou 3 tablettes

Les plateaux inférieurs ou habillages divers sont réalisés en panneaux mélaminé de 19 mm avec chant PVC rigide



Desserte MobiRoll Placard  
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm  
1 Etagère Réglable

Les roulettes diamètre 100 mm à fort bandage non tachant équipent tous les modèles.

2 Roulettes sont équipées de freins permettant d'immobiliser la desserte dans toutes les positions



Desserte MobiRoll 3 Plateaux  
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm



Desserte MobiRoll Tiroirs  
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm  
1 Niche avec Etagère Réglable  
Equipée de 6 Bacs Tiroirs F1 Assortis en couleurs



Desserte Techno Roll à 1 Tiroir  
L = 600 x p = 600 x H = 900 mm  
Tiroir de dimensions utiles 420 x 500 x 120 mm

Descriptif	Référence	Prix TTC
Desserte 2 Plateaux - Dessus Grès	TR 10	359 €
Desserte 2 Plateaux - Dessus Mélaminé	TR 12	322 €
Desserte 2 Plateaux - Dessus Verre Emaillé	TR 17	369 €
Desserte 2 Plateaux - Plateau Stratifié	TR 23	333 €
Desserte 2 Plateaux - Plateau Multiplis	TR 24	358 €
Desserte 3 Plateaux - Dessus Grès	TR 20	377 €
Desserte 3 Plateaux - Dessus Mélaminé	TR 22	337 €
Desserte 3 Plateaux - Dessus Verre Emaillé	TR 27	386 €
Desserte 3 Plateaux - Plateau Stratifié	TR 33	338 €
Desserte 3 Plateaux - Plateau Multiplis	TR 34	363 €
Desserte Placard - Dessus Grès	TR 30	444 €
Desserte Placard - Dessus Mélaminé	TR 32	420 €
Desserte Placard - Dessus Verre Emaillé	TR 37	464 €
Desserte Tiroirs - Dessus Grès	TR 60	458 €
Desserte Tiroirs - Dessus Mélaminé	TR 62	439 €
Desserte Tiroirs - Dessus Verre Emaillé	TR 67	470 €
Dossieret 3 Faces Anti-chutes	TR 92	38 €
Desserte 2 Niveaux + Tiroir - Plateau Stratifié	TR 523	435 €
Desserte 2 Niveaux + Tiroir - Plateau Multiplis	TR 524	471 €
Bloc 2 PC Précâblé avec Cordon de Raccordement	SEL 192	78 €

## TABLES ROULANTES

Toutes les dessertes ont une hauteur standard de 900 mm permettant de les positionner au même niveau que les paillasses



Les plateaux inférieurs ou habillages divers sont réalisés en panneaux mélaminé de 19 mm avec chant PVC rigide (Gris clair)

**Table MobiRoll 2 Plateaux**  
L = 1200 x p = 600 x H = 900 mm  
(équipements électriques en option)

Les piètements en H sont entretoisés à plusieurs niveaux pour permettre selon le modèle de disposer 2 ou 3 tablettes

Le plateau supérieur peut être revêtu de Mélaminé, Grès Collé, Verre émaillé (autres surfaces sur devis...)



Les roulettes diamètre 100 mm à fort bandage non tachant équipent tous les modèles. 2 Roulettes sont équipées de freins permettant d'immobiliser la desserte dans toutes les positions

**Table MobiRoll Placard**  
L = 1200 x p = 600 x H = 900 mm  
1 Etagère Réglable  
(équipements électriques en option)

Sa largeur réduite à 420 mm permet son passage dans les couloirs de circulation les plus étroits

Le plateau supérieur peut se retirer permettant d'accéder par le haut aux équipements posés sur la tablette intermédiaire (très pratique pour les liquides)

Il est équipé de 3 tablettes, 2 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm pour varier l'espace de rangement à l'intérieur du chariot



Roulettes diamètre 75 mm de forte portée non tachantes

**Chariot Métal à Tablettes Réglables**  
L = 1055 x p = 420 x H = 725 mm

Réalisé tout en tube d'acier peint époxy, il garantit une grande solidité

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Tables MobiRoll</b>		
Table 2 Plateaux - Dessus Grès	TR 100	528 €
Table 2 Plateaux - Dessus Mélaminé	TR 102	461 €
Table 2 Plateaux - Dessus Verre Emailé	TR 107	563 €
<b>Table Placard - Dessus Grès</b>		
Table Placard - Dessus Mélaminé	TR 302	569 €
Table Placard - Dessus Verre Emailé	TR 307	671 €
<b>Chariot à Etagères Réglables</b>		
Chariot Métallique à Etagères Réglables	TR 34500	495 €

# CHARIOTS MOBIROLL

- Grande surface de dépose
- Forte portée supérieure à 200 Kg
- Un choix d'équipements et de revêtements



Galerie anti-chutes en fil renforcée sur 3 faces

Pare-chocs au 4 angles du plateau inférieur en caoutchouc non tachant

**Chariots Renforcés - Charge 300 Kg**  
L = 1000 x p = 505 x H = 950 mm  
2 ou 3 Plateaux

Ces chariots trouvent leur place dans tous les laboratoires, et spécialement dans les laboratoires nécessitant des mesures d'hygiène jusqu'à la stérilisation totale (agro-alimentaire, salles blanches, laboratoires vétérinaires, postes de dissection...)

L'Acier inoxydable est un matériau résistant parfaitement plan, et facile d'entretien.



4 Roulettes de diamètre 100 mm dont 2 avec frein équipent les modèles à 2 ou 3 plateaux

2 ou 3 Plateaux et 2 revêtements au choix: stratifié surmoulé ou compact

Armature en Tube de diamètre 32 mm épaisseur 1.5 mm



4 Roulettes pivotantes de très forte portée diamètre 160 mm montées sur platine

### Chariot Placard

De même concept que les modèles à plateaux, ce modèle est équipé d'un placard pour y ranger des équipements plus sensibles. Fermeture à clés, c'est un placard mobile de forte portée.

Tube plié, soudé à l'argon, Tablettes soudées directement à la structure



**Chariots Acier Inoxydable**  
L = 900 x p = 600 x H = 950 mm  
2 ou 3 Plateaux

Descriptif	Référence	Prix TTC
<b>Chariots Renforcés</b>		
Chariot Renforcé 2 Plateaux Méla miné	TR 32110	520 €
Chariot Renforcé 3 Plateaux Méla miné	TR 32210	615 €
Chariot Renforcé 2 Plateaux Stratifié	TR 34110	590 €
Chariot Renforcé 3 Plateaux Stratifié	TR 34210	675 €
<b>Chariots Acier Inoxydable</b>		
Chariot Inox 2 Plateaux	TR 35100	540 €
Chariot Inox 3 Plateaux	TR 35200	596 €
<b>Chariots Placards</b>		
Chariot Placard - Dessus Méla miné	TR 38102	630 €
Chariot Placard - Dessus Stratifié	TR 38103	682 €

## ACCESSOIRES INFORMATIQUES



### Tiroir extractible de sécurité pour portable

Ce tiroir de grandes dimensions permet de contenir en position fermée, un ordinateur portable muni d'un écran jusqu'à 17".

Le Tiroir est monté sur glissières à extraction totale.

En position sortie, l'écran peut être déployé, permettant à son utilisateur de travailler directement sans avoir à le sortir du tiroir. Le Tiroir devenant lui même espace de travail, le plateau du bureau reste totalement libéré.

Les câbles d'alimentation peuvent rester connectés. Ils ressortent par l'arrière du boîtier.

Le fond du tiroir est perforé pour permettre une bonne ventilation des équipements.

En position "fermé", le tiroir est verrouillable. Sa réalisation en tôle d'acier de forte épaisseur optimise la protection contre le vol et les dégradations éventuelles du matériel.

De plus en plus d'enseignants utilisent leur propre portable. Ce tiroir de sécurité inviolable, offre une solution facile à installer, sur tous les types de tables (Bureaux, Chaires, Tables de Laboratoire).

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tiroir extractible de sécurité pour portable	ACI 6201	131 €



### Support Clavier Bois

Support en Mélaminé 750 x 500 mm (espace souris compris), à fixer sous plateau grâce à son dispositif de glissières à roulement à billes.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Support Clavier Bois	ACI 200888	89 €



### Panier Porte Câbles

Une astuce pour ranger vos câbles, le panier fil à suspendre sous plateau (500 x 205 x 160 mm)

Descriptif	Référence	Prix TTC
Panier Porte Câbles	ACI 02	51 €



### Support Clavier - PVC Moulé

Support en PVC Moulé monobloc 600 x 500 mm (Hors tablette souris), à fixer sous plateau grâce à son dispositif de glissières à roulement à billes. Support de souris positionnable à droite ou à gauche. Plumier porte crayons intégré.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Support Clavier - PVC Moulé	ACI 200314	95 €

### Bras support d'écran plat à fixation sur table ou murale - "SECURISÉ"

- Fixation sur table ACI 52239

- Fixation murale ACI 52232

Pour plus de sécurité, la position de l'écran est verrouillable par goupille, de sorte que l'écran est protégé d'un choc éventuel avec le plateau... (Ce qui n'est pas le cas avec les bras flexibles traditionnels.)

Ce support Ecoline est fixé sur un tube qui glisse au travers du support.

En ajoutant un bras articulé doté de deux pivots qui permet un réglage de l'angle de vue et une grande flexibilité, ce produit complet remplit sa mission. Pour une solution ergonomique et abordable qui offre un gain d'espace.

Bras articulé à deux pivots.

Longueur totale du bras : 450 mm

Profondeur réglable

Hauteur réglable à plus de 200 mm

Rotation 360°, inclinaison 180°, pivot latéral 180°

Poids maximal supporté : 10 kg. / écran (jusqu'à 24"/24"W)

Hauteur du tube : 260 mm x Diamètre du tube : 38 mm

Verrouillage et déverrouillage rapide de la fixation du tube



Descriptif	Référence	Prix TTC
Fixation sur table	ACI 52239	172 €
Fixation murale	ACI 52232	172 €



### Support d'Ecran Plat

Permet d'ajuster l'écran en fonction de l'utilisateur, selon la hauteur, l'angle de vue, la distance et l'inclinaison qui conviennent le mieux.

Ecrans plats jusqu'à 19" - 10 kg maximum

Réglable de 210 à 370 mm.

Se pose ou se fixe par 4 points sur tous les plans.

(250 x 200 x 395 mm) - Epoxy Gris Clair.



Descriptif	Référence	Prix TTC
Support d'Ecran Plat	ACI 51302	127 €

## Plus d'Informations...

Les Mobiliers Informatiques pour écrans plats (Plot ExAO, Plot Placard, Plot à écran extractible) se juxtaposent aux Paillasse et permettent de protéger tous le matériel nécessaire au poste de travail...voir rubrique "Mobilier ExAO"



### Chariot UC Multiflex

Inclinaison réglable de la position horizontale jusqu'à 45°

Réglable en largeur pour les unités centrales de 170 à 250 mm

4 Roulettes dont 2 avec Freins

Couleur à Préciser (\*): Couleur "Aluminium" (AL) ou Couleur "Noire" (N)

Descriptif	Référence	Prix TTC
Chariot UC Multiflex	ACI 32202*	68 €



### Support UC Fixe à Suspendre

Dispositif fixable sous plateau par vis à bois.

Il est réglable en largeur de 50 à 275 mm et une hauteur réglable de 380 à 580 mm.

Il est fourni en couleur Aluminium et supporte une charge de 40 Kg.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Support UC Fixe à Suspendre	ACI 32312	105 €



### Support UC Orientable et Extractible à Suspendre

Mêmes caractéristiques que le modèle précédent; mais il offre la possibilité d'être extractible et orientable à 360° grâce à la combinaison d'un système rotule/glissière.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Support UC Orientable et Extractible à Suspendre	ACI 32322	127 €



### Meuble Placard pour Imprimantes Laser ou Jet d'Encre

Caisson support d'imprimante en panneaux de mélaminé haute densité de 19 mm d'épaisseur...

Deux portes battantes avec serrure.

Ce meuble peut être juxtaposé à la paillasse du professeur.

Dimensions 500 x 750 x 500 mm.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble Placard pour Imprimantes	EXA 70000	280 €



### Table pour imprimantes

laser ou Jet d'Encre.

2 Niveaux dont 1 réglable.

Equipée de 4 Roulettes dont 2 avec freins

(600 x 510 x 640 mm - Livrée en kit)

Couleurs à préciser (Noir/Hêtre - NH ou Gris/ Gris (GG).

Descriptif	Référence	Prix TTC
Table pour imprimantes	ACI 85215	205 €



### Meuble Unité Centrale Sous Paillasse

Module destiné à ranger l'unité centrale à proximité du plot écran.

L'espace intérieur permet de loger indifféremment une Tour ou une unité de type Desktop.

Le meuble est équipé de passe-câbles, d'une étagère réglable; il est fermé à clé afin de protéger l'équipement.

Dimensions 500 x 600 x 700 mm.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble Unité Centrale Sous Paillasse	EXA 7005	249 €

# LES SIÈGES TECHNIQUES...

...DES SIÈGES POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR !



## Tabouret Fixe de Laboratoire

Assise ronde galbée de 320 mm en multipli de hêtre feuilleté verni de 22 mm.  
Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.  
Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".  
Hauteur 580 mm.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tabouret Fixe de Laboratoire	ST 410327	48 €



## Tabouret Ergonomique Fixe

Assise Coque galbée de 400 x 400 mm en multipli de hêtre feuilleté verni de 22 mm.  
Structure en tube d'acier carré de 20 x 20 mm (avec barre repose pieds et entretoise basse) - Hauteur 620 mm.  
Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tabouret Ergonomique Fixe	ST 410621	146 €



## Chaise Réhaussée de Laboratoire

Assise et Dossier galbés en multipli de hêtre feuilleté verni 8 mm.  
Structure en tube d'acier 25 mm avec barre repose pieds anti-écartement.  
Peinture Epoxy - Coloris selon palette "ral".  
Hauteur d'assise 580 mm.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Chaise Réhaussée de Laboratoire	ST 110628	59 €



## Chaise Réglable Labo-Coque

Une coque polypropylène double paroi offre une assise agréable (effet de coussin d'air).

La coque est fixée sur une structure en aluminium cruciforme avec dispositif de réglage de la hauteur par lift gaz. Le repose-pied annulaire est proposé en standard.  
Réglable de 470 à 670 mm.

Roulettes optionnelles référence ST 3939N

Coloris disponibles Bleu Clair, Vert Clair, Jaune Clair

Descriptif	Référence	Prix TTC
Chaise Réglable Labo-Coque	ST 3938N	157 €
Roulettes	ST 3939N	64 €



### Tabouret Réglable

Assise ronde galbée en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Modèle très stable à 4 pieds.

Assise réglable de 480 à 600 mm de hauteur.

Structure en tube d'acier 25 mm avec barre

repose pieds anti-écartement.

Peinture Epoxy - Coloris Blanc

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tabouret Réglable	ST 2215N	89 €



### Tabouret Réglable par Lift Gaz

Assise ronde galbée de 340 mm en multipli de hêtre feuilleté verni 22 mm.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tabouret Réglable par Lift Gaz	ST 2051	145 €
Repose pieds	ST 200000	61 €
Jeu de Roulettes	ST 200010	25 €



### Tabouret Polyuréthane - Lift Gaz

Assise ronde de 340 mm très ergonomique en polyuréthane haute densité.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Descriptif	Référence	Prix TTC
Tabouret Polyuréthane - Lift Gaz	ST 2052	178 €
Repose pieds	ST 200000	61 €
Jeu de Roulettes	ST 200010	25 €



### Chaise Bois Réglable par Lift Gaz

Assise et Dossier en multipli de hêtre feuilleté verni.

Structure à 5 Branches en Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 540 à 800 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Descriptif	Référence	Prix TTC
Chaise Bois Réglable par Lift Gaz	ST 29010	157 €
Repose pieds	ST 200000	61 €
Jeu de Roulettes	ST 200010	25 €



### Chaise Polyuréthane - Lift Gaz

Assise et Dossier en polyuréthane haute densité avec Poignée de Préhension. Structure à 5 Branches en

Aluminium ou ABS Noir (au choix), réglable de 570 à 830 mm de hauteur.

Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Options :

ST 200000 "Repose pieds"

ST 200010 "Jeu de Roulettes"

Descriptif	Référence	Prix TTC
Chaise Polyuréthane - Lift Gaz	ST 29074	212 €
Repose pieds	ST 200000	61 €
Jeu de Roulettes	ST 200010	25 €



### Siège Ergonomique Polyuréthane Lift Gaz

Assise antidérapante avec dossier de maintien du bassin en polyuréthane haute densité et poignée de préhension.

Structure à 5 Branches en Aluminium réglable de 540 à 800 mm de hauteur.


Modèle à vérin à gaz, réglage en continu par manette latérale.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Siège Ergonomique Polyuréthane Lift Gaz	ST 2023	205 €

# LES TABLEAUX TRIPTIQUES


## GAMME MOBIBOARD

- Une Gamme Complète: Ecriture Craie, Ecriture Feutre, Surfaces Mixtes ou Sérigraphiées
- Acier Emaillé et Vitrifié à 800°C pour une Utilisation Intensive
- Tôle Emaillée P3, Favorise le Contraste pour un Excellent Confort de Lecture, d'Ecriture et d'Effaçage

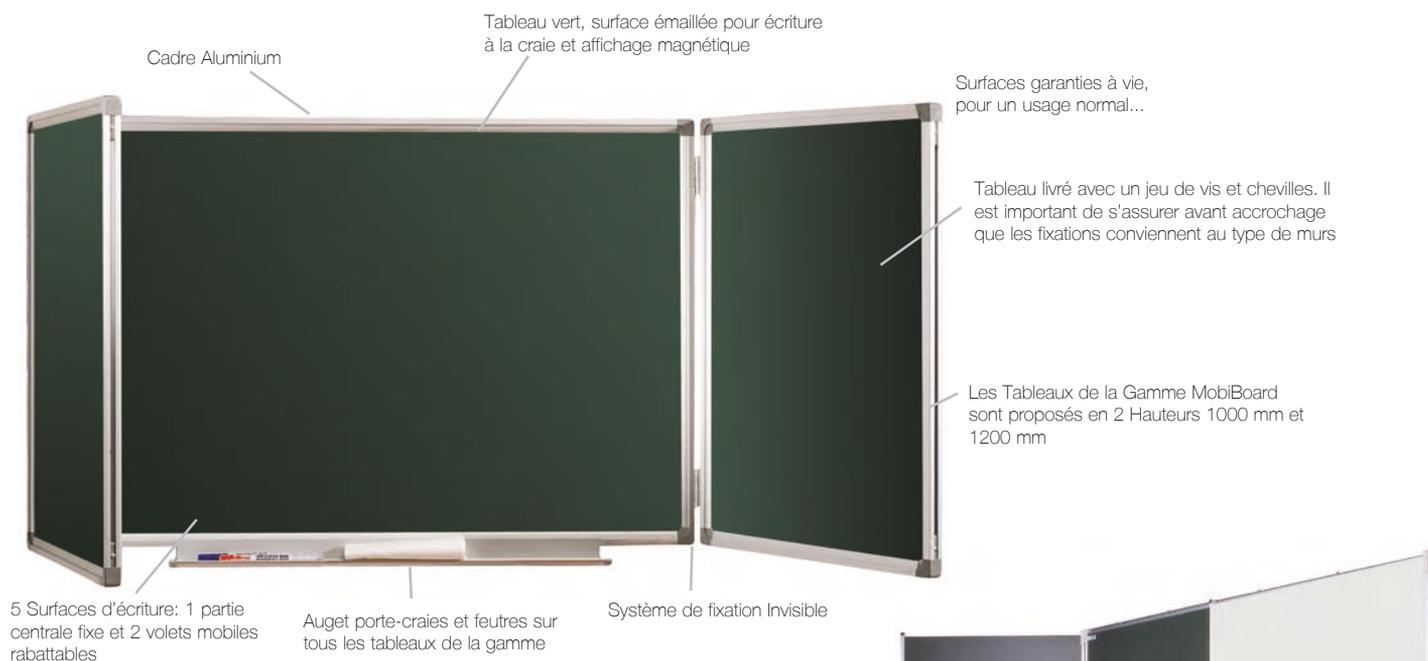

Surface émaillée blanche, pour écriture au marqueur effaçable à sec et affichage magnétique

Les Tableaux mixtes permettent de combiner des surfaces pour écriture à la craie ou au feutre, ou des surfaces sérigraphiées (en option).  
En standard les tableaux mixtes sont proposés en Vert à l'Intérieur et Blanc à l'Extérieur.

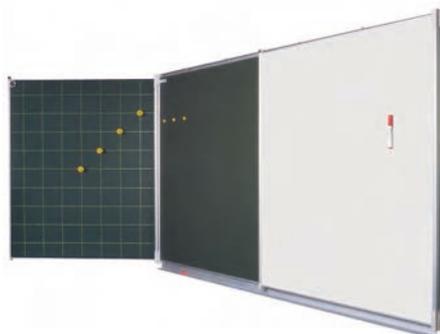

Sérigraphies optionnelles proposées:

- Solfège,
- Carrés 2 cm
- Carrés 5 cm
- Carrés 10 cm
- Carrés 1 cm renforcés 5 cm
- Carrés 2 cm renforcés 10 cm

Sur 1 ou 2 Volets latéraux intérieurs ou extérieurs.

Tarif unitaire quelque soit le type pour une surface sérigraphiée



Descriptif	Dimensions en mm (L x H)		Référence	Prix TTC
	Fermé	Ouvert		
Triptyque Vert MobiBoard	1500 x 1000	3000 x 1000	MB 133010	506 €
Triptyque Vert MobiBoard	2000 x 1000	4000 x 1000	MB 134010	576 €
Triptyque Vert MobiBoard	1500 x 1200	3000 x 1200	MB 133012	548 €
Triptyque Vert MobiBoard	2000 x 1200	4000 x 1200	MB 134012	640 €
Triptyque Blanc MobiBoard	1500 x 1000	3000 x 1000	MB 233010	506 €
Triptyque Blanc MobiBoard	2000 x 1000	4000 x 1000	MB 234010	576 €
Triptyque Blanc MobiBoard	1500 x 1200	3000 x 1200	MB 233012	548 €
Triptyque Blanc MobiBoard	2000 x 1200	4000 x 1200	MB 234012	640 €
Triptyque Mixte MobiBoard	1500 x 1000	3000 x 1000	MB 333010	506 €
Triptyque Mixte MobiBoard	2000 x 1000	4000 x 1000	MB 334010	576 €
Triptyque Mixte MobiBoard	1500 x 1200	3000 x 1200	MB 333012	548 €
Triptyque Mixte MobiBoard	2000 x 1200	4000 x 1200	MB 334012	640 €
Sérigraphie (par surface choisie quelque soit le type)			MB 335000	55 €

# LES TABLEAUX MONO-PANNEAU

## GAMME MOBIBOARD


- Une Gamme Complète: Ecriture Craie, Ecriture Feutre, Surfaces Mixtes ou Sérigraphiées
- Acier Emaillé et Vitrifié à 800°C pour une Utilisation Intensive
- Tôle Emaillée P3, Favorise le Contraste pour un Excellent Confort de Lecture, d'Ecriture et d'Effaçage

Tableau livré avec un jeu de vis et chevilles.

Il est important de s'assurer avant accrochage que les fixations conviennent au type de mur

Tableau vert, surface émaillée pour écriture à la craie et affichage magnétique

Les Tableaux de la Gamme MobiBoard sont proposés en 2 Hauteurs 1000 mm et 1200 mm

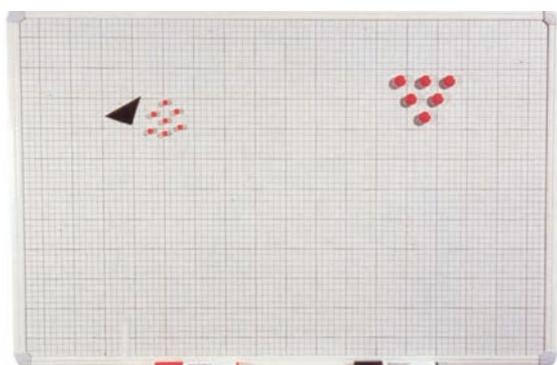

Sérigraphies proposées:

- Solfège,
- Carrés 2 cm
- Carrés 5 cm
- Carrés 10 cm
- Carrés 1 cm renforcés 5 cm
- Carrés 2 cm renforcés 10 cm

Sur les tableaux de largeurs 1200 et 1500 mm.

Tarif unitaire quelque soit le type pour une surface sérigraphiée

Plus d'Informations sur les T.B.I....

Découvrez Mimio dans la rubrique «communication», la solution qui rend interactif tous les tableaux...!



Système de fixation Invisible

Surfaces garanties à vie, pour un usage normal...

Cadre Aluminium



Auget porte craies et feutres sur tous les tableaux de la gamme

Surface émaillée blanche, pour écriture au marqueur effaçable à sec et affichage magnétique

Descriptif	Références des tableaux		Dimensions en mm (L x H)	Prix TTC
	Verts	Blancs		
Mono-panneau MobiBoard	MB 101210	MB 201210	1200 x 1000	164 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 101510	MB 201510	1500 x 1000	208 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 102010	MB 202010	2000 x 1000	245 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 103010	MB 203010	3000 x 1000	390 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 104010	MB 204010	4000 x 1000	492 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 101812	MB 201812	1800 x 1200	264 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 102012	MB 202012	2000 x 1200	276 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 103012	MB 203012	3000 x 1200	450 €
Mono-panneau MobiBoard	MB 104012	MB 204012	4000 x 1200	582 €
Sérigraphie (par surface choisie quelque soit le type)	MB 335000			55 €

## LES TABLEAUX PIVOTANTS

- Rotation Sur Axe Vertical ou Horizontal
- Double Surface Magnétique, Verte ou Blanche
- Structure Roulante


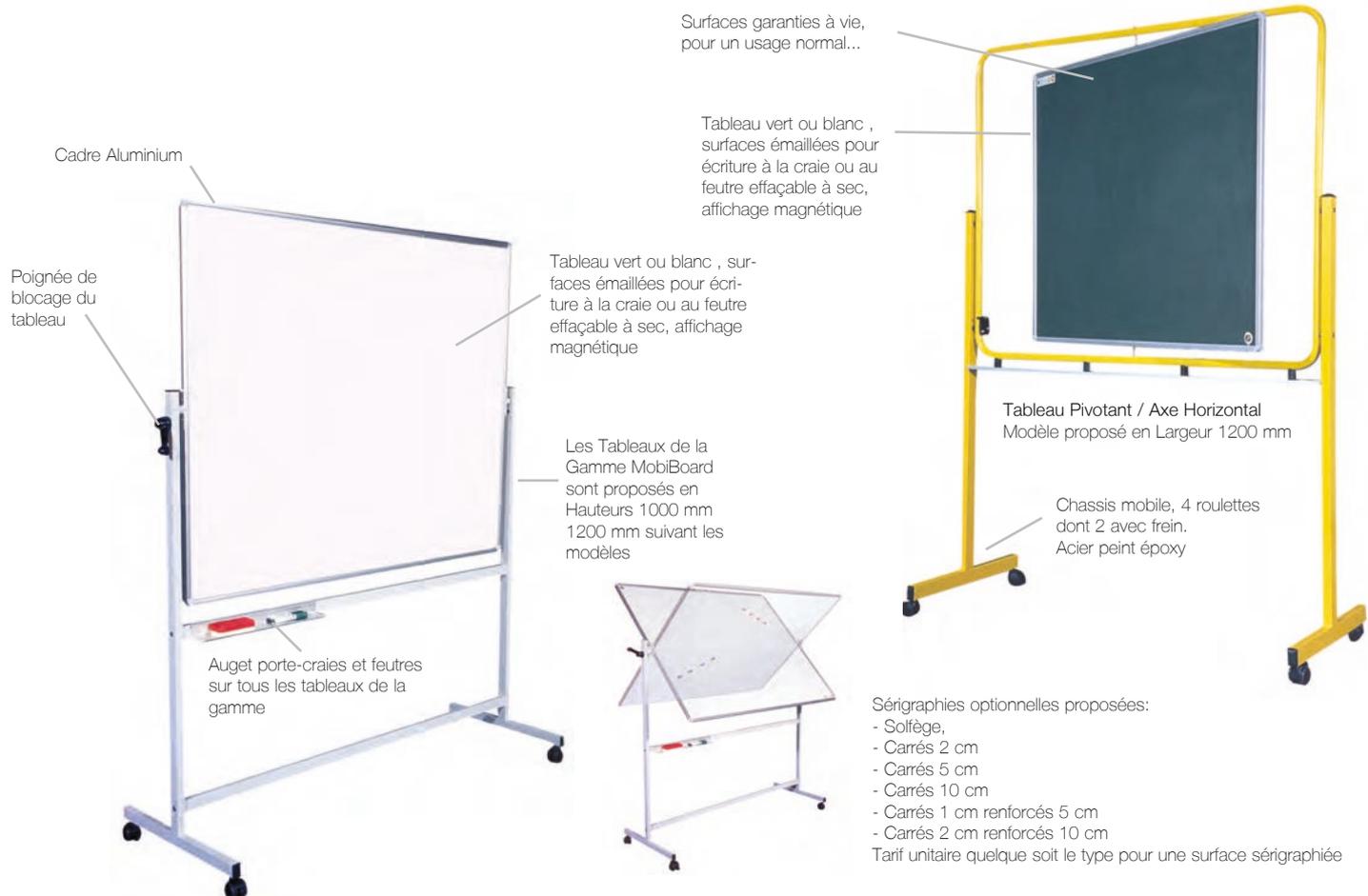


Tableau Pivotant / Axe Horizontal  
Modèle proposé en Largeurs 1200, 1500, 1800 et 2000 mm suivant les modèles

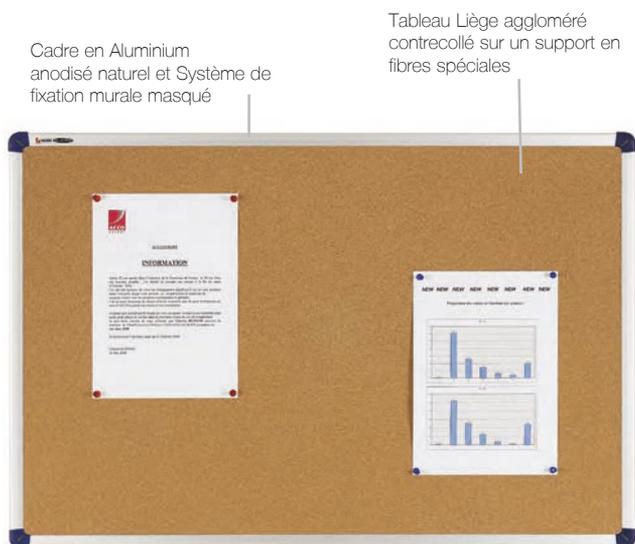

Descriptif	Dimensions en mm (L x H)	Référence	Prix TTC
Tableau Pivotant / Axe Vertical - Vert	1200 x 1000	MB 141210	397 €
Tableau Pivotant / Axe Vertical - Blanc	1200 x 1000	MB 241210	386 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Vert	1200 x 1000	MB 151210	534 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Vert	1500 x 1000	MB 151510	577 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Vert	2000 x 1200	MB 152012	694 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Blanc	1500 x 1200	MB 251512	614 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Blanc	1800 x 1200	MB 251812	653 €
Tableau Pivotant / Axe Horizontal - Blanc	2000 x 1200	MB 252012	674 €
Sérigraphie (par surface choisie quelque soit le type)		MB 335000	

### Les panneaux d'affichage

- Permettent un punaisage intensif et répété
- Favorise la diversité des moyens d'affichage

Descriptif	Dimensions	Référence	Prix TTC
Tableau Liège	1200 x 900 mm	MB 190920	53 €
Tableau Liège	1500 x 900 mm	MB 190921	67 €
Tableau Liège	1800 x 900 mm	MB 190922	70 €
Tableau Liège	1500 x 1200 mm	MB 190923	73 €

# LES VITRINES D’AFFICHAGE

## D’INTÉRIEUR OU D’EXTÉRIEUR

- Portes coulissantes ou portes battantes
- Grandes surfaces d’affichage
- Surfaces mixtes permettant l’écriture

2 types de surfaces d’affichage:  
Métal ou Liège.

Verre Sécurité 4 mm.  
3 Fois plus résistant que le verre classique.  
Ne s’altère pas dans le temps.  
Transparence irréprochable.  
Grande résistance au choc.  
Sécurité maximale: absence de bords tranchants en cas de bris de glace

Un affichage de qualité pour un message valorisé



Les Vitrines à Porte battante, à fond métallique ont une profondeur intérieure de 27 mm, les fonds lièges ont une profondeur de 18 mm Epaisseur Extérieure des deux versions 45 mm

Les vitrines destinées à être posées à l’intérieur sont proposées en deux versions Portes Battantes ou Portes Coulissantes

Les vitrines à portes coulissantes occupent un espace étroit et offrent une très grande surface d’affichage

Les documents peuvent être fixés par Aimants sur les surfaces métalliques qui peuvent aussi servir de surface d’écriture avec un marqueur effaçable à sec

Cadre en Aluminium anodisé naturel

Fermant à clés, elles permettent de sécuriser vos informations

Porte Battante à ouverture de Droite à Gauche ou de Gauche à Droite (à déterminer à l’installation)

Profondeur Utile des Vitrines à Portes Coulissantes 30 mm Epaisseur Extérieure 60 mm



Système de fixation murale masqué


L’Accrochage des documents se fait par punaises sur les fonds lièges



Encadrement conçu pour éviter toute formation de condensation et garantir une parfaite étanchéité

Les vitrines destinées à être posées à l’extérieur sont proposées uniquement à Portes Battantes et à fond métallique

Descriptif	Références des tableaux			Dimensions en mm (L x H)		
	Liège	Prix TTC	Métal	Prix TTC	Intérieur	Extérieur
<b>Les Vitrines d’Intérieur à Portes Coulissantes</b>						
Vitrine Intérieure pour 8 x A4	VIL 1848	246 €	VIM 1849	246 €	890 x 630	970 x 766
Vitrine Intérieure pour 12 x A4	VIL 1850	342 €	VIM 1851	342 €	1320 x 630	1410 x 766
Vitrine Intérieure pour 18 x A4	VIL 1852	451 €	VIM 1853	451 €	1990 x 630	2070 x 766
Vitrine Intérieure pour 27 x A4	VIL 1367	542 €	VIM 1855	542 €	1990 x 940	2070 x 1076
<b>Les Vitrines d’Intérieur à Portes Battantes</b>						
Vitrine Intérieure pour 4 x A4	VIL 833	107 €	VIM 834	146 €	450 x 630	595 x 670
Vitrine Intérieure pour 6 x A4	VIL 836	154 €	VIM 837	150 €	670 x 630	815 x 670
Vitrine Intérieure pour 8 x A4	VIL 839	166 €	VIM 840	185 €	890 x 630	1035 x 670
Vitrine Intérieure pour 9 x A4	VIL 842	229 €	VIM 843	229 €	670 x 940	815 x 980
<b>Les Vitrines d’Extérieur à Portes Battantes</b>						
Vitrine extérieure pour 4 x A4	-	-	VEM 856	149 €	450 x 630	595 x 670
Vitrine extérieure pour 6 x A4	-	-	VEM 860	193 €	670 x 630	815 x 670
Vitrine extérieure pour 8 x A4	-	-	VEM 864	220 €	890 x 630	1035 x 670
Vitrine extérieure pour 9 x A4	-	-	VEM 868	249 €	670 x 940	815 x 980

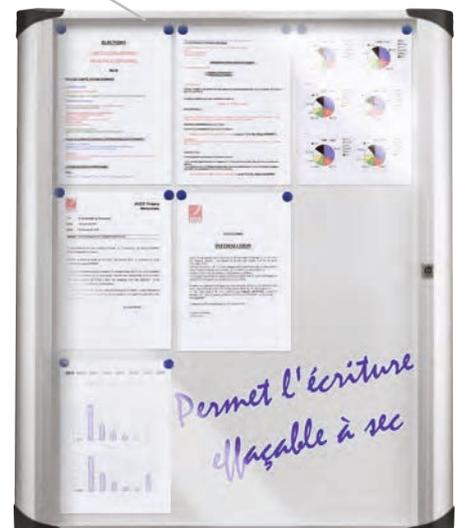

## LES TABLEAUX

### COULISSANTS ET TABLEAUX GUILLOTINES

- 1 panneau fixe, 1 ou 2 panneaux coulissants
- Surfaces mixtes possibles
- Devis sur étude d'implantation



Surface en acier vitrifié et émaillé à 800°. Technique garantissant le contraste des tableaux pour un confort d'écriture, de lecture et d'effaçage; ainsi qu'une très grande résistance pour un usage intensif.

Les différents types de surfaces peuvent être combinés selon vos besoins.

Surface émaillée blanche, pour écriture au marqueur effaçable à sec et affichage magnétique.

Tableau vert, surface émaillée pour écriture à la craie et affichage magnétique.

Cadre, Rails et Poteaux en Aluminium.

#### 2 modèles de tableaux coulissants :

- Le Modèle 3000 x 1200 mm, qui combine une surface fixe Verte pour l'écriture à la craie de 3000 x 1200 mm et une surface mobile Blanche pour écriture au feutre et projection de 1500 x 1200 mm...Une partie de la surface fixe est toujours masquée par la superposition de la surface mobile.

- Le Modèle 6000 x 1200 mm qui combine une surface fixe Verte pour l'écriture à la craie de 3000 x 1200 mm, positionnée au centre d'un double rail de 6000 mm et deux surfaces mobiles Blanches pour écriture au feutre et projection de 1500 x 1200 mm...de telle sorte qu'il est possible de dégager totalement les 2 tableaux mobiles pour disposer d'une très large surface de travail ou de se servir des panneaux mobiles pour masquer certaines informations écrites sur la surface fixe.

Les tableaux guillotines offrent jusqu'à 3 surfaces d'écriture. Les tableaux peuvent être manipulés manuellement ou électriquement.

Soubassement en panneaux de mélaminé.

2 Hauteurs de tableaux 1000 et 1200 mm.

Largeurs de 2000 à 5000 mm.

Dimensions hors tout 3440 mm

Un écran fixe, déroulable ou sur cadre inclinable peut être posé en arrière des surfaces d'écriture

Tous ces tableaux nécessitent une vérification de faisabilité sur site.

Équipement proposé sur devis.

Quelques modèles standards à guillotine manuelle et un modèle électrique sont proposés dans le tableau ci-dessous...

Une installation par un technicien spécialisé est proposée sur devis.

Descriptif	Dimensions en mm (L x H)		Référence	Prix TTC
	Fixe	Mobile		
Tableau Mixte Coulissant 3000 x 1200 mm	3000 x 1200 / (V)	1500 x 1200 / (B)	TCO 3120	sur devis
Tableau Mixte Coulissant 6000 x 1200 mm	3000 x 1200 / (V)	2 (1500 x 1200) / (B)	TCO 6120	sur devis



Pylône à triple chemin de roulement avec boîtier électrique. Finition soignée.



Clavier de commande électrique




Descriptif	Dimensions	Référence	Prix TTC
Guillotine 1 Surface Mobile Blanche/ Craie - Manuel	2000 x 1000 mm	TGU 2101	sur devis
Guillotine 2 Surfaces Mobiles Blanche/ Craie - Manuel	2000 x 1000 mm	TGU 2102	sur devis
Guillotine 2 Surfaces Mobiles Blanche/ Craie - Manuel	3000 x 1000 mm	TGU 3102	sur devis
Guillotine 2 Surfaces Mobiles Blanche/ Craie - Manuel	4000 x 1000 mm	TGU 4102	sur devis
Guillotine 2 Surfaces Mobiles Blanche/ Craie - Manuel	4000 x 1200 mm	TGU 4122	sur devis
Guillotine 2 Surfaces Mobiles Blanche/ Craie - Electrique	5000 x 1200 mm	TGU 5122	sur devis

# LES ÉCRANS DE PROJECTION

## ET VIDÉOPROJECTION

- Surfaces mâtes spécialement adaptées à la vidéoprojection - Non Feu M-1
- Dos de toiles de coloris noir pour éviter transparence et déperdition lumineuse
- Décliné en 3 modèles de tailles variables : trépied, mural manuel, mural électrique

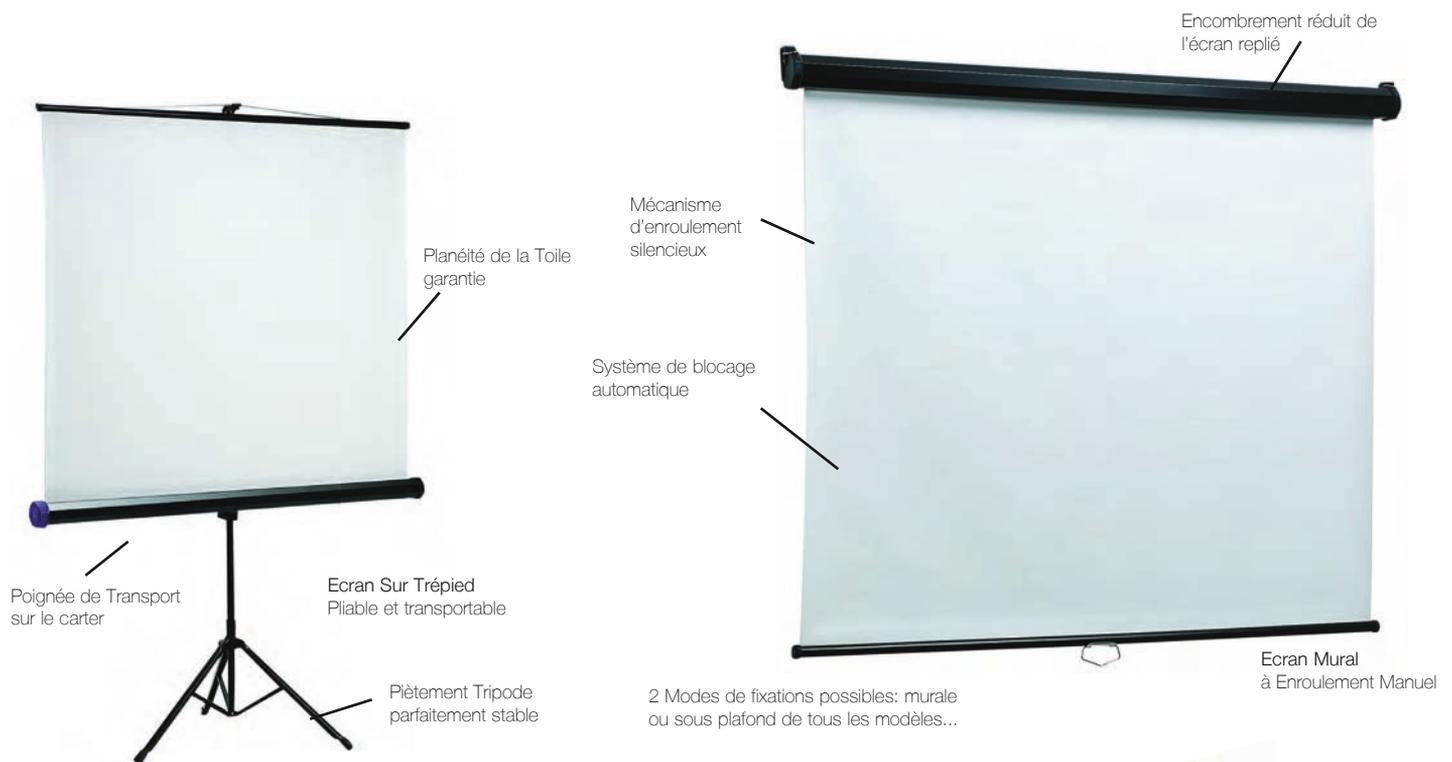

**Pointeur Laser Ergonomique**  
Indispensable pour souligner les éléments importants de vos présentations.  
Laser Classe II  
Piles AAA Fournies  
Conformes aux normes de sécurité européennes  
Laser CEN ELEC EN 60-825-1  
Portée 50 mètres  
*Ne jamais Viser les Yeux !*

Carter Métallique peint époxy

Interrupteur pouvant être installé à distance de l'écran

Câble de 2 mètres fourni avec l'écran (sortie du câble à gauche de l'écran)



Descriptif	Référence	Prix TTC
Ecran Trépied Haute luminosité - 2000 x 1500 mm	PJ 091120	234 €
Ecran Mural - 2000 x 1500 mm	PJ 097070	197 €
Ecran Electrique - 1920 x 1440 mm	PJ 094352	572 €
Ecran Electrique - 2400 x 1800 mm	PJ 094390	788 €



# LES MEUBLES À CASIER

## RANGEMENTS BOIS



**KAP 99542 - "Armoire 6 Casiers Boîte aux Lettres"**  
 900 x 450 x 950 mm.  
 6 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale.  
 Serrure à clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 6 Casiers Boîte aux Lettres	KAP 99542	896 €

**KAP 99544 - "Armoire 9 Casiers Boîte aux Lettres"**  
 900 x 450 x 1380 mm.  
 9 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale.  
 Serrure à clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 9 Casiers Boîte aux Lettres	KAP 99544	984 €

**KAP 99546 - "Armoire 12 Casiers Boîte aux Lettres"**  
 900 x 450 x 1800 mm.  
 12 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale.  
 Serrure à clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 12 Casiers Boîte aux Lettres	KAP 99546	1116 €

**KAP 99548 - "Armoire 16 Casiers Boîte aux Lettres"**  
 1200 x 450 x 1800 mm.  
 16 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale.  
 Serrure à clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 16 Casiers Boîte aux Lettres	KAP 99548	1470 €



**KAP 99552 - "Meuble à Courrier 12 Cases" sur Chaises Haute**  
 900 x 450 x 1800 mm.  
 12 Casiers de 272 x 400 x 140 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale. Clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble à courrier 12 cases sur chaise haute	KAP 99552	875 €

**KAP 99554 - "Meuble à Courrier 24 Cases" sur Chaises Haute**  
 900 x 450 x 1800 mm.  
 12 Casiers de 272 x 400 x 70 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale. Clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble à courrier 24 cases sur chaise haute	KAP 99554	1250 €

**KAP 99556 - "Meuble à Courrier 12 Cases" sur Structure Basse**  
 900 x 450 x 950 mm.  
 12 Casiers de 272 x 400 x 140 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale. Clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble à courrier 12 cases sur structure basse	KAP 99556	744 €



**KAP 99558 - "Meuble à Courrier 24 Cases" sur Structure Basse**  
 900 x 450 x 950 mm.  
 12 Casiers de 272 x 400 x 70 mm.  
 Porte avec serrure et fente postale. Clés individualisée.  
 Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble à courrier 24 cases sur structure basse	KAP 99558	1192 €



### KAP 99500 - "Armoire Mixte de Consultation"

800 x 450 x 1980 mm. Partie haute compartimentée en casiers de 240 mm de large permettant le rangement des documents A4+.  
Placard 1 tablette, 2 portes battantes, en partie basse.  
1 Tablette intermédiaire extractible montée sur glissières offre un large plan de consultation aux utilisateurs.  
Modèle présenté - Hêtre Clair.  
Les secrétariats, trouveront dans ce meuble trieur, un auxiliaire pratique.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire Mixte de Consultation	KAP 99500	765 €



### KAP 99510 - "Meuble à Cahiers de Textes, 36 Cases" sur Structure Basse

1200 x 450 x 1250 mm.  
36 Casiers de 374 x 400 x 70 mm.  
Modèle présenté - Hêtre Clair.

Descriptif	Référence	Prix TTC
Meuble à Cahiers de Textes, 36 Cases	KAP 99510	912 €

### KAP 99576 - "Armoire 12 Casiers Elèves"

900 x 450 x 1800 mm.  
12 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
Porte avec serrure.  
Serrure à clés individualisée.  
Modèle présenté - Ivoire et Structure Rouge

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 12 Casiers Elèves	KAP 99576	1110 €



### KAP 99571 - "Armoire 8 Casiers Elèves"

600 x 450 x 1800 mm.  
9 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
Porte avec serrure.  
Serrure à clés individualisée.  
Modèle non photographié

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 8 Casiers Elèves	KAP 99571	1075 €



### KAP 99578 - "Armoire 16 Casiers Boîte aux Lettres"

1200 x 450 x 1800 mm.  
16 Casiers de 272 x 410 x 400 mm.  
Porte avec serrure et fente postale.  
Serrure à clés individualisée.  
Modèle présenté - Hêtre Clair et Structure Gris Clair

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire 16 Casiers Boîte aux Lettres	KAP 99578	1435 €

Meuble proposé en 2 versions:

- En Simple-Corps, pour recevoir un écran plat ou cathodique et un lecteur vidéo.
- En Double-corps, le téléviseur est enfermé dans un caisson haut; le caisson bas étant destiné au rangement des différents périphériques



Serrure à clés. (Même numéro de clés sur les armoires double corps)

Les passages de câbles sont prévus à l'intérieur du meuble

4 Roulettes dont 2 avec Frein

Structure robuste en tube d'acier solidaire d'une plate-forme roulante

Armoire Audiovisuelle Simple-Corps PJ 1000601  
Dimensions utiles de l'armoire  
L 860 x p 550 x H 680 mm  
Dimensions totales  
L 950 x p 600 x H 1150 mm



Meubles réalisés en panneaux de mélaminé de 19 mm. Gris Clairs, Ivoire ou Hêtre Naturel sur Structure Grise Anthracite ral 7021

Armoire simple ou double à portes battantes à ouverture totale sur charnières renforcées

Armoire Audiovisuelle Double-Corps PJ 1000602  
Dimensions utiles de l'armoire Haute  
L 860 x p 550 x H 680 mm  
Dimensions utiles de l'armoire Basse  
L 860 x p 550 x H 540 mm  
Dimensions totales  
L 900 x p 600 x H 1850 mm

Descriptif	Référence	Prix TTC
Armoire Audiovisuelle Simple-Corps	PJ 1000601	710 €
Armoire Audiovisuelle Double-Corps	PJ 1000602	895 €